


HyFlex™ EDM

Número reducido de limas

HyFlex™ EDM permite reducir el número de limas utilizadas. HyFlex™ OneFile puede ser suficiente en los conductos pequeños y rectos. El número de limas puede variar dependiendo de la situación clínica. Todas las limas de NiTi HyFlex EDM se deben utilizar a 400 rpm y con un torque de hasta 2,5 Ncm (25 mNm), a excepción de las limas Glidepath, que se deben utilizar a 300 rpm y con un torque de hasta 1,8 Ncm (18 mNm).

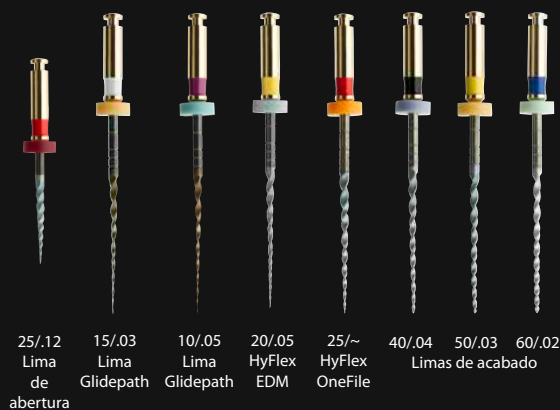

25/12 Lima de abertura
15/03 Lima Glidepath
10/05 Lima Glidepath
20/05 HyFlex EDM
25/~ HyFlex OneFile
40/04 50/03 60/02 Limas de acabado

	Abertura opcional	Glidepath	Conformado	
CORONAL				
CENTRO				
APICAL				
CORONAL				
CENTRO				
APICAL				
CORONAL				
CENTRO				
APICAL				

Información para pedidos

Sets HyFlex EDM		21 mm	25 mm
Set de conformado Simple HyFlex EDM 25/12; 10/05; 25/~	60022267	60019363	
Set de conformado Medium HyFlex EDM 10/05; 20/05; 25/~	60022277	60022278	
Set de conformado HyFlex EDM Max Curve 15/03; 10/05; 20/05	60023494	60023495	
Set de acabado HyFlex EDM 40/04; 50/03; 60/02	60022268	60019364	
Reposiciones de limas HyFlex EDM, 3 uds.	15 mm	21 mm	25 mm
Lima de abertura Hyflex EDM 25/12	60019596		
Lima Glidepath HyFlex EDM 15/03		60023493	60023492
Lima Glidepath HyFlex EDM 10/05		60022269	60019594
Lima de preparación HyFlex EDM 20/05		60022275	60022276
HyFlex EDM 25/~ OneFile		60022270	60019595
Lima de acabado HyFlex EDM 40/04		60022271	60019597
Lima de acabado HyFlex EDM 50/03		60022272	60019598
Lima de acabado HyFlex EDM 60/02		60022274	60019599
Accesorios HyFlex			
3 bloques de práctica endo, acrílico		60011085	

Tamaño/conicidad	HyFlex EDM Puntas de papel 100 uds.	HyFlex EDM Puntas de Gutapercha 60 uds.
20/05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/04	60022676	60022708
50/03	60022741	60022709
60/02	60022740	60022710
Surtido 20/05 - 60/02	60022744	60022705



Nuevo vídeo de usuario para la preparación segura y eficaz del conducto radicular con las limas de NiTi HyFlex EDM NiTi. ▼



<https://bit.ly/3h6BOYo>

Coltene Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid/Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

 **COLTENE**