

Temporary Cement


TempoSIL[®] 2

Cemento provisional de polivisiloxano para uso en diferentes superficies e indicaciones:

- Adhesión segura de las restauraciones provisionales sobre diente natural, aleaciones de metal, así como sobre Zirconio
- De fácil aplicación y retirada
- Su tiempo de fraguado es rápido
- Dos tonalidades para aplicaciones estéticas

TempoSIL 2 le asegura una adhesión óptima en distintas superficies así como también la integridad del margen gingival. TempoSIL 2 Tiene el balance ideal en elasticidad que le asegura una fácil retirada del exceso de cemento. Además TempoSIL 2 está disponible en dos tonalidades para hacerlo más estético: color *blanco* y color *dentina*.

Caso clínico: Restauración provisional

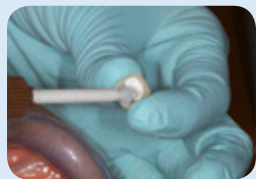

Aplique TempoSIL 2 directamente dentro de la restauración utilizando la punta oral.



Coloque la restauración aplicando muy poca presión.



Mantenga sujeta la restauración en su sitio entre 30 y 60 segundos



Después de colocarla, elimine el exceso de cemento TempoSIL 2




Restauración provisional cementada

Caso clínico: Implantes en puentes fijos



Coloque los implantes

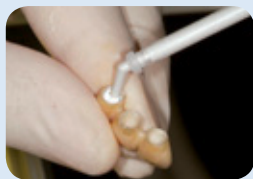

Aplique TempoSIL 2 con la punta oral directamente dentro de la restauración



Coloque la restauración de Zirconio aplicando una ligera presión




Después del fraguado, retire el exceso de TempoSIL 2



Restauración de Zirconio cementada

Superior Integridad Marginal


Evaluación de la penetración de la coloración dentro de las coronas provisionales cementadas con TempoSIL 2 después de dos semanas, aplicando agua templada a 37 grados seguidas de 24 horas de exposición dentro de la coloración*

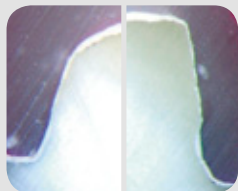

El excelente sellado marginal de TempoSIL 2 evita la penetración de la coloración y minimiza la penetración de agua.


Adhesión Segura

La fórmula mejorada de TempoSIL 2 da como resultado una retención micro-mecánica en diferentes superficies.*

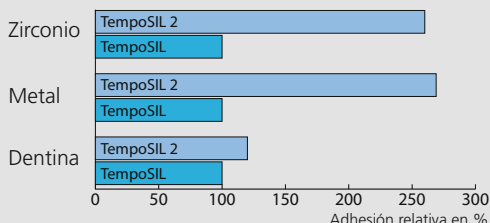

*Medición interna

Fácil retirada

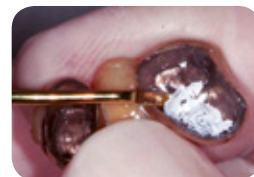

Se puede retirar sin dejar ningún residuo.

Información para pedidos:

- 3686 Pack de prueba de TempoSIL 2**
1 x TempoSIL 2 color dentina de 5ml y 1 x TempoSIL 2 blanco de 5ml
15 x Mixing Tips Brown long fine
- 6727 Color dentina kit de Introducción**
2 x TempoSIL 2 color dentina 5ml; 15 x Mixing Tips Brown long fine
- 6729 Color blanco kit de Introducción**
2 x TempoSIL 2 color blanco 5ml; 15 x Mixing Tips Brown long fine

- 6728 TempoSIL 2 color dentina recambio**
4 x TempoSIL 2 color dentina 5ml
- 6730 TempoSIL 2 color blanco recambio**
4 x TempoSIL 2 color blanco 5ml
- 6749 Puntas de mezclado/Puntas Orales**
40 x Mixing Tips Brown long fine

www.coltenewhaledent.com
© 2011 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 5300
Fax +41 (0)71 757 5301
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent