

Temporary Cement

TempoSIL[®] 2

UN SEUL ciment provisoire PVS aux indications variées sur différentes surfaces.

- Des restaurations provisoires qui adhèrent aussi bien au matériau de reconstitution, aux alliages métalliques et au Zirconium qu'à la dent naturelle en toute sécurité.
- Simple à appliquer et facile à retirer.
- Temps de prise rapide.
- Deux teintes pour des applications esthétiques.

TempoSIL 2 assure une adhésion maximale sur différentes surfaces et garantit un joint marginal de qualité supérieure. La composition du TempoSIL 2 lui confère une élasticité idéale pour l'élimination des excès du ciment provisoire. Pour de meilleurs résultats esthétiques le TempoSIL 2 est maintenant disponible en deux teintes : *blanc* et *dentine*.

Cas Clinique: restauration provisoire



Placer le TempoSIL 2 directement dans la restauration à l'aide de l'embout intra-oral.



Insérer la restauration en exerçant une légère pression



Maintenir la restauration en place de 30 à 60 secondes



Après la prise, enlever les excès de ciment TempoSIL 2



Restauration provisoire scellée en place.

Cas Clinique: piliers implantaires avec bridge



Piliers implantaires en place



Placer le TempoSIL 2 à l'aide de l'embout intra-oral directement dans la restauration.



Placer la restauration en Zirconium en exerçant une légère pression




Après la prise, enlever les excès de ciment TempoSIL 2



Restauration en Zirconium scellée en place

Joint marginal de qualité supérieure


Évaluation de la pénétration du colorant sous des couronnes provisoires scellées au TempoSIL 2 après 2 semaines dans l'eau à 37° C suivies de 24 heures de pénétration du colorant.*

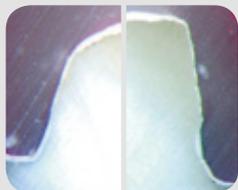

La qualité supérieure du joint marginal de TempoSIL 2 prévient la pénétration du colorant et réduit les risques de dissolution du ciment.

Adhésion sécuritaire

La formule innovante du TempoSIL 2 permet de créer des micro-rétentions mécaniques sur différentes surfaces.*

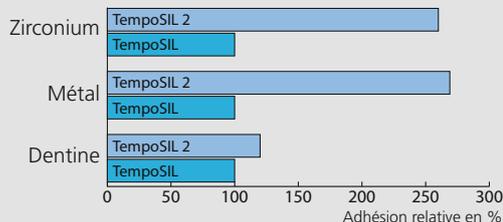

*Mesures internes

Retrait sans problème



Retrait sans laisser aucun résidu

Pour commander

3686 Kit d'essai TempoSIL 2

1 seringue 5ml TempoSIL 2 Dentine; 1 seringue 5ml TempoSIL 2 Blanc
15 x Mixing Tips Brown long fine

6727 Kit d'introduction TempoSIL 2 Dentine

2 seringues 5ml TempoSIL 2 Dentine ; 15 x Mixing Tips Brown long fine

6729 Kit d'introduction TempoSIL 2 Blanc

2 seringues 5ml TempoSIL 2 Blanc; 15 x Mixing Tips Brown long fine

6728 Réassort TempoSIL 2 Dentine

4 seringues 5ml TempoSIL 2 Dentine

6730 Réassort TempoSIL 2 Blanc

4 seringues 5ml TempoSIL 2 Blanc

6749 Embouts mélangeurs/embouts intra-oraux

40 x Mixing Tips Brown long fine

www.coltenewhaledent.com
© 2011 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 5300
Fax +41 (0)71 757 5301
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent s.a.r.l.

19 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72058 Le Mans Cedex 2/France
Tél +33 2 43 39 30 30
Fax +33 2 43 39 30 40
info@coltenewhaledent.fr

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent