

SYSTÈME DE RESTAURATION COMPOSITE DIRECTE

BRILLIANT COMPONEER®

Pour un sourire brillant





BRILLIANT COMPONEER® Pour un sourire brillant

Restaurations esthétiques des dents antérieures en une seule séance

BRILLIANT COMPONEER sont des coquilles composites prêtes à l'utilisation destinées à la restauration de dents antérieures. Ce système sophistiqué allie les avantages de la restauration directe aux avantages de la technique indirecte de pose de facettes. Chaque correction peut être exécutée de

manière aussi simple et efficace que des restaurations complètes de dents antérieures. Les facettes sont disponibles en différentes tailles et teintes d'émail et peuvent être individualisées sans effort. **Pour le patient, cela correspond à un sourire brillant en une seule séance.**

Un composite brillant

Les coquilles d'émail sont le fruit de la technologie de charges submicroniques établie de BRILLIANT EverGlow et sont fabriquées de manière industrielle. Le matériau se caractérise de manière générale par la haute résistance de son brillant grâce à une composition raffinée de charges spécifiques.

Les facettes brillent simultanément même à une épaisseur de seulement 0,3 mm grâce à leur excellente stabilité. La surface exceptionnellement lisse des facettes BRILLIANT COMPONEER peut être polie en un tour de main pour obtenir un fini brillant.



Une fixation monobloc

Une couche du composite universel BRILLIANT EverGlow est tout simplement appliquée pour fixer la facette BRILLIANT COMPONEER. L'utilisation du même matériau de base génère alors une liaison fixe et homogène qui constitue la base idéale d'une restauration fiable. La consis-

tance lisse et l'excellente mouillabilité de BRILLIANT EverGlow garantissent une manipulation agréable de BRILLIANT COMPONEER. Un adhésif parfaitement harmonisé et des aides pratiques au positionnement et au modelage des facettes complètent le système.

- Restaurations hautement esthétiques des dents antérieures
- Restauration mini-invasive à base de composite
- Une seule séance – pas de passage au laboratoire nécessaire
- Un brillant durable grâce à d'excellentes propriétés de polissage
- Haute rentabilité pour le cabinet et le patient

Deux teintes d'émail translucides pour une caractérisation personnalisée

BRILLIANT COMPONEER
Bleach Translucent




BRILLIANT COMPONEER
Translucent



Brillant durable tout en respectant la substance

Préparation mini-invasive

Le processus de fabrication unique de facettes BRILLIANT COMPONEER permet la production d'épaisseurs particulièrement fines à partir de 0,3 mm, gage d'une préparation mini-invasive respectueuse de la substance dentaire existante. Les coquilles composites à fabrication industrielle présentent simultanément une homogénéité et une stabilité excellentes.

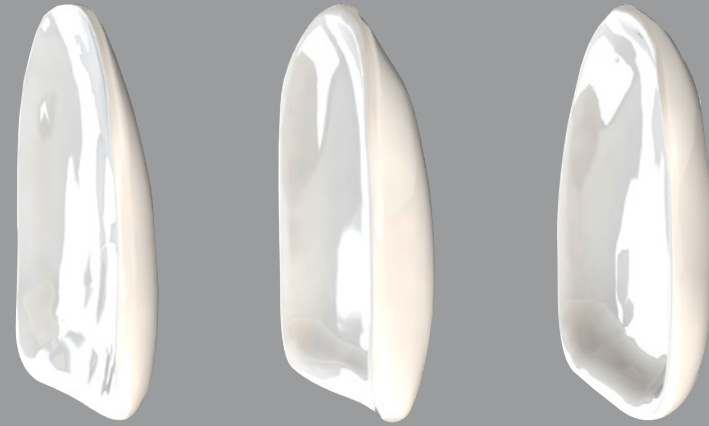

BRILLIANT COMPONEER

Produit concurrent A

Produit concurrent B

Source : mesures des unités IM-TECHNOLOGY AG, Suisse

Excellente propriété d'incrustation


Tous les produits de la série composite BRILLIANT se caractérisent par leur excellente propriété d'incrustation. Il est ainsi possible d'intégrer les facettes Componeer de manière discrète. Le choix de la teinte appropriée via le composite de fixation BRILLIANT EverGlow est aussi un

jeu d'enfant grâce au concept pratique de teintes « Duo Shade » à doubles teintes comme A1/B1 ou A2/B2. Par ailleurs, le dégradé naturel de la dent est reproduit de manière adroite grâce à l'épaisseur progressive des facettes translucides vers le bord incisal.

Résistance durable de l'éclat et des teintes

En tant que pionnier de la thérapie par obturation esthétique, COLTENE est depuis toujours synonyme de solutions innovantes. Les facettes BRILLIANT COMPONEER sont pré-polymérisées dans le cadre d'un processus de production spécifiquement conçu. Grâce à la composition des charges raffinée, les coquilles composites présentent une surface exceptionnellement soyeuse. Par ailleurs, les facettes se démarquent par la résistance remarquable de leur brillant et de leur teinte. Un résultat durable garanti !

Une comparaison de la série COMPONEER classique et de la facette BRILLIANT COMPONEER dans le stimulateur de brosse à dents démontre la résistance améliorée du brillant après une mise en charge intensive de plus de 20 000 mouvements de brossage.

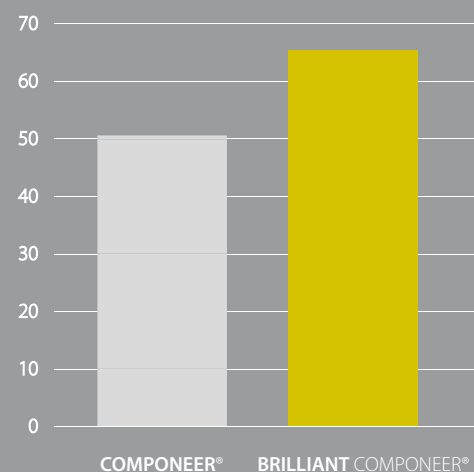

Source : données internes

Excellente adhérence grâce à la micro-rétention

La surface interne micro-rétentive unique de BRILLIANT COMPONEER augmente significativement la mouillabilité des coquilles composites par un adhésif. Il est ainsi possible d'obtenir une adhérence nettement supérieure à celle par exemple permise par les facettes céramiques classiques.




Une grande longévité permise par une élasticité comparable à celle de la dentine

Une fois les facettes sous charge, d'importantes forces de traction sont générées à la surface adhésive entre la dent et le matériau de restauration. Les contraintes restent faibles grâce au module d'élasticité similaire à celle de la dentine de BRILLIANT COMPONEER.

Il est ainsi possible de prévenir les fissures, les ruptures ou les éclats – une bonne base pour des restaurations particulièrement robustes.

Module élastique : 9,8 GPa
Résistance à la flexion 125 MPa

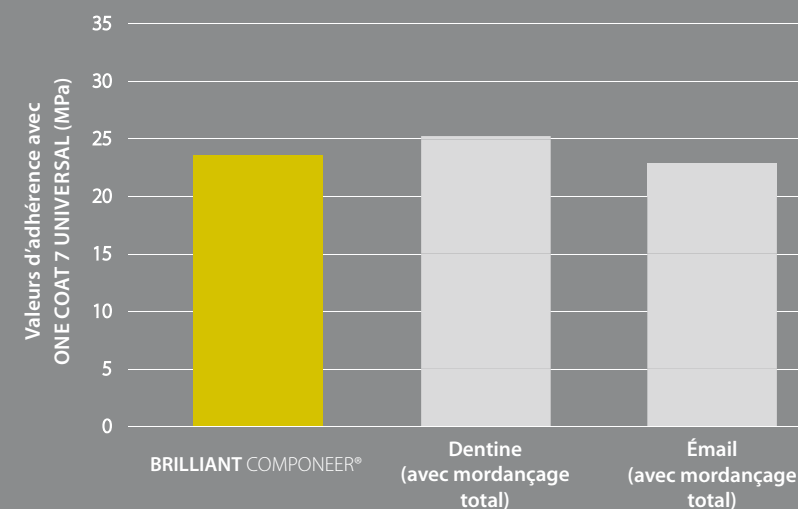

Source : données internes

Fixation fiable à la substance dentaire

ONE COAT 7 UNIVERSAL est le partenaire idéal pour la fixation de facettes BRILLIANT COMPONEER. L'adhésif monocomposant photopolymérisable peut être utilisé de manière universelle dans le cadre de toutes les techniques actuellement courantes : que cela soit par auto-mordantage, par mordantage sélectif ou par mordantage total, ONE COAT 7 UNIVERSAL présente dans chaque situation d'extraordinaires valeurs d'adhérence.

Le plus pour vos patients ...

Les patients informés savent ce qu'ils veulent

Un sourire brillant et plein d'assurance, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Vos patients souhaitent briller dans leur vie et optimisent en continu leur propre apparence. De petites corrections sont

idéalement réalisées de manière rapide et simple sans devoir faire d'inutiles pauses au quotidien. Le client éclairé attend de plus un rapport qualité-prix attractif.



Les facettes BRILLIANT COMPONEER convainquent les patients exigeants par :

- Résultats esthétiques
- Importante résistance du brillant et grande longévité
- Bonne qualité au prix juste
- Solution rapide en une seule séance
- Traitement mini-invasif, préparation respectueuse des tissus dentaires
- Pas de passage au laboratoire, ni de prise d'empreinte nécessaire ou de restauration temporaire ratée

... et pour votre cabinet

Les cabinets modernes se démarquent par des traitements innovants

Vous gérez votre cabinet de manière rentable et conformément aux derniers standards techniques. Des offres de traitement innovantes donnent confiance à vos patients et vous gardez une lon-

gueur d'avance sur vos concurrents. Vos clients apprécient le conseil compétent en vue d'un traitement optimal et sont ravis de bénéficier de solutions attractives et personnalisées.

Votre cabinet profite aussi du système de restauration composite directe :

- Résultats esthétiques durables
- Efficace en comparaison avec la restauration composite directe
- Traitement mini-invasif par rapport à la technique à facette indirecte
- Haute rentabilité dans le cadre d'une utilisation quotidienne
- Aucune prise d'empreinte, pas de laboratoire nécessaire
- Un système composite harmonisé de manière optimale
- Des possibilités d'utilisation variées pour une série d'indications classiques
 - Restauration et recouvrement de défauts consécutifs à une carie
 - Recouvrement d'anciennes restaurations
 - Reconstruction de perte de substance dentaire
 - Restauration de fractures dentaires
 - Allongement des bords incisifs
 - Corrections cosmétiques de décolorations et de malocclusions dentaires
 - Correction de malformation anatomique
 - Fermeture de diastème



« Mes patients adorent leur nouveau sourire. Ils sont souvent étonnés de la rapidité et du caractère économique de l'exécution de solutions de haute qualité par le dentiste.

En termes de rentabilité, BRILLIANT COMPONEER me permet de calculer tous les coûts moi-même sans laboratoire ni autre étape intermédiaire. »


Dr Mario Besek, Suisse

BRILLIANT COMPONEER®

Réussir en quelques étapes



1 La situation initiale : des dents antérieures présentant d'anciennes restaurations décolorées

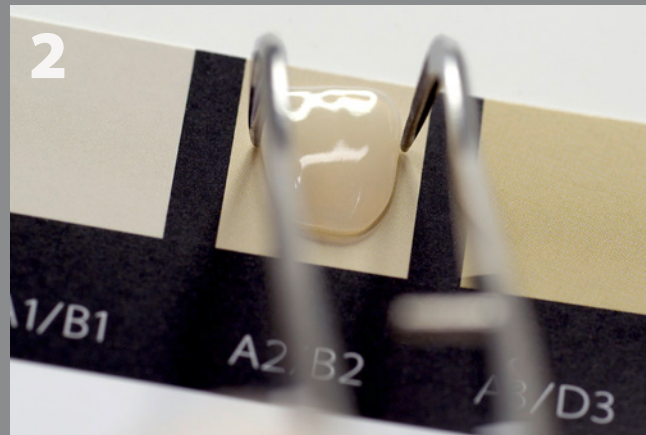


2 Choix de teinte : le teintier Shade Guide permet de déterminer la teinte de la facette BRILLIANT COMPONEER et du matériau de fixation.



3 Choix de taille : suite à la préparation, la taille appropriée est choisie au moyen du ContourGuide transparent.



4 Fixation : application de ONE COAT 7 UNIVERSAL après exécution de la technique de mordantage total.

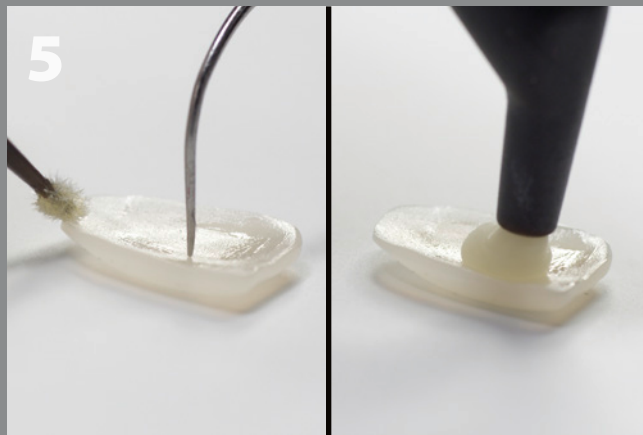

5 Préparation : appliquer ONE COAT 7 UNIVERSAL et BRILLIANT EverGlow en vue de la fixation.



6 Positionnement : la facette BRILLIANT COMPONEER est positionnée sur la dent avant d'être polymérisée.



7 Polissage : un bref polissage permet de faire encore plus ressortir le brillant naturel du matériau.



8 Le résultat : un sourire éclatant deux semaines après le traitement.

CONSEIL

Retour terrain : aussi uniques que vos patients

Les facettes BRILLIANT COMPONEER peuvent être aisément personnalisées. Un disque permet d'ajuster la forme de base anatomique à chaque patient et la texture de surface labiale peut être accentuée par des fraises diamantées à grain fin.



VISIONNER LA VIDÉO COMPLÈTE



www.componeer.info

CONSEIL

Retour terrain : une réparation aisée

Comme pour toutes les restaurations à base de composite, de petites corrections sont à tout moment possibles : BRILLIANT COMPONEER et BRILLIANT EverGlow présentant la même base de composite, les facettes peuvent être fixées en toute simplicité avec le composite universel et même être ultérieurement réparées.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Sets BRILLIANT COMPONEER

Contenu	RÉF									
	Bleach Transluent ¹				Transluent ²					
	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	XL
Set BRILLIANT COMPONEER pour maxillaire	6 unités	11, 12, 13, 21, 22, 23	60023198	60023200	60023201	60023203	60023204	60023206	60023207	60023209
Set BRILLIANT COMPONEER pour prémolaires du maxillaire	2 unités	14, 24	60023194	-	60023195	-	60023196	-	60023197	-
Set BRILLIANT COMPONEER pour mandibule	6 unités	31, 32, 33, 41, 42, 43	60023210	60023211	-	-	60023212	60023213	-	-


Réassorts BRILLIANT COMPONEER

Contenu	Unité	RÉF								
		Bleach Transluent ¹				Transluent ²				
		S	M	L	XL	S	M	L	XL	
Maxillaire	11	1 unité	60023122	60023128	60023134	60023140	60023158	60023164	60023170	60023176
	12	1 unité	60023123	60023129	60023135	60023141	60023159	60023165	60023171	60023177
	13	1 unité	60023124	60023130	60023136	60023142	60023160	60023166	60023172	60023178
	21	1 unité	60023125	60023131	60023137	60023143	60023161	60023167	60023173	60023179
	22	1 unité	60023126	60023132	60023138	60023144	60023162	60023168	60023174	60023180
	23	1 unité	60023127	60023133	60023139	60023145	60023163	60023169	60023175	60023181
Mandibule	31	1 unité	60023146	60023152	-	-	60023182	60023188	-	-
	32	1 unité	60023147	60023153	-	-	60023183	60023189	-	-
	33	1 unité	60023148	60023154	-	-	60023184	60023190	-	-
	41	1 unité	60023149	60023155	-	-	60023185	60023191	-	-
	42	1 unité	60023150	60023156	-	-	60023186	60023192	-	-
	43	1 unité	60023151	60023157	-	-	60023187	60023193	-	-

Maxillaire						
FDI	13	12	11	21	22	23

Maxillaire		
FDI	14	24

Mandibule						
FDI	43	42	41	31	32	33

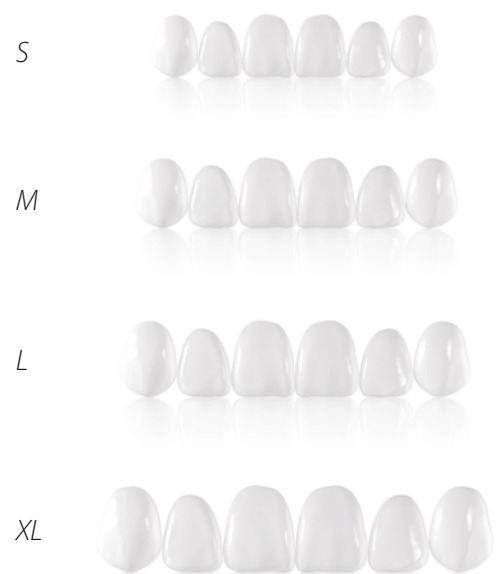

¹ La nouvelle teinte Transluent correspond à l'ancienne teinte Universal COMPONEER
² La nouvelle teinte Bleach Transluent correspond à l'ancienne teinte White Opalescent COMPONEER

Kit Seringues BRILLIANT COMPONEER

RÉF	Article	Accessoires
60023214	Seringues de kit d'introduction	
		25 x Broses COMPONEER
		1 x COMPONEER Contour Guide - mandibule M
		1 x Placer
		1 x COMPONEER Contour Guide - mandibule S
		1 x Etchant Gel S
		1 x Instrument de modelage MBC
		2 x Placer Adapter
		10 x Placer Stamp
		1 x Polissoir silicone 2303RA
		1 x Polissoir silicone 2311RA
		1 x Polissoir silicone 2403RA
		1 x Polissoir silicone 2411RA
		1 x COMPONEER Contour Guide - maxillaire L
		1 x COMPONEER Contour Guide - maxillaire M
		1 x COMPONEER Contour Guide - maxillaire S
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow A1/B1
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow A2/B2
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow Transluent (Trans)
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow Bleach Transluent (BL Trans)
		1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
		1 x 20 unités Aiguilles d'application
		1 x Teintier BRILLIANT COMPONEER



- 1 x 6 Facettes pour maxillaire, Bleach Transluent, M, 11-13/21-23
- 1 x 6 Facettes pour maxillaire, Bleach Transluent, L, 11-13/21-23
- 1 x 6 Facettes pour maxillaire, Transluent, M, 11-13/21-23
- 1 x 6 Facettes pour maxillaire, Transluent, L, 11-13/21-23
- 1 x 2 Facettes pour prémolaires de maxillaire, Bleach Transluent, L, 14/24
- 1 x 2 Facettes pour prémolaires de maxillaire, Transluent, L, 14/24

Kit Tips BRILLIANT COMPONEER

RÉF	Article	Accessoires
60023215	Tips du kit d'introduction	
		25 x Broses COMPONEER
		1 x COMPONEER Contour Guide - mandibule M
		1 x Placer
		1 x COMPONEER Contour Guide - mandibule S
		1 x Etchant Gel S
		1 x Instrument de modelage MBC
		2 x Placer Adapter
		10 x Placer Stamp
		1 x Polissoir silicone 2303RA
		1 x Polissoir silicone 2311RA
		1 x Polissoir silicone 2403RA
		1 x Polissoir silicone 2411RA
		1 x COMPONEER Contour Guide - maxillaire L
		1 x COMPONEER Contour Guide - maxillaire M
		1 x COMPONEER Contour Guide - maxillaire S
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow A1/B1
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow A2/B2
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow Transluent (Trans)
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow Bleach Transluent (BL Trans)
		1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
		1 x 20 unités Aiguilles d'application
		1 x Teintier BRILLIANT COMPONEER



- 1 x 6 Facettes pour maxillaire, Bleach Transluent, M, 11-13/21-23
- 1 x 6 Facettes pour maxillaire, Bleach Transluent, L, 11-13/21-23
- 1 x 6 Facettes pour maxillaire, Transluent, M, 11-13/21-23
- 1 x 6 Facettes pour maxillaire, Transluent, L, 11-13/21-23
- 1 x 2 Facettes pour prémolaires de maxillaire, Bleach Transluent, L, 14/24
- 1 x 2 Facettes pour prémolaires de maxillaire, Transluent, L, 14/24

Pour obtenir de plus amples informations sur les formes et les tailles, rendez-vous sur notre page d'accueil www.componeer.info



Au sein de mon cabinet, je réalise maintenant une restauration avec BRILLIANT COMPONEER presque chaque semaine. Dans le cadre de mes travaux pratiques, je suis toujours étonnée par la rapidité avec laquelle les nouveaux utilisateurs apprennent à manipuler les coquilles composites faciles à mettre en œuvre.

Il est en très peu de temps possible de réussir aussi des restaurations de dents antérieures complexes d'un point de vue esthétique.

Dr méd. Patrizia Lucchi, Italie




Des préparations mini-invasives sont pour moi la base de chaque solution thérapeutique durable. Je ne dois éliminer qu'une très faible quantité de substance dentaire saine pour les facettes composites comparativement très fines et extrêmement stables. Il est ainsi possible de les utiliser de manière rapide et aisée pour une multitude d'indications.

Dr méd. Sylvia Rahm, Allemagne



© COLTENE – www.coltene.com



Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com



LIEN POUR OBTENIR DE PLUS
AMPLES INFORMATIONS



www.componeer.info

 **COLTENE**