

roeko Gelatamp

Notice d'utilisation

FR

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Le conserver pour le consulter par la suite.

1. PROPRIÉTÉS

Gelatamp (14 × 7 × 7 mm) est une éponge de gélatine à effet hémostatique à laquelle ont été ajoutés 5 % d'argent colloïdal. Gelatamp est une éponge destinée à l'absorption du sang ainsi qu'à la stabilisation du caillot sanguin pour favoriser l'hémostase et la prévention des complications inflammatoires après une extraction dentaire. Contenant de l'argent colloïdal, elle permet d'éviter les complications pendant la cicatrisation et inhibe la colonisation microbienne de la plaie.

2. COMPOSITION

10 mg de Gelatamp contiennent :

Gélatine durcie Ph. Eur.	9,5 mg
Argent colloïdal Ph. Eur.	0,5 mg

3. INDICATION

Plaies cavitaires hémorragiques après extraction dentaire.

4. MODE D'EMPLOI

Après ouverture de la capsule d'aluminium, débarrasser Gelatamp dans des conditions d'asepsie. Il est alors prêt pour un emploi immédiat. En cas de besoin, la taille de la petite éponge peut être ajustée à la plaie cavitaire, sans la comprimer. Pour les plaies majeures, deux éponges de Gelatamp peuvent être utilisées.

Mettre immédiatement en place l'éponge sèche et non comprimée dans la plaie cavitaire fraîche et remplie de sang. Laisser l'éponge absorber autant de sang que possible (contrôle visuel). Afin de ne pas nuire à l'épithélisation souhaitée, l'éponge ne doit pas dépasser le bord intérieur de la gencive. Ainsi, l'alvéole est définitivement soignée et ne doit plus être lavée.

5. STÉRILITÉ

Le Gelatamp est livré stérilisé aux rayons gamma. La stérilité est garantie jusqu'à la première utilisation, lorsque l'emballage est non endommagé et fermé. Il convient de jeter les emballages endommagés avant utilisation.

6. CONTRE-INDICATIONS

Plaies infectées, suintantes ou purulentes, hypersensibilité à l'argent ou à la gélatine.

7. EFFETS SECONDAIRES

La guérison peut être retardée en cas d'utilisation incorrecte, en particulier lorsque les espaces alvéolaires sont contaminés.

8. INTERACTIONS AVEC D'AUTRES PRODUITS

L'utilisation simultanée de pâtes alvéolaires, de pansements de plaies ou autres dispositifs ainsi que l'imprégnation avec des produits liquides ou des médicaments tels que des dérivés tensio-actifs anioniques, des antiseptiques contenant du phénol, du lactate d'éthacridine, des acides minéraux dilués et des solutions salines concentrées, peuvent entraver la cicatrisation et doivent être exclues. Éviter absolument tout contact avec du peroxyde d'hydrogène pour éviter la décoloration de l'éponge.

9. CONSEILS DE CONSERVATION

Gelatamp présente des propriétés hygroscopiques. Par conséquent, il convient de refermer l'emballage immédiatement après utilisation et de le conserver à l'abri de l'humidité et de la lumière. Tenir les dispositifs médicaux hors de la portée des enfants.

Gelatamp peut être conservé pendant 3 ans. Il peut être utilisé jusqu'à la date de péremption. Après ouverture, utiliser dans les quatre semaines. Ne plus l'utiliser après la date figurant sur l'emballage et sur l'étiquette.

Les éponges non utilisées peuvent être mises au rebut avec les déchets biologiques. Le flacon en plastique, le couvercle et la feuille en aluminium sont recyclables.














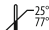


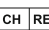

10. PRÉSENTATION

20 éponges REF 274002

50 éponges REF 274007



Glossary

-  Consult instructions for use
-  Medical Device
-  Legal Manufacturer
-  Catalogue Number
-  Manufacturing Date
-  Expiry Date
-  Batch Code
-  Single use only
-  Sterilized using irradiation
-  Single sterile barrier system
-  Do not use if package is damaged
-  Keep dry
-  Keep away from sun light
-  Temperature limitation
-  Bio material / Animal origin
-  Medical substance
-  Swiss representative
-  Conformity mark Russia

Coltene/Whaledent
GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstraße 30
 89129 Langenau / Germany
 T +49 7345 805 0
 F +49 7345 805 201
 info.de@coltene.com

COLTENE