


HANEL

Precisione al punto giusto.

Occlusione precisa per
un morso allineato.



 COLTENE

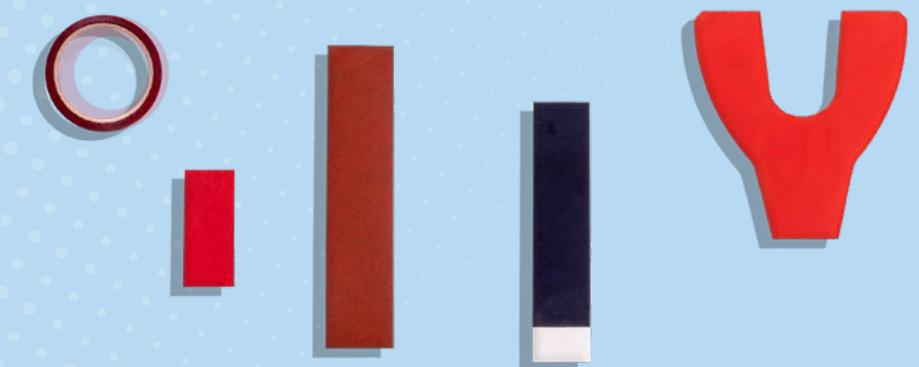


Dritti al punto.

Individuare e trattare i problemi di occlusione

La verifica e la correzione dell'occlusione sono tecniche estremamente impegnative della moderna odontoiatria. Grazie alla gamma completa di prodotti HANEL, siamo in grado di aiutarvi a rilevare le interferenze occlusali. È possibile eliminare e persino prevenire le compromissioni causate dai più piccoli punti di contatto che provocano dolore e danni ai denti dei pazienti.

Oltre ai diversi materiali di controllo HANEL, offriamo anche una gamma di accessori per rendere la manipolazione ancora più semplice.

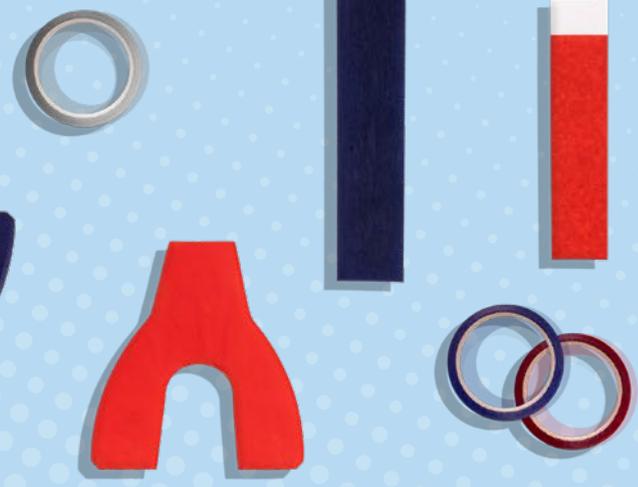

Successo assicurato con trasmissione progressiva del colore

Le nostre carte per articolazione e film per occlusione HANEL funzionano secondo il principio della trasmissione progressiva del colore. Man mano la pressione dei denti aumenta, il colore viene rilasciato dal nostro dispositivo per test. Le superfici con colorazione intensa indicano un contatto occlusale, mentre il punto di contatto vero e proprio è solo leggermente marcato e circondato dal colore.



Effetti delle interferenze occlusali

In seguito a restauri, estrazioni o trattamenti ortodontici, la più piccola interferenza funzionale modifica l'occlusione statica e dinamica del sistema craniomandibolare. I sintomi di questi disturbi includono bruxismo, problemi all'articolazione temporo-mandibolare, mal di testa, tensione muscolare e persino acufeni.

Sindrome DCM = Disfunzione craniomandibolare

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| Cefalea | Problemi all'ATM |
| Ipersensibilità alla luce | Bruxismo |
| Mal d'orecchi | Difficoltà di deglutizione |
| Acufeni | Dolore al collo |
| Sensibilità al rumore | Dolore alle spalle |

Fase 1

Carta per articolazione

Per la prima fase del test, consigliamo di utilizzare le nostre carte per articolazione HANEL da 200 µ, 80 µ e 40 µ.

Tutte le nostre carte sono una scelta eccellente per i test di occlusione statica e sono caratterizzate da:

- marcatura efficace e affidabile in diverse condizioni;
- marcatura su diversi materiali;
- applicazione in studio e in laboratorio.



Carta per articolazione 80 µ e 40 µ

Per test medio-fini.


- Disponibile in rotoli o fogli a forma di I, C e U
- Per una marcatura semplice, rapida e precisa
- Colorazione sui due lati
- Monocolore o bicolore
- Colore intenso per una buona marcatura

Carta per articolazione 200 µ

Per la prima fase del test.

- Disponibile in strisce contenute in una pratica scatola dispenser
- Permette di avere una rapida panoramica della situazione dei contatti occlusali

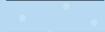

		200 µ		
	300 fogli (18 × 50 mm)	480392		480397
				

Spiegazione

-  Monocolore su un lato
-  Monocolore su due lati
-  Bicolore su due lati

		80 µ	40 µ
	72 fogli	 480367	480337
		 480364	-
		 -	480332
	144 fogli	 480377	-
		 480374	-
	144 fogli (20 × 105 mm)	 480387	-
		 480384	-
	120 fogli (22 × 110 mm)	 -	480352
		 -	480354
		 -	480357
	15 m (L 22 mm)	 -	480322
		 -	480327



Fase 2

Film per occlusione

Per la seconda fase del test consigliamo di utilizzare il nostro film per occlusione HANEL da 12 μ . Individuate i punti di contatto più fini e approfittate del principio del trasferimento progressivo del colore. Per il film da 22 mm è disponibile un pratico dispenser con taglierina integrata.

I nostri film

- sono molto fini
- garantiscono una marcatura estremamente precisa dei microcontatti
- marcano contatti e microcontatti
- non macchiano
- sono resistenti allo strappo
- hanno uno o due lati
- sono monocolori o bicolore

Film per occlusione 12 μ

Per un adattamento occlusale di precisione, il film HANEL soddisfa tutte le esigenze della gnatologia moderna. Disponibile in rotoli da 22 mm e 80 mm.


	12 μ 22 mm \times 25 m	12 μ 80 mm \times 25 m
	480021	480031
	480022	480032
	480023	480033
	480041	480051
	480042	480052
	480043	480053
	480165	-

OccluFoil+ 12 μ

Può essere utilizzato per tecniche di verifica dell'occlusione che richiedono il digrignamento dei denti da parte del paziente oppure che prevedono la trazione del film da parte del dentista.

- Molto più resistente allo strappo
- Estremamente sottile

	12 μ 22 mm \times 25 m
	60022258
	60022259
	60022260
	60022262
	60022263
	60022264
	60022266

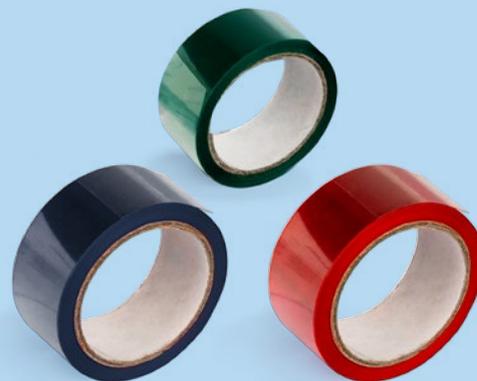

Fase 3

Film Shimstock

Per la fase finale, raccomandiamo il nostro film Shimstock HANEL de 8 μ .

Lo Shimstock è un film metallico privo di rivestimento colorato. Con i denti in occlusione normale, deve essere ancora possibile far scorrere il film tra i contatti molati. Se i muscoli esercitano pressione, il film viene trattenuto.



	8 μ 8 mm \times 5 m
	480180

Accessori



Dispenser di film

Per rotoli da 22 mm.

- Trasparente
- Con taglierina integrata

480620



Pinzette Miller

Le pinzette di precisione sono indispensabili quando si lavora con film ultra sottili. Tutte le pinzette sono sterilizzabili in autoclave.

Dritta 480610
Curva 480612



Spray per occlusione – Okklu-top

Indicato per rilevare in laboratorio i punti di contatto prossimali sulle superfici interne di ponti e corone.

- Spray di indicazione micropolverizzato
- Il colore viene spruzzato in modo uniforme
- Lo speciale ugello tubolare permette di spruzzare con precisione anche su piccole aree
- Buona marcatura su oro, ceramica e denti in resina
- Consente di rilevare anche i punti di contatto più piccoli
- Si rimuove facilmente con acqua o alcol



Bomboletta, ● 480410
75 ml ● 480411

© COLTENE – www.coltene.com

Note legali / redazione

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contatti di vendita

COLTENE Italia S.r.l
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
IT-20832 Desio (MB)
+39 0362 62 67 32
info.it@coltene.com

Centro Assistenza

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lun.-Ven. dalle 8:00 alle 17:00 CET

COLTENE