

# roeko Gelatamp Blister Pack

## Istruzioni per l'uso

IT

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare per futuro riferimento.

### 1. CARATTERISTICHE

Gelatamp (14 × 7 × 7 mm) è una spugna in gelatina ad effetto emostatico addizionata con un 5 % di argento colloidale, che consente, se applicata nella cavità lasciata da un'operazione, di eseguire una medicazione ottimale. Gelatamp è destinato ad assorbire il sangue e stabilizzare il coagulo al fine di promuovere l'emostasi, così come a prevenire complicanze infiammatorie dopo l'estrazione del dente. In abbinamento con argento colloidale, previene complicanze nella fase di guarigione della ferita e inibisce la colonizzazione microbica della ferita stessa.

### 2. COMPOSIZIONE

10 mg di Gelatamp contengono:

Gelatina solidificata Ph. Eur.	9,5 mg
Argento colloidale Ph. Eur.	0,5 mg

### 3. INDICAZIONE

Cavità aperte sanguinanti dopo estrazione di denti.

### 4. ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo avere aperto un blister, prelevare Gelatamp in condizioni di sterilità/asettiche. Gelatamp è immediatamente pronta all'uso. Se necessario, adattare la misura della spugnetta alle dimensioni della cavità da tamponare in modo che non eserciti alcuna compressione. In caso di grandi ferite, si possono usare anche due spugnette Gelatamp.

Subito dopo aver eseguito l'intervento, inserire nella cavità appena formata e piena di sangue la spugnetta asciutta senza comprimerla. La spugnetta deve impregnarsi completamente di sangue (controllo visivo). Per non pregiudicare la riepitelizzazione, la spugna non deve sporgere oltre il margine interno della gengiva. L'alveolo è così medicato definitivamente e non deve essere più lavato.

### 5. STERILITÀ

Gelatamp è sterilizzata ai raggi gamma. La sterilità è garantita se la confezione è integra e sigillata. Prima dell'uso eliminare eventuali confezioni che risultino danneggiate.

### 6. CONTROINDICAZIONI

Ferite infette, secernenti e purulente; ipersensibilità all'argento o alla gelatina.

### 7. EFFETTI INDESIDERATI

Possono verificarsi disturbi della guarigione in caso di impiego non corretto, specialmente in caso di contaminazione della cavità alveolare.

### 8. INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

L'impiego concomitante di paste alveolari, coni per medicazione o simili, come pure l'impregnazione con sostanze o medicinali liquidi, quali tensioattivi anionici, antisettici fenolici, lattato di etacridina, acidi minerali diluiti e soluzioni saline concentrate, possono ostacolare la guarigione della ferita e devono pertanto essere evitati. Escludere il contatto con acqua ossigenata poiché provocherebbe lo sbiancamento della spugna.

### 9. CONSERVAZIONE

Poiché le spugnette Gelatamp possiedono la caratteristica di assorbire l'umidità, vanno conservate in luogo asciutto. Conservare la confezione di Gelatamp chiusa e al riparo dalla luce. Tenere i dispositivi medici fuori della portata dei bambini.

Le spugnette Gelatamp si conservano per 3 anni. Non utilizzare oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e sul blister.

Le spugnette non utilizzate possono essere smaltite senza problemi nei rifiuti biologici; la confezione in blister e il cartone possono essere conferiti al materiale da riciclare.














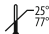


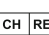

### 10. CONFEZIONE

20 blister

REF 274008

CE  
0483

#### Glossary

-  Consult instructions for use
-  Medical Device
-  Legal Manufacturer
-  Catalogue Number
-  Manufacturing Date
-  Expiry Date
-  Batch Code
-  Single use only
-  Sterilized using irradiation
-  Single sterile barrier system
-  Do not use if package is damaged
-  Keep dry
-  Keep away from sun light
-  Temperature limitation
-  Bio material / Animal origin
-  Medical substance
-  Swiss representative
-  Conformity mark Russia

Coltene/Whaledent  
GmbH + Co. KG  
Raiffeisenstraße 30  
89129 Langenau / Germany  
T +49 7345 805 0  
F +49 7345 805 201  
info.de@coltene.com

 COLTENE