

roeko Gelatamp

Istruzioni per l'uso

IT

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare per futuro riferimento.

1. CARATTERISTICHE

Gelatamp (14 × 7 × 7 mm) è una spugna in gelatina ad effetto emostatico addizionata con un 5% di argento colloidale, che consente, se applicata nella cavità operatoria, di eseguire una medicazione ottimale. Gelatamp è destinato ad assorbire il sangue e stabilizzare il coagulo al fine di promuovere l'emostasi, così come a prevenire complicanze infiammatorie dopo l'estrazione del dente. In abbinamento con argento colloidale, previene complicanze nella fase di guarigione della ferita e inibisce la colonizzazione microbica della ferita stessa.

2. COMPOSIZIONE

10 mg di Gelatamp contengono:

Gelatina solidificata Ph. Eur.	9,5 mg
Argento colloidale Ph. Eur.	0,5 mg

3. INDICAZIONE

Cavidades de la herida con hemorragia después de la extracción dental.

4. ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver aperto lo strato di alluminio, prelevare Gelatamp in condizioni asettiche. Gelatamp è immediatamente pronta all'uso. Se necessario, adattare la misura della spugna alle dimensioni della cavità da tamponare in modo che non eserciti alcuna compressione. In caso di grandi ferite, si possono usare anche due spugne Gelatamp.

Subito dopo l'intervento, inserire nella cavità appena formata e piena di sangue la spugna asciutta senza comprimerla. La spugna deve impregnarsi completamente di sangue (controllo visivo). Per non pregiudicare la riepitelizzazione, la spugna non deve sporgere oltre il margine interno della gengiva. L'alveolo è così medicato definitivamente e non necessita di ulteriore irrigazione.

5. STERILITÀ

Gelatamp è sterilizzata ai raggi gamma. La sterilità è garantita fino al primo impiego se la confezione è integra e sigillata. Prima dell'uso eliminare eventuali confezioni che risultino danneggiate.

6. CONTROINDICAZIONI

Ferite infette, secernenti e purulente; ipersensibilità all'argento o alla gelatina.

7. EFFETTI INDESIDERATI

Possono verificarsi ritardi di guarigione in caso di impiego non corretto, specialmente in caso di contaminazione della cavità alveolare.

8. INTERAZIONI CON ALTRI PRODOTTI

L'impiego concomitante di paste alveolari, coni per medicazione o simili come pure l'impregnazione con sostanze o medicinali liquidi, quali surfattanti anionici, antisettici fenolici, lattato di etacridina, acidi minerali diluiti e soluzioni saline concentrate, possono ostacolare la guarigione della ferita e devono pertanto essere evitati. Evitare il contatto con acqua ossigenata poiché provocherebbe lo sbiancamento della spugna.

9. CONSERVAZIONE

Date le proprietà idroassorbenti di Gelatamp, la confezione deve essere chiusa subito dopo l'uso e conservata in luogo asciutto e al riparo dalla luce.

Tenere i dispositivi medici fuori della portata dei bambini.

Gelatamp si conserva per 3 anni e può essere utilizzata fino alla data di scadenza nella confezione non aperta. Dopo l'apertura utilizzare entro quattro settimane. Non utilizzare più il prodotto oltre la data di scadenza riportata sulla confezione e sull'etichetta.

Le spugne non utilizzate possono essere smaltite senza problemi con i rifiuti di laboratorio, mentre la confezione in materiale plastico, il coperchio e la pellicola d'alluminio possono essere destinati al riciclaggio.



















10. CONFEZIONI

20 spugne REF 274002

50 spugne REF 274007

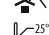

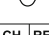Glossary

-  Consult instructions for use
-  Medical Device
-  Legal Manufacturer
-  Catalogue Number
-  Manufacturing Date
-  Expiry Date
-  Batch Code
-  Single use only
-  Sterilized using irradiation
-  Single sterile barrier system
-  Do not use if package is damaged
-  Keep dry
-  Keep away from sun light
-  Temperature limitation
-  Bio material / Animal origin
-  Medical substance
-  Swiss representative
-  Conformity mark Russia

Coltene/Whaledent
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com