

A white and green surgical suction tip is shown against a blue background. The tip is white with a green section at the end. Water is flowing from the tip, creating a dynamic splash. The background is a gradient of blue, and the water splash is highly detailed with reflections.


roeko

Surgitip

Absaugkanülen

Erfüllen Sie Ihre Ansprüche in Chirurgie und Endodontie


 COLTENE

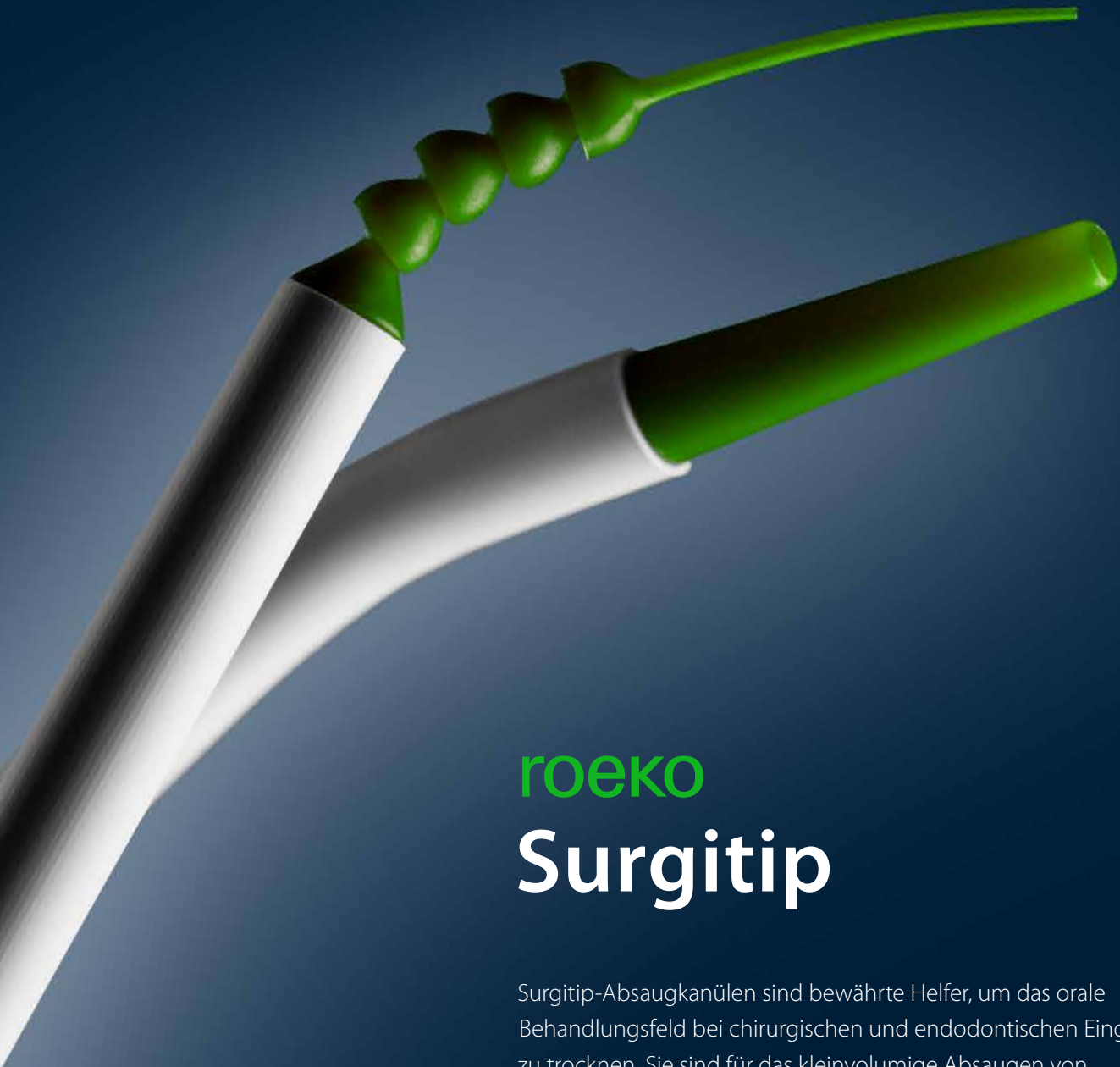

roeko Surgitip

Surgitip-Absaugkanülen sind bewährte Helfer, um das orale Behandlungsfeld bei chirurgischen und endodontischen Eingriffen zu trocknen. Sie sind für das kleinvolumige Absaugen von Flüssigkeit und festen Partikeln vorgesehen und ermöglichen das Absaugen auch im engen dentalen Operationsumfeld. Dank ihres speziellen Designs sind sie für die Arbeit unter Mikroskop oder Lupe geeignet. Hygienische und einfache Handhabung machen sie zu einem erfreulichen Begleiter in der zahnärztlichen Praxis.

- Deutlicher Kontrast zum Behandlungsfeld durch die grüne Spitze
- Keine Sichtbeeinträchtigung durch schlanke Form und konische Spitze
- Hygienisch und zeitsparend, da steril und einzeln verpackt und sofort einsatzbereit
- Verschiedene Spitzengeometrien und -durchmesser für ein breites Behandlungsspektrum

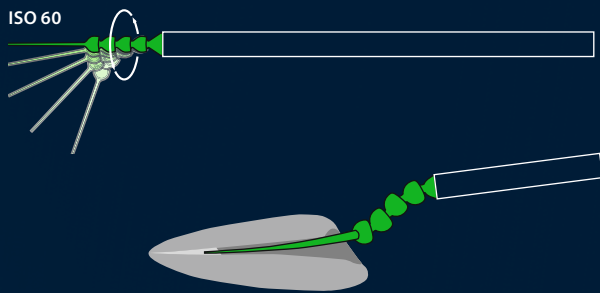

Surgitip-endo

- 0,35 mm Ansaugöffnung
- steril

Surgitip-endo ist eine Absaugkanüle für die Anwendung in endodontischen Eingriffen, speziell für das Trocknen des Wurzelkanals. Surgitip-endo entfernt schnell und gründlich Spüllösungen und Feuchtigkeit im Wurzelkanal. Die Anzahl der benötigten Papierspitzen zum Trocknen des Wurzelkanals verringert sich dadurch deutlich. Ihr spezielles Kugeldesign verleiht der Absaugkanüle eine komfortable Rundumbeweglichkeit. Sie kann problemlos auch in schwer zugängliche Wurzelkanäle eingebracht werden, ohne dass hierfür der Canal Tip verbogen werden muss. Die Saugleistung bleibt uneingeschränkt hoch und die Sicht auf das Behandlungsfeld ungestört.

Surgitip-micro

- 1,2 mm Ansaugöffnung
- steril

Surgitip-micro ist für das kleinvolumige Absaugen von Flüssigkeit und festen Partikeln während dentaler chirurgischer und mikrochirurgischer Eingriffe in der Mundhöhle vorgesehen. Die Kanüle liegt gut in der Hand, lässt sich leicht führen, sodass ein gezieltes Absaugen auch im engen dentalen Operationsumfeld gut möglich ist.



Surgitip

- 2,8 oder 4,9 mm Ansaugöffnung
- steril





Surgitips sind für das kleinvolumige Absaugen während dentaler chirurgischer Eingriffe vorgesehen. Mit Ansaugöffnungen von entweder 2,8 oder 4,9 mm eignen sie sich immer dann, wenn größere Absaugvolumina benötigt werden. Die 4,9-mm-Kanüle besteht aus der gebogenen Kanüle ohne die grüne Spitze.

Absaugkanülen

- 4,9 mm Ansaugöffnung
- unsteril


Absaugkanülen sind unsteril und für das kleinvolumige Absaugen von Flüssigkeit und festen Partikeln während nicht-chirurgischer dentaler Eingriffe vorgesehen. Sie sind lose im Beutel à 100 Stück erhältlich.

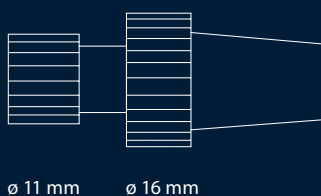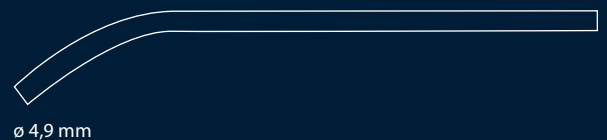

Doppeladapter

- Anschlussöffnung 11 und 16 mm
- Wiederaufbereitbar

Mit dem Doppeladapter kann jede Absaugkanüle an die gängigen Absauganlagen mit \varnothing 11 oder \varnothing 16 mm Anschlussöffnung angeschlossen werden.

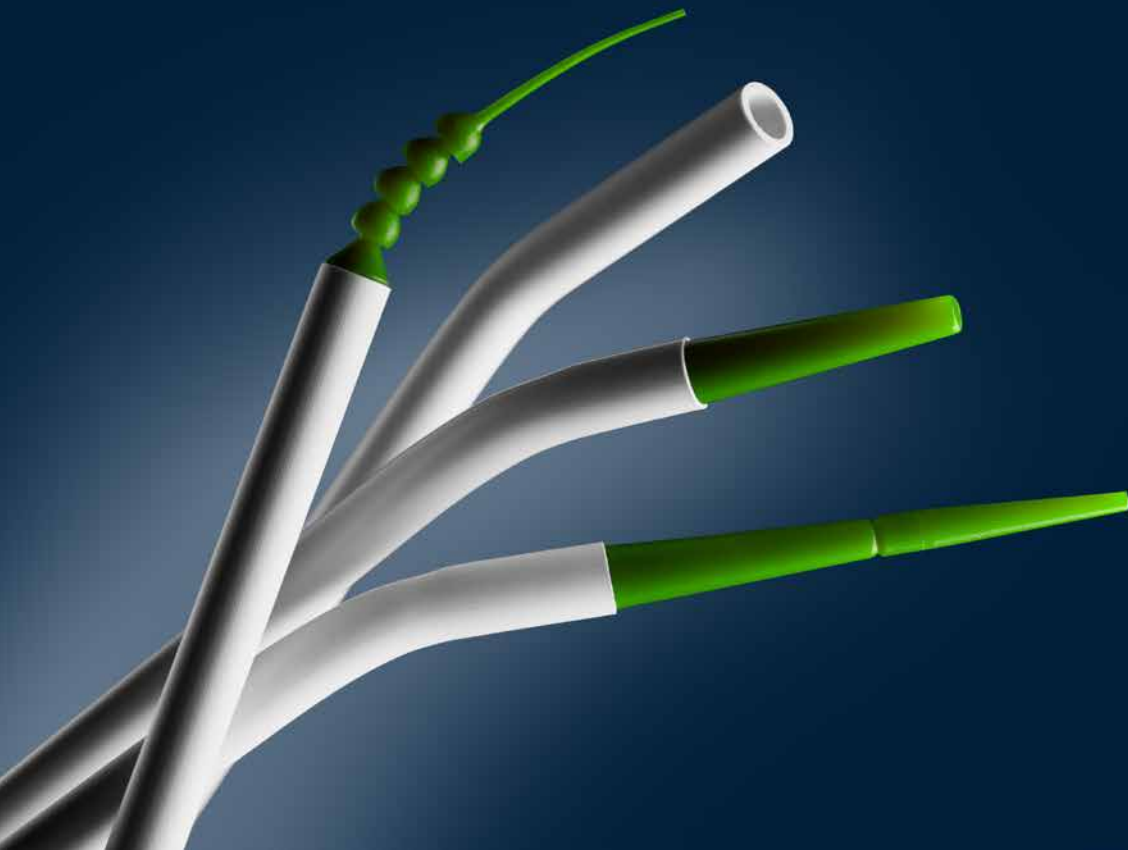

BESTELLINFORMATIONEN

	Ansaugöffnung ø mm	Anschlussöffnung ø mm	Inhalt	REF
Surgitip-endo	0,35 mm	6,5 mm	20 St.*	60018280
Surgitip-micro	1,2 mm	6,5 mm	20 St.*	462012
			100 St.*	462013
Surgitip	2,8 mm	6,5 mm	20 St.*	462025
			100 St.*	462026
	4,9 mm	6,5 mm	20 St.*	462048
			100 St.*	462049
Absaugkanülen	4,9 mm	6,5 mm	100 St.*	461048
Adapter		11 mm	1	463025
		16 mm	1	463011
Doppeladapter		11 + 16 mm	1 Set	463000

* inkl. 1 Doppeladapter

© COLTENE – www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 CH-9450 Altstätten
 T +41 71 757 5300
 info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstraße 30
 DE-89129 Langenau
 T +49 7345 805 0
 info.de@coltene.com

80000332_06.22 @xxx xx/xx

COLTENE