

Temporary Cement

TempoSIL[®] 2

Ein temporärer A-Silikon-Zement für unterschiedliche Oberflächen und verschiedene Indikationen

- Sichere Adhäsion von Restaurationen auf natürlichem Zahn, Stumpfaufbaumaterial, Metallegierung sowie Zirkonia
- Einfache Anwendung sowie leichtes Entfernen
- Kurze Abbindezeit
- ZWEI Farben für ästhetische Arbeiten

TempoSIL 2 gewährt optimale Adhäsion auf unterschiedlichen Oberflächen, sowie eine hervorragende Randdichtigkeit. Das ideal abgestimmte E-Modul der TempoSIL 2-Formel ermöglicht ein müheloses Lösen des temporären Zementes. Zur Abrundung von ästhetischen Arbeiten ist TempoSIL 2 jetzt in zwei unterschiedlichen Farben erhältlich: *white* und *dentin*.

Klinischer Fall: temporäre Restauration



TempoSIL 2 mit dem Oral Tip direkt in die Restauration applizieren



Restauration mit leichtem Druck platzieren



Restauration 30 – 60 s in Position halten



Nach dem Abbinden überschüssiges TempoSIL 2 entfernen



Temporär zementierte Restauration

Klinischer Fall: Implantat Abutments mit Brücke



Platzierte Implantat Abutments



TempoSIL 2 mit dem Oral-Tip direkt in die Restauration applizieren



Zirkonia-Restauration mit leichtem Druck platzieren




Nach dem Abbinden überschüssiges TempoSIL 2 entfernen



Temporär zementierte Zirkonia-Restauration

Hervorragende Randdichtigkeit

Bewertung der Farbstoffpenetration von TempoSIL 2 bei temporären Kronen nach 2 Wochen in 37 °C warmem Wasser mit anschließender 24-stündiger Farbpenetration.*

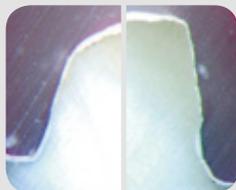


Der hervorragende Randschluss von TempoSIL 2 verringert die Farbstoffpenetration – Auswaschungen werden minimiert

*Interne Messungen

Sichere Adhäsion

Die innovative Formulierung von TempoSIL 2 ermöglicht eine mikromechanische Retention auf verschiedenen Oberflächen.*

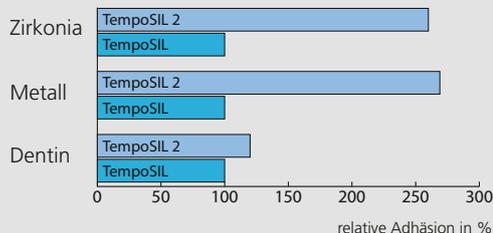

Mühelose Entfernung



Entfernbar ohne Rückstände zu hinterlassen

Bestellinformationen

- 3686 TempoSIL 2 Trial Pack**
1 × TempoSIL 2 dentin 5 ml; 1 × TempoSIL 2 white 5 ml
15 × Mixing Tips Brown long fine
- 6727 TempoSIL 2 dentin Intro Kit**
2 × TempoSIL 2 dentin 5 ml; 15 × Mixing Tips Brown long fine
- 6729 TempoSIL 2 white Intro Kit**
2 × TempoSIL 2 white 5 ml; 15 × Mixing Tips Brown long fine

- 6728 TempoSIL 2 dentin Refill**
4 × TempoSIL 2 dentin 5 ml
- 6730 TempoSIL 2 white Refill**
4 × TempoSIL 2 white 5 ml
- 6749 Mixing Tips/Oral Tips**
40 × Mixing Tips Brown long fine

www.coltenewhaledent.com
© 2011 Coltène/Whaledent AG

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
Tel. +41 (0)71 757 5300
Fax +41 (0)71 757 5301
info@coltenewhaledent.ch

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany
Tel. +49 (0)7345 805 0
Fax +49 (0)7345 805 201
info@coltenewhaledent.de

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
Tel. +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
info@coltenewhaledent.com

coltène
whaledent