

KABELLOSER ENDOMOTOR

# CanalPro X-Move

Volle Freiheit der Bewegung





# CanalPro X-Move

Der kabellose Endomotor CanalPro X-Move bietet zwei Bewegungsmodi für alle gängigen Feilensysteme: eine voll rotierende und eine reziproke Bewegung. Der Motor steht für einfaches Handling und hohe Flexibilität.

## Merkmale und Vorteile


- Kontinuierliche Rotation und reziproke Bewegung für alle gängigen Feilensysteme
- Kabelloser Endomotor für einfachen und flexiblen Betrieb
- Integrierter Apex Locator für sichere und effiziente Behandlungen
- Isoliertes Winkelstück mit superkleinem Kopf und schlankem Hals für praktische Verwendung und freies Sichtfeld
- Intuitives Steuerungs-Display für einfaches Handling
- Vorprogrammierte Einstellungen für COLTENE Feilensysteme sparen Zeit bei der Aufbereitung



Kopf und Hals eines üblichen Winkelstücks




Superkleiner Kopf und schlanker Hals des CanalPro X-Move Winkelstücks

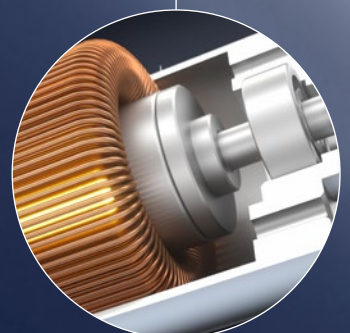


# Technische Daten

- Winkelstück: Rotation 360 Grad
- Drehmomentbereich: 0,4–5,0 N·cm
- Drehzahlbereich: 100–2500 U/min
- Einstellbarer Winkel bei reziproker Bewegung: in 10°-Intervallen
- Einstellbarer Bereich: 20° bis 400°
- Isoliertes Mini-Winkelstück mit Durchmesser von 8 mm und Höhe von 9,7 mm

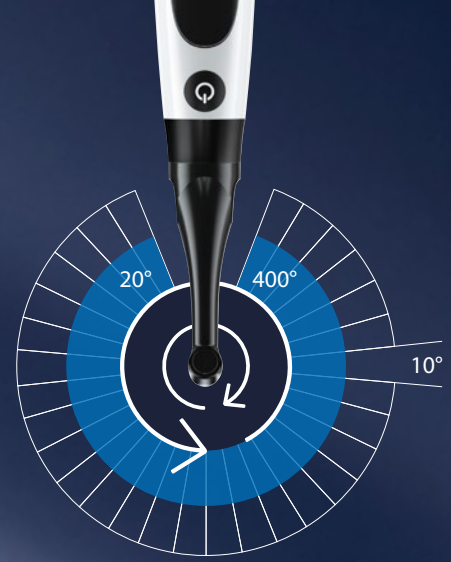

## Benutzermenü

- Vorprogrammierte Einstellungen für HyFlex EDM, HyFlex EDM OGSF Sequence, HyFlex CM, MicroMega One Flare, MicroMega One G, MicroMega One Glider, MicroMega RECI Glider, MicroMega One Curve mini, MicroMega One RECI, MicroMega 2Shape mini, Remover für HyFlex und MicroMega Systeme
- Option zur manuellen Einstellung von Parametern (Drehzahl, Drehmoment, Winkel) für andere Feilensysteme

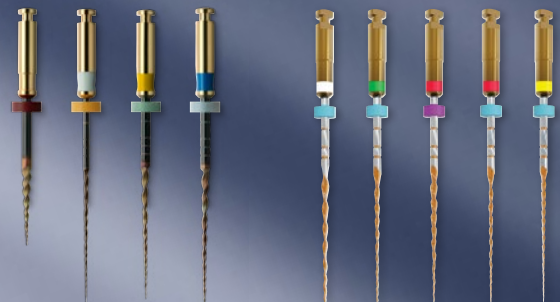

HyFlex EDM OGSF

MicroMega One RECI

## Der Motor – stärkere Leistung, geringere Geräusentwicklung

- Anpassbarer Winkel bei reziproker Bewegung für erhöhte Aufbereitungseffizienz
- Geringere Geräusentwicklung aufgrund gleichmäßiger Rotation sorgt für mehr Behandlungskomfort
- Bürstenloser Hochleistungsmotor
- Steuerungs-Display für einfaches Handling

Technische Daten  
und Einstellungen  
aller COLTENE Feilen:



# Bestellinformationen

## CanalPro X-Move Box

- 65002739** 1 × Motorhandstück
- 1 × Ladestation
- 1 × Winkelstück
- 1 × Sprühdüse
- 1 × Messkabel
- 4 × Feilenclip
- 2 × Lippenhaken
- 2 × Tastsonde
- 2 × O-Ring
- 1 × Netzteil
- 1 × Akku

## Zubehör

- 65002742** 1 × Motorhandstück
- 65002743** 1 × Ladestation
- 65002744** 1 × Winkelstück
- 65002745** 1 × Sprühdüse
- 65002746** 1 × Netzteil
- 65002747** 1 × Messkabel
- 65002748** 4 × Feilenclip
- 65002749** 2 × Lippenhaken
- 65002750** 2 × Tastsonde
- 65002751** 2 × O-Ring
- 65002752** 1 × Akku



## Ihr Endo-Guide

Praktisch. Innovativ. Wegweisend.

COLTENE bietet einfache, sichere und effiziente Lösungen für jeden Schritt der endodontischen Behandlung. Dazu begleiten wir Zahnärztinnen und Zahnärzte mit speziellen Schulungen und erfahrenen Endo-Beratern in jeder endodontischen Situation.

Unser über Jahrzehnte verfeinertes Portfolio umfasst innovative Verbrauchsmaterialien und ausgeklügelte Kleingeräte, die alle fünf Behandlungsschritte zuverlässig abdecken.



© COLTENE – [www.coltene.com](http://www.coltene.com)



### Impressum / Herausgeber

**Coltene/Whaledent AG**  
 Feldwiesenstrasse 20  
 CH-9450 Altstätten  
 +41 71 757 5300  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

### Vertriebskontakt

**Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG**  
 Raiffeisenstraße 30  
 DE-89129 Langenau  
 +49 7345 805 0  
[info.de@coltene.com](mailto:info.de@coltene.com)

### Service Center

[service@coltene.com](mailto:service@coltene.com)  
 00 800 11 0000 12 (UJFN)  
 Mo. bis Fr. 8:00 bis 17:00 MESZ

