

roeko

Sintraumal

Chirurgisches Nahtmaterial

Atraumatische Nadel-Fadenkombinationen zum Verschluss offener Wunden bei invasiven medizinischen Eingriffen

- präzisionsgeschliffene öhrlose Nadeln
- hydrophob beschichtete Seiden- oder Polyesterfäden



 COLTENE

Sintraumal Fäden

Seide schwarz


Seide ist ein geflochtener Naturfaserfaden und zeichnet sich durch seine weiche Struktur aus. Der Faden ist schwarz eingefärbt, hydrophob beschichtet und hat dadurch nicht kapillare Eigenschaften. Ein Faden mit gutem Knotensitz, angenehmen Handling und hervorragender Gleitfähigkeit.

Polyester grün

Fein geflochtener Polyesterfaden. Seine glatte Oberfläche kann Gewebstraumata reduzieren. Der Faden ist grün eingefärbt und hydrophob beschichtet. Die gute Knotenreißfestigkeit ermöglicht eine langanhaltende Wundunterstützung.

Sintraumal Nadeln

Die Nadeln sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Biegungen und Nadelspitzen erhältlich.

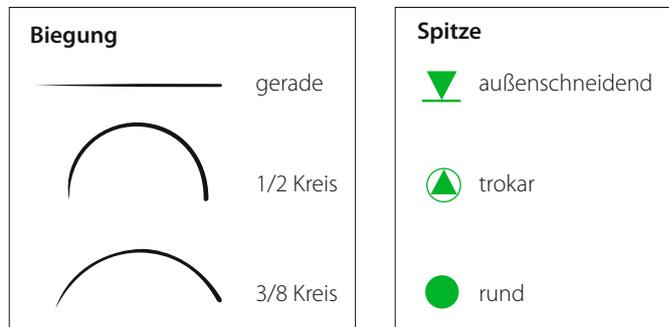

Sintraumal Nadel-Faden-Kombinationen

Nadel und Faden bilden eine Einheit. Eine Vergrößerung der Wunde durch ein Nadelöhr wird vermieden und die Gewebetraumatisierung wird minimiert.

Das Sintraumal Sortiment umfasst insgesamt 7 Nadel-Faden-Kombinationen.

Nadelbiegung Nadelspitze	Nadellänge in mm	Fadentyp	metric USP	REF
Halbkreis, Trokarschliff	17	Polyester	1.5; 4/0	490310
	18	Polyester	2.0; 3/0	490306
Halbkreis schneidend	18	Seide	1.5; 4/0	490309
	20	Seide	1.5; 4/0	490301
	25	Seide	2.0; 3/0	490302
Dreieckelkreis, schneidend	20	Seide	1.5; 4/0	490303
Gerade, Rundkörper	20	Seide	1.5; 4/0	490307

Fadenlänge jeweils 45 cm. Inhalt 12 Stck.



Impressum / Herausgeber

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Vertriebskontakt

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau
+49 7345 805 0
info.de@coltene.com

Service Center

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UJFN)
Mo. bis Fr.: 08:00 bis 17:00 Uhr MESZ