


LICHTHÄRTENDES EIN-KOMPONENTEN
UNIVERSAL ADHÄSIV

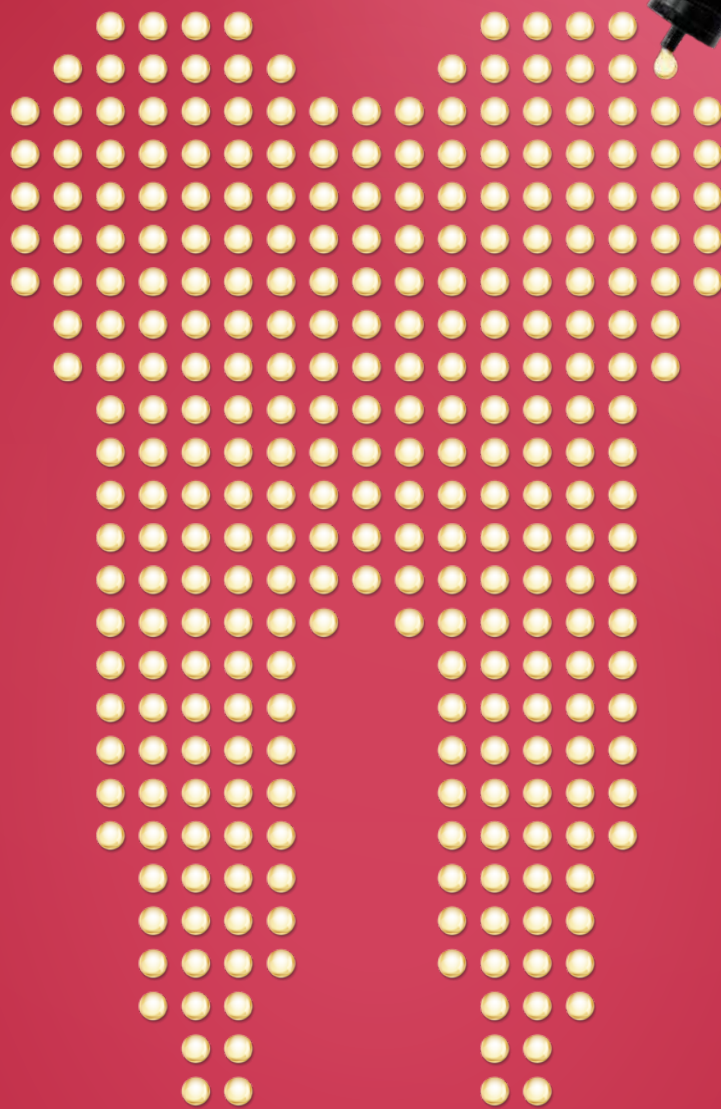

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Das Bond für alle Fälle

 COLTENE

Das lichthärtende **ONE COAT 7 UNIVERSAL** ist das einzige Bond, das Sie für die direkte und indirekte Füllungstherapie in Ihrer Praxis benötigen. Kein Primen, kein Silanisieren – einfach applizieren, verblasen und aushärten – fertig.

Vorteile auf einen Blick



Nur ein Universal-Bond für alle Indikationen und Ätztechniken



Hochökonomisch: bis zu 300 Applikationen pro Flasche




Hervorragende Haftwerte und exzellente Randdichtigkeit

Einer, der alles kann


ONE COAT 7 UNIVERSAL

Sicheres Bonden auf unterschiedlichen Oberflächen

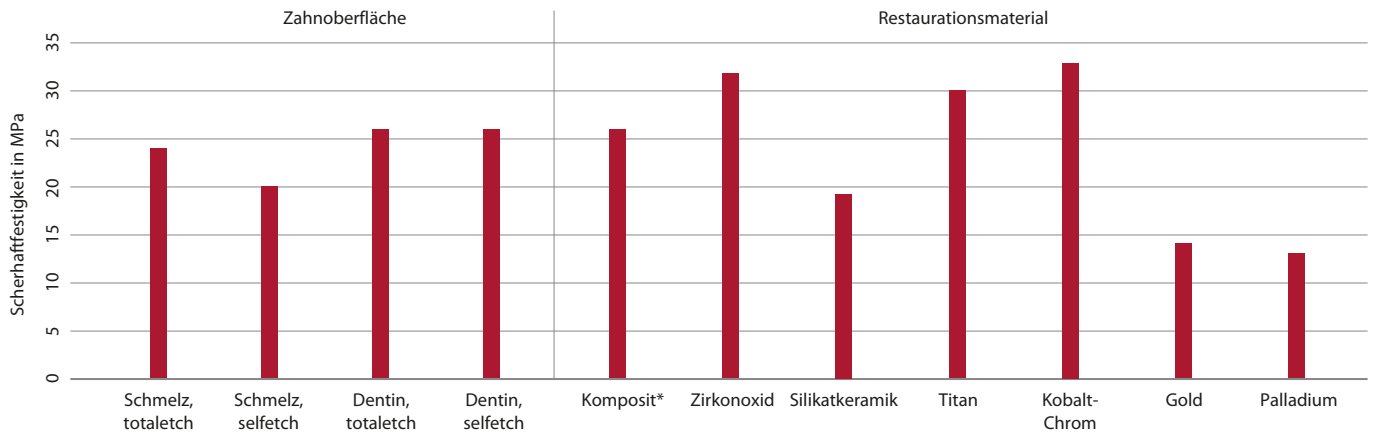

*SYNERGY D6, COLTENE
Quelle: interne Daten
Messung nach Watanabe

Zahnschmelze, Keramik, Metall, Komposit – mit ONE COAT 7 UNIVERSAL erhalten Sie sichere und verlässliche Haftung auf jeglichen Oberflächen. Je nach Situation können Sie entweder von der selbstätzenden Wirkung Gebrauch machen, oder Sie ätzen Schmelz und / oder Dentin zusätzlich mit Phosphorsäure (z. B. Etchant Gel S, COLTENE). Sie befestigen eine indirekte Restauration und benötigen dazu ein chemisch härtendes Kompositmaterial? Kein Problem – der verfügbare Aktivator gewährleistet die Kompatibilität mit ONE COAT 7 UNIVERSAL.

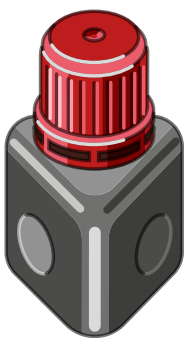

Optimierte Applikation für angenehmes Arbeiten und sparsame Anwendung

Die ergonomische Dreiecks-Flasche liegt besonders gut in der Hand. Der optimierte Tropfer überzeugt durch exaktes, sauberes Dosieren sowie Applizieren ohne Nachfließen. Dadurch sind bis zu 300 Anwendungen pro Flasche möglich.

Der perfekte Bonding-Partner
für das COLTENE-Sortiment.



Bestellinformationen

ONE COAT 7 UNIVERSAL

60019538 Intro Kit

1 × 5 ml	ONE COAT 7 UNIVERSAL
1 × 2,5 ml	Etchant Gel S
1 × 20	Applikationsnadeln
1 × 50	Bürstchen schwarz
1 ×	Tüpfelform
1 ×	Abdeckung für Tüpfelform

60019539 Refill

1 × 5 ml	Refill
----------	--------

60019540 Single Dose

50 × 0,1 ml	Single Dose
1 × 50	Bürstchen schwarz

7634 Bürstchen schwarz, 50 Stk.

7054

1 × 3 ml	One Coat 7.0 Activator
1 × 50	Bürstchen schwarz

7373

2 × 2,5 ml	Etchant Gel S Kit
1 × 20	Spritzen
	Applikationsnadeln

© COLTENE – www.coltene.com

Coltene / Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
info.de@coltene.com

Coltene / Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

 **COLTENE**