

SANFT



LEISE

roeko
VacuSoft

Die Kanüle für mehr Komfort beim Absaugen

vacusoft.coltene.com

Sanftes und leises Absaugen

Eine Absaugkanüle, die sich durch außergewöhnlichen Komfort, Flexibilität und Ruhe auszeichnet!

- Sanfter Kontakt zur Mundschleimhaut dank weicher Tips
- Geräuschreduziertes Absaugen ohne Reflux
- Flexible Anpassung an Behandlungssituation




Weiche auswechselbare Tips sorgen für einen sanften Kontakt zur Mundschleimhaut. Besonders sanft ist die extra weiche **sensitive comfort** Spitze.



SANFT



Die spezielle konische Geometrie der Tips sorgt für strömungsoptimiertes und dadurch geräuschreduziertes Absaugen. Gleichzeitig verhindert sie den schwerkraftbedingten Rückfluss von abgesaugten Medien (sog. Reflux) in den Patientenmund.

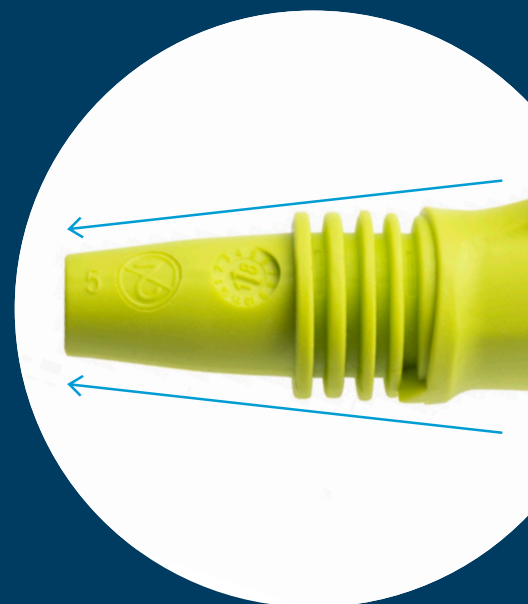

LEISE

Mit der VacuSoft auf die Bedürfnisse spezieller Patientengruppen eingehen



Demenzpatienten

Reizarme Behandlungsmethoden anwenden



Onkologische Patienten

Empfindliche Mundschleimhaut schonen



Kinderzahnheilkunde

Fremdkörpergefühl und Druck reduzieren



VacuSoft Base

Langlebiges und wiederaufbereites Kanülenrohr mit matter Oberfläche.

Das Rohr ist nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet:

Speziell abgeflachte Bereiche geben Orientierung beim Greifen und erhöhen die Griffbarkeit, auch beim Tragen von Handschuhen



Die leicht abgewinkelte Geometrie lässt die Kanüle angenehm in der Hand liegen und sie führen.



Autoklavierbar

VacuSoft Tip

Kanülenspitze zum Aufstecken auf die VacuSoft Base.

VacuSoft Tips sind aus weichem TPE Kunststoff und daher besonders sanft im Kontakt mit Mundschleimhaut, Zunge und Wangen des Patienten. Die breite und flache Kanülenspitze eignet sich hervorragend, um Wangen und Zungen des Patienten abzuhalten und die Sicht auf das Behandlungsfeld freizuhalten. Verschiedene Härtegrade der farbcodierten Tips eröffnen Spielräume beim Absaugen und ein Eingehen auf spezielle Behandlungssituationen.



Nicht autoklavierbar



sensitive comfort

Sehr weiche Spitze für sanftes Absaugen bei besonders (druck-) empfindlichen Patienten



comfort

Weiche Spitze für sanftes Absaugen in unkomplizierten Behandlungsfällen



solid comfort

Stabile Spitze für Absaugungen in denen mehr Widerstand zum Abhalten benötigt wird

Bestellinformation



VacuSoft Starterset

- 60023549** 2 × VacuSoft Base
- 5 × VacuSoft Tip sensitive comfort
- 5 × VacuSoft Tip comfort
- 5 × VacuSoft Tip solid comfort

VacuSoft Base Refill

- 60023550** 10 × VacuSoft Base



VacuSoft Tips Refill

- | 50 Stk. | 200 Stk. | |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 60023551 | 60023556 | sensitive comfort |
| 60023552 | 60023557 | comfort |
| 60023554 | 60023558 | solid comfort |



sensitive comfort



comfort



solid comfort

© COLTENE – www.coltene.com



Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

COLTENE