

ENDOMOTOR INALÁMBRICO

CanalPro X-Move

Libertad de movimiento total





CanalPro X-Move

El endomotor inalámbrico CanalPro X-Move ofrece dos modos de movimiento: un movimiento de rotación completa y un movimiento recíprocante para todos los sistemas de limas habituales. El motor destaca por su sencillo manejo y su extraordinaria flexibilidad.

Características y ventajas


- Rotación continua y movimiento recíprocante para todos los sistemas de limas habituales
- Endomotor inalámbrico para una operación sencilla y flexible
- Localizador de ápice integrado para unos tratamientos seguros y eficaces
- El contraángulo aislado con cabezal superpequeño y cuello estrecho proporciona un uso cómodo y un campo de visión libre
- Pantalla de control intuitiva para una manipulación sencilla
- Los ajustes preprogramados para los sistemas de limas COLTENE ahorran tiempo en la preparación



Cabezal y cuello de contraángulo normales




Contraángulo con cabezal superpequeño y cuello estrecho CanalPro X-Move

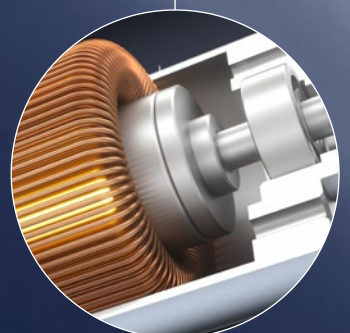


Especificaciones técnicas

- Contraángulo: giro de 360 grados
- Intervalo de torque: 0,4-5,0 Ncm
- Intervalo de velocidad: 100 – 2500 r. p. m.
- Ángulo recíprocante ajustable: intervalo de 10°
- Rango de ajuste 20°-400°
- Minicontraángulo aislado con un diámetro de 8 mm y una altura de 9,7 mm

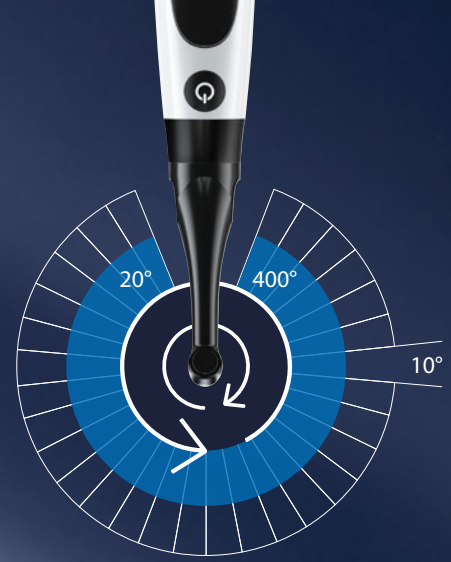

Menú de usuario

- Ajustes preprogramados para los sistemas HyFlex EDM, HyFlex EDM OGSF Sequence, HyFlex CM, MicroMega One Flare, MicroMega One G, MicroMega One Glider, MicroMega RECI Glider, MicroMega One Curve mini, MicroMega One RECI, MicroMega 2Shape mini, Remover para HyFlex y MicroMega
- Opción incluida para ajustar manualmente los parámetros (R. P. M., torque, ángulos) para otros sistemas de limas

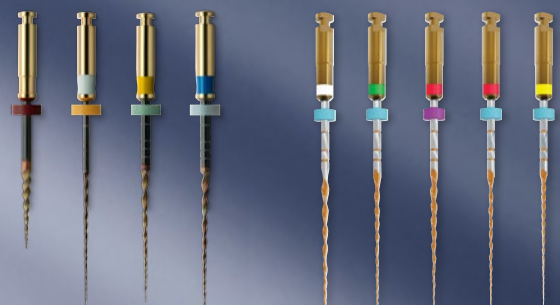

HyFlex EDM OGSF

MicroMega One RECI

El motor - más potencia, menos ruido

- Ángulos de reciprocación ajustables para una mayor eficacia en la preparación
- Los niveles bajos de ruido debido a una rotación suave proporcionan un mayor confort durante el tratamiento
- Motor sin cepillos de alto rendimiento
- Pantalla de control para una manipulación sencilla

Datos técnicos y del ajuste de todas las limas COLTENE:



Información para pedidos

CanalPro X-Move Box

- 65002739** 1 pieza de mano motor
- 1 base de carga
- 1 contraángulo
- 1 boquilla del aerosol
- 1 cable de medición
- 4 portalimas
- 2 clips labiales
- 2 sondas táctiles
- 2 juntas tóricas
- 1 adaptador de corriente
- 1 batería

Accesorios

- 65002742** 1 pieza de mano motor
- 65002743** 1 base de carga
- 65002744** 1 contraángulo
- 65002745** 1 boquilla del aerosol
- 65002746** 1 adaptador de corriente
- 65002747** 1 cable de medición
- 65002748** 4 portalimas
- 65002749** 2 clips labiales
- 65002750** 2 sondas táctiles
- 65002751** 2 juntas tóricas
- 65002752** 1 batería



Su guía Endo

Práctica. Innovadora. Guiando el camino.

COLTENE proporciona soluciones sencillas, seguras y eficientes para todos los pasos del tratamiento endodóntico, y guía cuidadosamente al dentista paso a paso en cualquier situación endodóntica con formación específica y asesores experimentados en el ámbito de la endodoncia.

Nuestra gama de productos, desarrollada a lo largo de décadas, incluye consumibles innovadores y equipos sofisticados que cubren de manera fiable los cinco pasos del tratamiento.



Control de infecciones



Limpieza y conformado



Irrigación y secado



Obturación



Restauración

© COLTENE – www.coltene.com



Pie de imprenta / editor

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contacto de ventas

COLTENE Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A
ES-28220 Majadahonda, Madrid
+34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

Centro de servicios

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UJFN)
Lunes - viernes 8:00 a 17:00 CEST

COLTENE