

COMPOSITE HÍBRIDO SUBMICRÓNICO UNIVERSAL

BRILLIANT EverGlow[®]

Luminosidad permanente – hecha brillante





RESULTADOS BRILLANTES

Con el composite universal BRILLIANT EverGlow, se pueden conseguir sin esfuerzo restauraciones muy estéticas y de larga duración.

Se desarrolló centrándose específicamente en la estética y la facilidad de uso y destaca por su cómoda manipulación y por las excelentes propiedades de integración y el alto brillo de sus tonos.

BRILLIANT EverGlow es fácil de pulir. Gracias a su mayor resistencia a la abrasión y al aumento de la retención del brillo, ofrece unos excelentes resultados a largo plazo.

- Pulido excepcional y brillo duradero
- Resultados estéticos con una sola tonalidad
- Sistema de tonos versátil con tres niveles de translucidez
- Excelente modelado y suave consistencia
- Buena humectabilidad con adherencia mínima al instrumento




PULIDO EXCEPCIONAL Y BRILLO DURADERO

LA COMPOSICIÓN DEL RELLENO SE CENTRA EN EL BRILLO

Gracias a la composición submicrónica de su relleno, BRILLIANT EverGlow proporciona de forma inmediata una superficie increíblemente suave con un brillo satinado directamente después de la colocación del material. Esto simplifica el pulido y permite conseguir unas restauraciones altamente estéticas de modo casi inmediato. BRILLIANT EverGlow es uno de los composites con mejor conservación del brillo.


EVALUACIÓN DEL PULIDO ¹

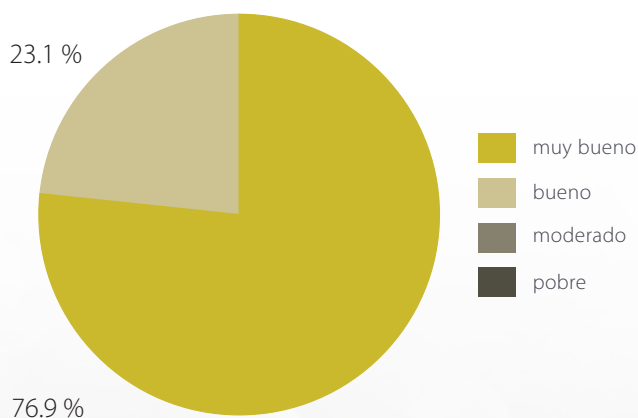

Los odontólogos han confirmado una buena capacidad de pulido. En una entrevista realizada a 39 dentistas de Europa y los Estados Unidos, el **100 %** de los odontólogos le dio una puntuación positiva. El 76,9 % le dio la máxima puntuación.

CONSERVACIÓN DEL BRILLO ¹

Después de la exposición al simulador del cepillado dental, medido en unidades de brillo (UB)

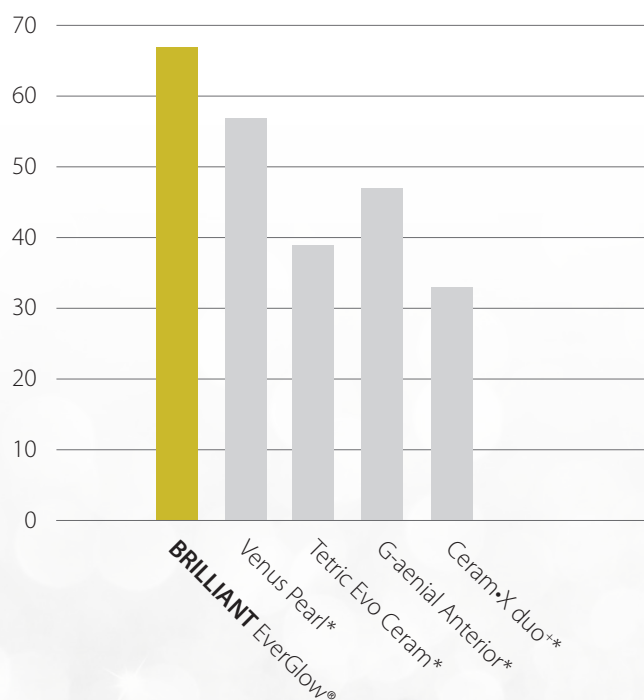

Incluso después de 20 000 movimientos en el simulador del cepillado dental, BRILLIANT EverGlow conserva un alto brillo.

¹ Fuente: datos internos | * No es una marca registrada de COLTENE

RESTAURACIONES ESTÉTICAS DE UNA SOLA TONALIDAD CON TONOS UNIVERSALES

REVOLUCIONARIO SISTEMA DUO-SHADE

BRILLIANT EverGlow ofrece tonos universales con el probado sistema Duo Shade creado por COLTENE. El sistema Duo Shades simplifica la gestión del color combinando dos tonalidades VITA* en una sola jeringa (por ejemplo, A1/B1 o A2/B2). Esto es posible gracias a las propiedades ópticas, que le permite integrarse armoniosamente con el diente adyacente.

* VITA no es una marca registrada de Coltène/Whaledent



Caso clínico usando únicamente A3/D3

Situación inicial



Tratamiento



Tratamiento



Resultado final



LEA ESTE INFORME DE USUARIO DEL DR. MED. DENT. MARKUS LENHARD Y OTROS INFORMES DE USUARIO

everglow.coltene.com/lit/es

BRILLIANT EverGlow, ha logrado hacer el concepto DUO SHADE aún más simple. Los tonos body/universales permiten lograr un efecto camaleón óptimo sin necesidad de estratificar con esmaltes translúcidos. Lograr unos grandes resultados estéticos nunca ha sido tan fácil.



7 TONOS UNIVERSALES

- Duo Shades basados en los tonos VITA*
- Para obturaciones en anteriores y posteriores
- Para restauraciones estéticas con una sola tonalidad
- Para restauraciones estéticas estratificadas

EL SISTEMA DE TONOS FLEXIBLE PARA LOS CASOS MÁS COMPLEJOS

Además de los tonos universales, hay disponibles otros cinco tonos complementarios para personalizar con la técnica de estratificación de tonos. De esta forma, se consigue un resultado armonioso incluso en los casos más complejos.

Los tonos translúcidos imitan las zonas del esmalte especialmente pronunciadas, mientras que los tres tonos opacos sientan las bases de los dientes descoloridos o los teñidos por amalgama.



Restauraciones con un solo tono



Tono universal + capa superficial translúcida



Tono opaco + tono universal




Tono opaco + tono universal + capa superficial translúcida




RECOMENDACIONES PARA LA COMBINACIÓN DE TONOS




everglow.coltene.com/tips/es

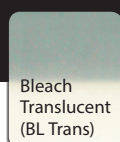


Bleach Translucent (BL Trans)

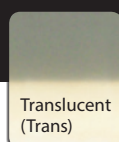


Translucent (Trans)

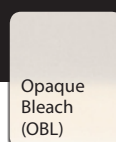

Opaque Bleach (OBL)

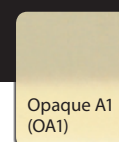

Opaque A1 (OA1)

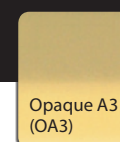

Opaque A3 (OA3)

2 TONOS TRANSLÚCIDOS

- Para la caracterización individual de zonas del esmalte particularmente translúcidas

3 TONOS OPACOS

- Para enmascarar desviaciones cromáticas y mancha por amalgama

EXCELENTE MODELADO Y CONSISTENCIA SUAVE

«BRILLIANT EverGlow es uno de mis composites preferidos. Es fácil de usar, fácil de manipular y siempre permite conseguir un excelente pulido».

Dr Monik Vasant
BChD MFGDP MSc



Su consistencia suave y su estabilidad dimensional hacen que el material de obturación avanzado BRILLIANT EverGlow sea fácil y cómodo de aplicar en las cavidades. Las cúspides cuidadosamente modeladas, los bordes y los puntos de contacto permanecen intactos y no se deforman. Alta resistencia a la luz de operación y baja pegajosidad, además de una buena humectabilidad, ponen la guinda a su comodidad de uso.


La suave consistencia y la excelente humectabilidad de BRILLIANT EverGlow hacen que el material sea perfecto para la cementación de restauraciones indirectas como BRILLIANT COMPONEER, el sistema de carillas de composite directas de COLTENE.



Sistema de carillas directas BRILLIANT COMPONEER


ADHERENCIA AL INSTRUMENTO ¹

Medido en Newtons

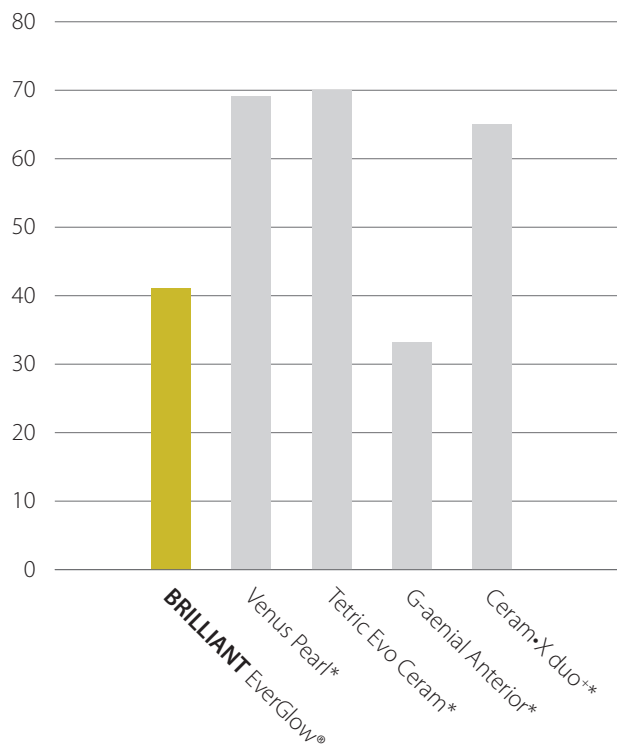

Gracias a su excelente humectabilidad, BRILLIANT EverGlow ofrece una unión excelente a las superficies dentales con adhesivo sin pegarse al instrumento. Esto también lo ha confirmado una encuesta internacional realizada entre los evaluadores. Más del 90 % de los participantes valoraron la humectabilidad como «muy buena» o «buena».

HUMECTABILIDAD SOBRE EL ADHESIVO ¹

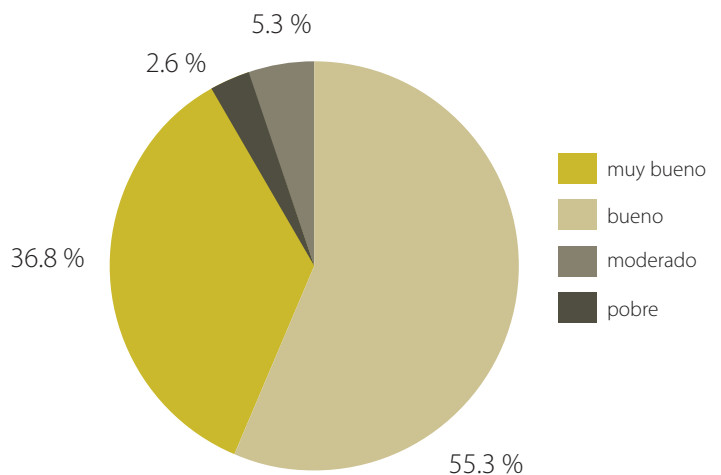

LA CLAVE PARA LOGRAR RESTAURACIONES BRILLANTES



DESCARGAR GUÍA DEL PRODUCTO



everglow.coltene.com/guide/es

TECNOLOGÍA DE RELLENO DE BRILLIANT EVERGLOW


La tecnología de relleno de BRILLIANT EverGlow se ha diseñado para proporcionar la combinación perfecta de estética duradera, comodidad en la manipulación y resistencia mecánica. El relleno de vidrio submicrónico permite un excelente pulido y una gran conservación del brillo. Los demás rellenos prepolimerizados, que tienen la misma composición que el composite sin fraguar, disminuyen la reducción del volumen y mejoran las propiedades de modelado del composite. Las superficies del relleno reciben un tratamiento especial para garantizar la resistencia del compuesto dentro de la matriz de la resina. Estas características aportan las condiciones previas idóneas para conseguir el excelente pulido y la gran conservación del brillo de BRILLIANT EverGlow. El resultado es un composite de última generación que permite lograr unas restauraciones «brillantes».

COLECCIÓN DE ESTUDIOS Y MÁS

Descubra más sobre los datos técnicos y los resultados de las mediciones comparados con los de la competencia en la guía de productos.


ABRASIÓN MÍNIMA ¹

Comparado con otros composites convencionales, los valores de abrasión de BRILLIANT EverGlow son significativamente inferiores.

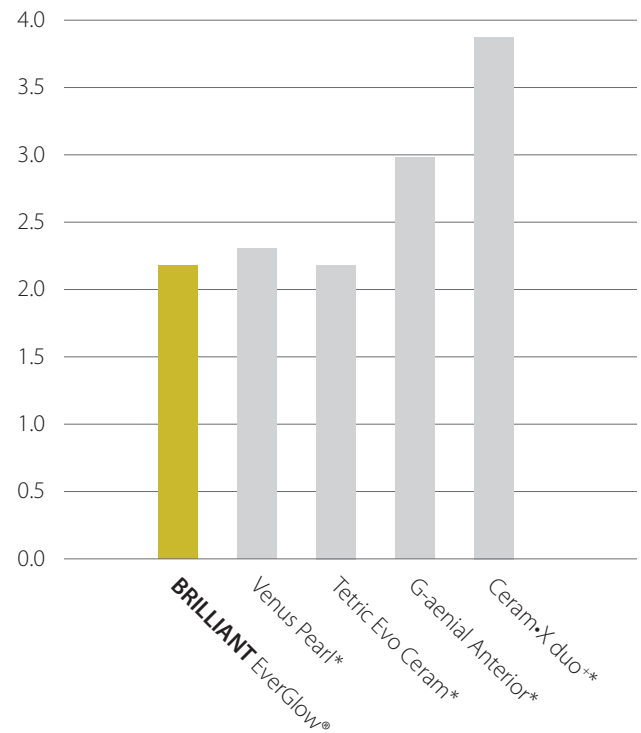


SENCILLAMENTE IMPRESIONANTE

Imagen SEM de BRILLIANT EverGlow

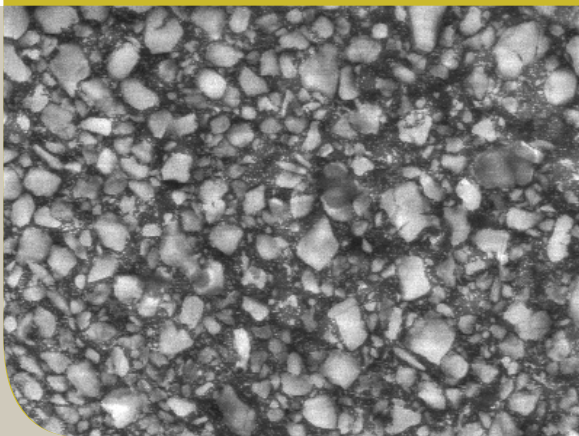

ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Ideal para las restauraciones de los dientes posteriores por su alta resistencia a las fuerzas masticatorias.

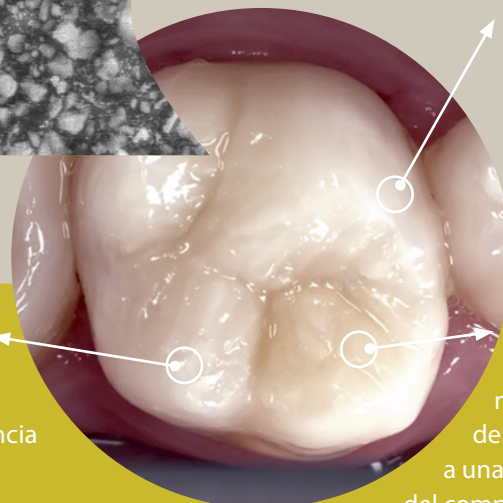

BAJA ABSORCIÓN DE AGUA

La composición optimizada del monómero hace que la absorción de agua sea baja, lo que contribuye a una excelente estabilidad del color del composite a largo plazo.

¹ Fuente: datos internos | * No es una marca registrada de COLTENE

BRILLIANT EVERGLOW FLOW

EL COMPLEMENTO IDEAL

BRILLIANT EverGlow Flow es un composite híbrido submicrónico disponible también en consistencia fluida. Aparte de las propiedades estéticas del material, se dedicó especial atención a que las propiedades de manipulación fueran óptimas.



«Fluye, pero no gotea».

Dr. med. dent.
Christoph G. Hüsken, Suiza



MUY ESTABLE Y A LA VEZ MUY FLUIDO

Con BRILLIANT EverGlow Flow, una excelente estabilidad y una buena fluidez ya no son una contradicción. BRILLIANT EverGlow Flow consigue combinar estas propiedades en un único material que lo hace extremadamente versátil.

Con su gran estabilidad y sus perfectas propiedades tixotrópicas, BRILLIANT EverGlow Flow se puede aplicar con absoluta precisión de manera fácil y controlada.

«La tixotropía es perfecta, lo cual es muy importante. Excelente aplicación sin manchas ni goteos. El material se puede mover hasta el lugar adecuado y se queda en su sitio lo suficiente como para tener tiempo de aplicar la luz de polimerización».

Dr. med. dent. Ralph Schönemann,
Alemania

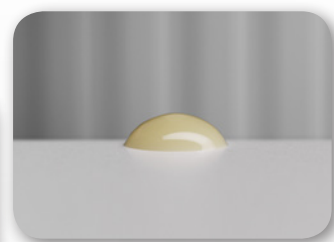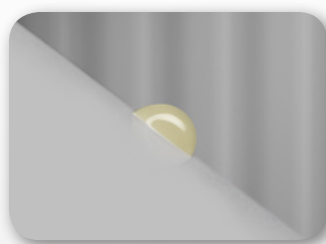


Estabilidad inicial




Mientras que el comportamiento de fluidez controlada facilita el trabajo sin distracciones, la baja viscosidad del material ofrece una buena humectación que, por ejemplo,

es importante en el caso del relleno de cavidades y de las obturaciones pequeñas.

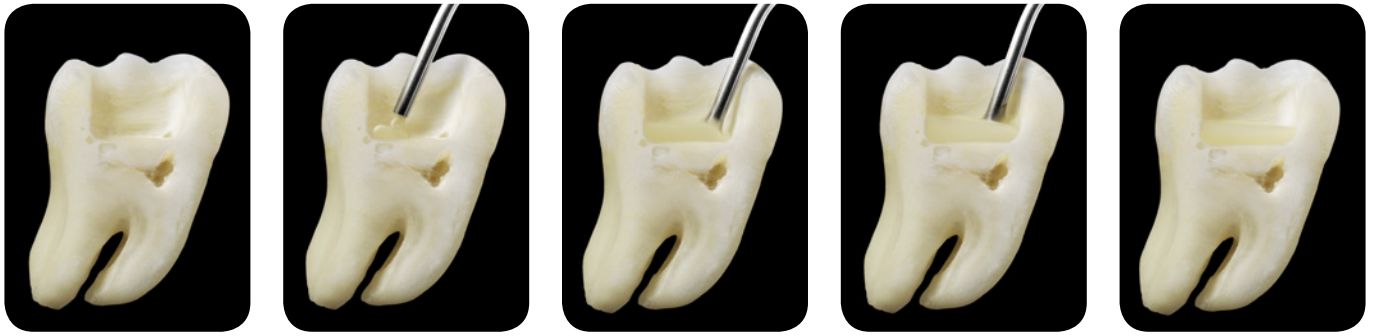

TIP DE APLICACIÓN EN DOS TAMAÑOS PARA MÚLTIPLES INDICACIONES

Todas las jeringas de aplicación BRILLIANT EverGlow Flow están disponibles con tips de dos tamaños. Además del tamaño estándar con un diámetro interior de 0,8 mm, los accesorios incluidos se han ampliado con un tamaño fino. Con un diámetro interior de apenas 0,4 mm, permite la máxima precisión de aplicación.

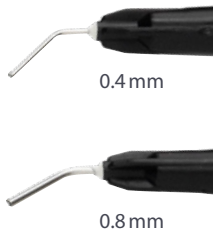

CONCEPTO DE TONO FUNCIONAL QUE INCLUYE UNA TONALIDAD OPACA



BRILLIANT EverGlow Flow tiene todas las características de calidad de la tecnología de relleno de BRILLIANT EverGlow, como la capacidad de pulido y la conservación del brillo. También cuenta con la misma gama de tonos y ofrece los prácticos Duo Shades y tres niveles de translucidez.

Aunque los tonos universales y translúcidos cubren casi todos los casos, las áreas más oscuras y las desviaciones cromáticas pueden interferir en el resultado estético final de una restauración y es posible que necesiten una capa opaca. El tono Opaque A2 se desarrolló para satisfacer esta necesidad creando la base de una restauración estética con un tono armonioso.

Como resultado, BRILLIANT EverGlow Flow ofrece resultados estéticos convincentes y es la pareja perfecta del composite universal BRILLIANT EverGlow.



COMBINACIÓN DE COLORES

7 Tonos Cuerpo/Body Universales

- Restauraciones simples de un tono

2 Tonos Translúcidos

- Reconstrucción de esmalte o borde incisal

3 Tonos Opacos

- Enmascaramiento de áreas oscuras
- Reconstrucción de dentinas de alta opacidad



BRILLIANT EverGlow COMBINACIÓN DE COLORES													
Tonos según escala VITA	Cuerpo/Body Universal							Translucido		Opaco			
	BL	A1 / B1	A2 / B2	A3 / D3	A3.5 / B3	C2 / C3	A4 / C4	Trans	BLTrans	OBL	OA1	OA3	
Bleach	xx								xx	xx			
A1		xx						xx	xx		xx		
A2			xx					xx	x		x		
A3				xx				xx	x			xx	
A3.5					xx			xx				x	
A4							xx	xx					
B1		xx						xx	xx	x	x		
B2			xx					xx	x		x		
B3					xx			xx	x			x	
D3				xx				xx				x	
C2						xx		xx				x	
C3						xx		xx				x	
C4							xx	xx					

Dientes jóvenes o blanqueados

Dientes adultos

Dientes adultos mayores

x Recomendado
 xx Muy recomendado

INFORMACIÓN PARA PEDIDO

BRILLIANT EverGlow Jeringas de repuesto (1 x 4 g)

Tonos Opacos

- 60021838 Opaque Bleach (OBL)
- 60021839 Opaque A1 (OA1)
- 60021840 Opaque A3 (OA3)

Tonos Cuerpo/Body Universales

- 60021841 Bleach (BL)
- 60021842 A1 / B1
- 60021843 A2 / B2
- 60021844 A3 / D3
- 60021845 A3.5 / B3
- 60021846 C2 / C3
- 60021847 A4 / C4

Tonos Translúcidos

- 60021848 Bleach Translucent (BL Trans)
- 60021849 Translucent (Trans)

6002 1836

3 x 4 g
Accesorios

6002 1837

4 x 4 g
2 x 4 g
1 x 4 g
1 x 2.5 ml
1 x 5ml
1 x

BRILLIANT EverGlow Welcome Kit 3 Syringes

A1/B1, A2/B2, A3/D3

BRILLIANT EverGlow System Kit 7 Syringes

Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3
Trans, Bleach Trans
Opaque A1
Etchant Gel Acid
One Coat 7 Universal
Guía de colores
Accesorios

ACCESORIOS

- 60021919 Guía de tonos BRILLIANT EverGlow



BRILLIANT EverGlow Flow

BRILLIANT EverGlow Flow Kit de introducción	Opaque A2 (OA2)	Bleach (BL)	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	A4/C4	Translucent (Trans)
60019760 4 jeringas de 2 g			1	1	1	1		

Kit de accesorios: instrucciones de uso, almohadilla de mezcla, 40 tips de aplicación

REPOSICIONES

BRILLIANT EverGlow Flow Reposiciones (1 x 2 g + 10 tips de aplicación)

60019751	Opaque A2 (OA2)
60019752	Bleach (BL)
60019753	A1/B1
60019754	A2/B2
60019755	A3/D3
60019756	A3.5/B3
60019757	A4/C4
60019758	Translucent (Trans)
8469	20 tips de aplicación estándar (Ø 0,8 mm)
60022137	20 tips de aplicación finas (Ø 0,4 mm)



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Adhesivo monocomponente fotopolimerizable para cementación adhesiva con la técnica de autograbado, grabado total o grabado selectivo.

60019538 Kit de introducción ONE COAT 7 UNIVERSAL

BRILLIANT COMPONEER


Carillas de composite prefabricadas para restauración de los dientes anteriores. Las carillas basadas en la tecnología de relleno de BRILLIANT EverGlow están disponibles en los tonos Translucent y Bleach Translucent.

60023214 Kit de introducción de jeringas BRILLIANT COMPONEER
60023215 Kit de introducción de tips BRILLIANT COMPONEER

DIATECH ShapeGuard

Pulidor de silicona para el prepulido (púrpura) y el pulido de alto brillo (azul) de restauraciones de composite. Gracias a sus láminas flexibles, DIATECH ShapeGuard se adapta a la estructura de la superficie.

60019916 Kit de pulido de composite ShapeGuard Plus

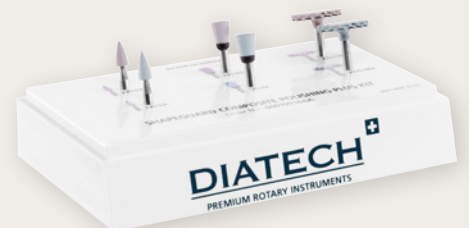

«La primera vez que usé Brilliant EverGlow´s me quedé impresionada. Su consistencia, capacidad de modelado y su tiempo de trabajo, hacen posible realizar restauraciones con una anatomía rica en detalles. Además, este composite logra mimetizarse a la perfección con el sustrato dental, siendo suficiente uno o dos colores de su gama para poder resolver de manera muy satisfactoria cualquier situación clínica que se nos presente.»

Purificación González Villafranca, España



«Como líder de opinión de muchas empresas dentales, he tenido la ocasión de trabajar y probar diversos composites. Con BRILLIANT EverGlow, fue un "amor a primera vista". Resulta muy sencillo igualar el color y ocultar las preparaciones marginales a pesar del uso de un número reducido de tonos y conseguir unos resultados predecibles y de alta calidad día a día, tanto desde el punto de vista estético como clínico.»

Dr. Monaldo Saracinelli,
grupo Style Italiano, Italia



ENLACE AL VÍDEO DEL PRODUCTO THE BRILLIANT EVERGLOW



everglow.coltene.com/mov/es



ENLACE A INFORMES DE USUARIOS



everglow.coltene.com/lit/



ENLACE A MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA



everglow.coltene.com/guide/es

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suiza
info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223 / EE. UU.
info.us@coltene.com

Vigodent SA Indústria e Comércio
Rua Pesqueira 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro CEP 21041-150 / Brasil
sac@vigodent.com.br

EC REP Coltene/Whaledent GmbH+Co. KG
Raiffeisenstrasse 30
89129 Langenau / Alemania
info.de@coltene.com



Síguenos en



coltene.com

contacto@coltenelatinoamerica.com

COLTENE