



S.P.E.C  <sup>®</sup>



## Rendimiento sin riesgos

- Múltiples programas según sus necesidades de fraguado
- Alta intensidad para una rápida polimerización
- Controles intuitivos y sencillos para una fácil utilización

 COLTENE



S.P.E.C. 3 define el rendimiento sin riesgos. El tiempo en consulta se puede reducir de forma eficaz gracias a la polimerización rápida y completa de los materiales fotopolimerizables. S.P.E.C. 3 cuenta con múltiples programas de fraguado (3K, Standard, Ortho) para una máxima funcionalidad en cualquier situación clínica.

La construcción sellada del cuerpo de aluminio de la S.P.E.C. 3 garantiza la desinfección rápida y sencilla entre paciente y paciente. La potente batería de polímeros de litio ofrece suficiente capacidad de almacenamiento para realizar más de 300 fraguados de 10 segundos entre las recargas.

### MÚLTIPLES PROGRAMAS

- Modo **Standard**: Ideal para la mayoría de las situaciones de fraguado de composite.
- Modo **3K**: Para el fraguado rápido cuando no hay mucho tiempo, como pacientes infantiles o con reflejo nauseoso.
- Modo **Ortho**: Fragua un arco completo de brackets con dos intervalos de 2 segundos por bracket.

### ALTA INTENSIDAD

- Modo **Standard**: Fraguado de 2 mm en 5 segundos
- Modo **3K**: Fraguado de 2 mm en 1 segundo

### DATOS TÉCNICOS


Dimensiones de la pieza de mano: 174,5 mm x 24,8 mm  
 Peso de la pieza de mano: 125 g  
 Intervalo de la longitud de onda: 430-490 nm  
 Intensidad de irradiación:  
 Modo Standard: 1.600 mw/cm<sup>2</sup> ±10%  
 Modo 3K y Ortho : 3.000-3.500 mw/cm<sup>2</sup>

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS.


REF.	Producto
6001 3942	S.P.E.C. Unidad 3 LED enchufe Europa
6001 3943	S.P.E.C. Unidad 3 LED enchufe Reino Unido
6001 3948	Protector ocular 8 x 11 mm, 20 uds.
6001 4360	Protector ocular 11 x 11 mm, 20 uds.
6001 3949	Mangas protectoras, paquete de 100
6001 9326	Guía de luz negro, punta turbo 8 mm
6001 9327	Guía de luz negro, 11 mm
6001 3950	Guía de luz transparente, punta turbo 8 mm
6001 3951	Guía de luz transparente, 11 mm
6001 3952	Módulo de la batería
6001 3953	S.P.E.C. 3 Base de carga
6001 3955	Alimentador eléctrico.
6001 4444	Protector ocular "Eye Shield"



### Intensidad de luz en modo Standard\*

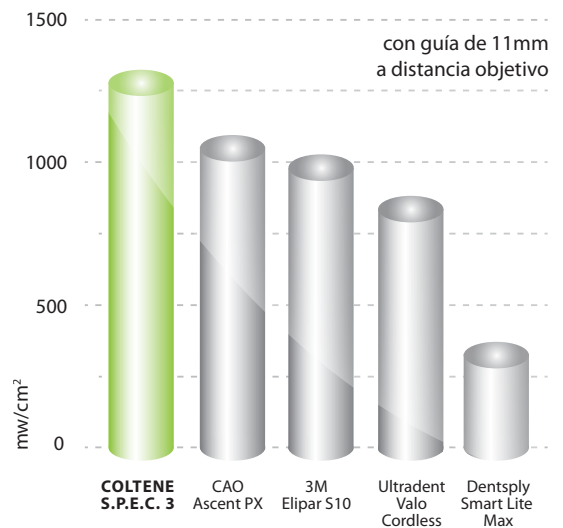

### Superiores resultados de polimerización

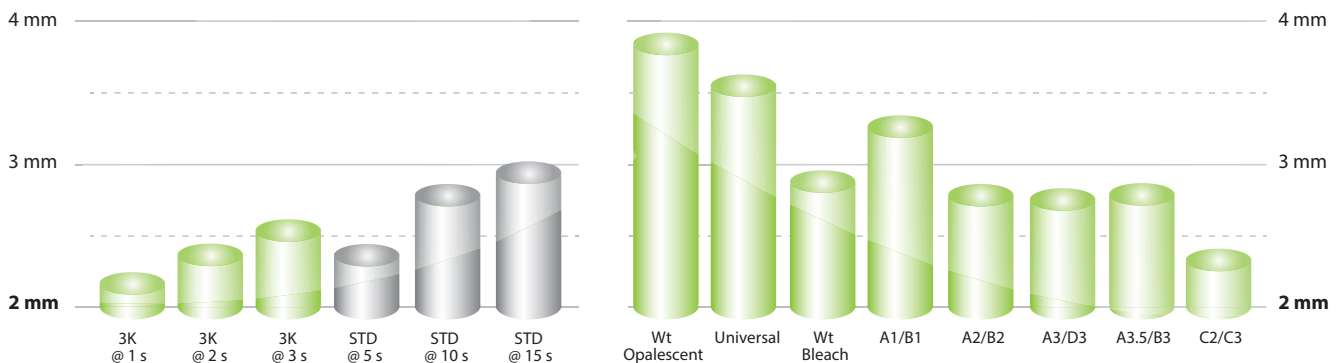

Profundidad de fraguado del tono SYNERGY® D6 A2/B2\*

Profundidad de fraguado de SYNERGY® D6: modo Standard 10 s\*