



roeko

Surgitip

Cánulas de
aspiración

Cumpla sus aspiraciones en cirugía y endodoncia

 COLTENE




roeko

Surgitip

Las cánulas de aspiración Surgitip han demostrado que ayudan a secar la zona de tratamiento bucal en cirugía y endodoncia. Están diseñadas para una aspiración de bajo volumen de sustancias líquidas y sólidas y permiten la aspiración en una zona quirúrgica dental con restricciones. Su diseño específico las hace aptas para trabajar bajo microscopio y lupa. Sus propiedades de manipulación higiénica y su facilidad de uso las convierte en una agradable herramienta en la consulta dental.

- La punta verde crea un excelente contraste con respecto a la zona de tratamiento
- Zona de visión abierta gracias a su forma estrecha y a la punta cónica
- Higiénicas y rápidas de usar, esterilizadas, embaladas individualmente y listas para su uso inmediato
- Diferentes geometrías y diámetros de punta para una amplia variedad de tratamientos

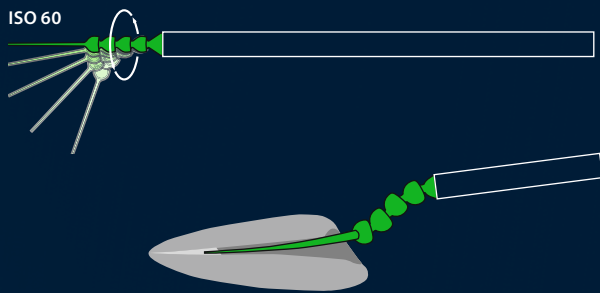

Surgitip-endo

- **abertura de la punta 0,35 mm**
- **estéril**

Surgitip-endo es una punta aspiradora destinada a la aspiración durante tratamientos endodóncicos, en concreto para secar el canal radicular. Surgitip-endo elimina las soluciones de irrigación y la humedad del canal radicular. En consecuencia, son necesarias menos puntas de papel para secar el canal radicular. El diseño específico en forma de bola de la punta de succión permite una flexibilidad multidireccional. Se puede introducir fácilmente en canales radiculares de difícil acceso sin tener que doblar la Canal Tip. La aspiración resulta extremadamente eficaz en todos los ángulos, y la visibilidad no está restringida.

Surgitip-micro

- **abertura de la punta 1,2 mm**
- **estéril**

Surgitip-micro está destinada a la aspiración de bajo volumen de sustancias líquidas y sólidas durante intervenciones quirúrgicas y microquirúrgicas dentales en la cavidad bucal. La cánula ofrece una buena sujeción y es fácil de manipular, por lo que permite la aspiración dirigida en las zonas de trabajo dental con restricciones.



Surgitip


- **abertura de la punta de 2,8 o 4,9 mm**
- **estéril**

Las Surgitips están destinadas a la aspiración de bajo volumen durante intervenciones quirúrgicas dentales. Tanto con 2,8 mm como con 4,9 mm, puede utilizarse siempre que sean necesarias mayores capacidades de aspiración. La punta de 4,9 mm consta de la cánula de aspiración doblada sin la punta verde.

Cánulas de aspiración

- **abertura de la punta 4,9 mm**
- **no estéril**


Las puntas de aspiración no estériles están destinadas a una aspiración de bajo volumen de sustancias líquidas y sólidas durante intervenciones dentales no quirúrgicas. Están disponibles en envases a granel de 100 unidades.

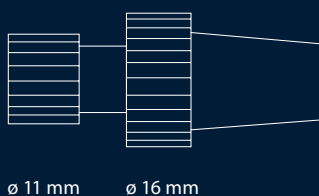

Adaptador doble

- **abertura final de 11 y 16 mm**
- **reprocesable**

Los adaptadores dobles conectan las cánulas de aspiración a sistemas de succión estándar con aberturas de ø 11 mm o 16 mm.

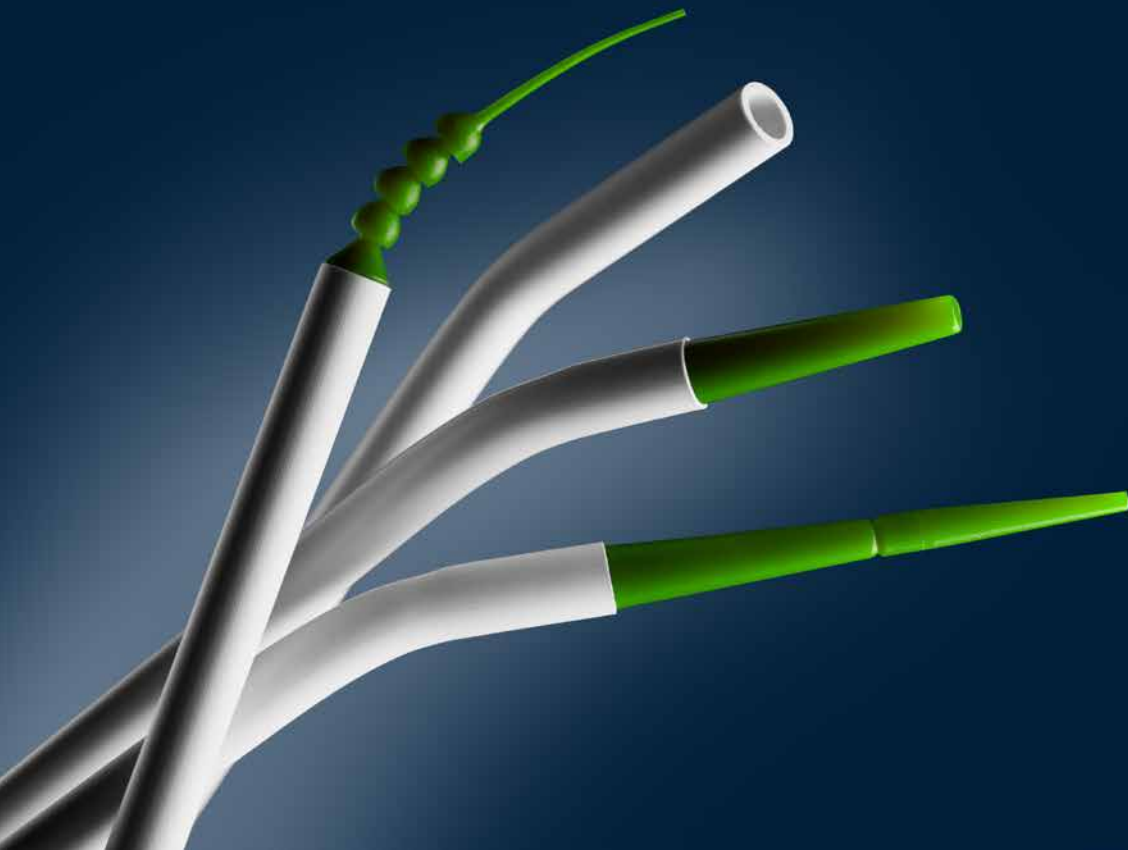


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

	Abertura de la punta ø mm	Abertura final ø mm	Contenido	REF
Surgitip-endo	0,35 mm	6,5 mm	20 uds.*	60018280
Surgitip-micro	1,2 mm	6,5 mm	20 uds.*	462012
			100 uds.*	462013
Surgitip	2,8 mm	6,5 mm	20 uds.*	462025
			100 uds.*	462026
	4,9 mm	6,5 mm	20 uds.*	462048
			100 uds.*	462049
Cánulas de aspiración	4,9 mm	6,5 mm	100 uds.*	461048
Adaptador		11 mm	1	463025
		16 mm	1	463011
Adaptador doble		11 + 16 mm	1 set	463000

*incl. 1 adaptador doble

© COLTENE – www.coltene.com



COLTENE Iberia S.L.U.
 c/Doctor Fleming, 3 – Bajo A
 ES-28220 Majadahonda, Madrid
 T +34 91 63 86 492
 info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 CH-9450 Altstätten
 T +41 71 757 5300
 info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstraße 30
 DE-89129 Langenau
 T +49 7345 805 0
 info.de@coltene.com