

MATERIAL DE IMPRESIÓN DE SILICONA A



**UN PEQUEÑO PASO PARA LOS DENTISTAS,  
UN GRAN PASO PARA LA ODONTOLOGÍA**

**PRESIDENT**

The Original

 **COLTENE**


# PRESIDENT

The Original

**UN PEQUEÑO PASO PARA LOS DENTISTAS,  
UN GRAN PASO PARA LA ODONTOLOGÍA**

**LA INTRODUCCIÓN DE PRESIDENT  
EN 1975 (LA PRIMERA SILICONA A DEL  
MERCADO) SE CONSIDERA UN HITO EN  
EL DESARROLLO DE LOS MATERIALES  
DENTALES DE IMPRESIÓN DE ALTA  
PRECISIÓN.**

Con el uso de elastómeros de polivinilsiloxano (PVS) por primera vez, los usuarios de PRESIDENT consiguieron una estabilidad dimensional y una precisión sin precedentes que hoy en día caracterizan a la silicona A. La marca PRESIDENT sigue triunfando como línea de productos tradicional de COLTENE con una calidad suprema que nunca ha dejado de mejorar.

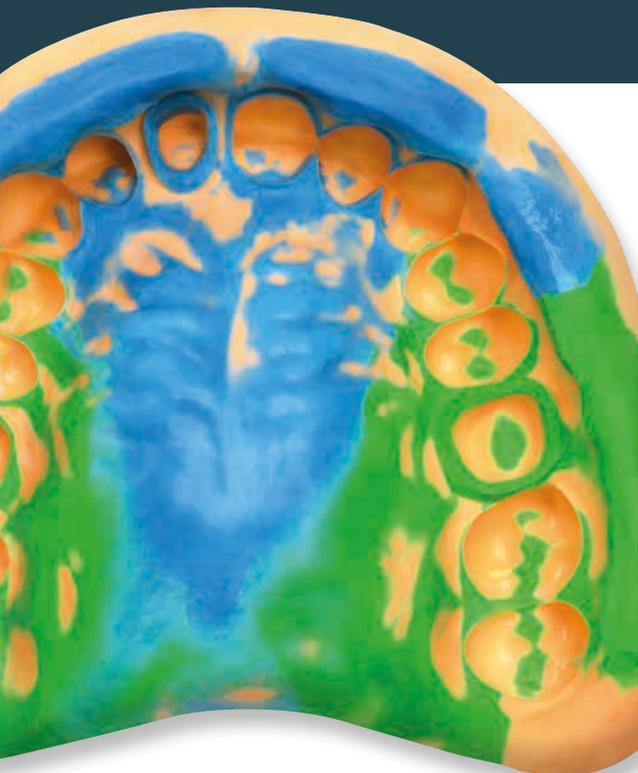

## MATERIALES DE CUBETA PRESIDENT



Los materiales de cubeta PRESIDENT destacan por su elevada resistencia al desgarre y su elasticidad. Gracias a su perfecta extracción, las impresiones son precisas y satisfactorias incluso en las condiciones más difíciles.

PRESIDENT heavy body y MonoBody tienen la tecnología de afinidad y tixotropía ideales, y generan una presión que lleva el material a todas las zonas clínicamente críticas. Las masillas PRESIDENT putty se mezclan con rapidez y están disponibles en tres durezas finales distintas para cada caso individual.



## CINCO MATERIALES DE CUBETA: USTED ELIGE

La cartera de productos de PRESIDENT contiene tres materiales de masilla para diversas indicaciones y preferencias. Puede elegir entre dureza final alta, media o baja para obtener una estabilidad óptima y una gran facilidad de recorte. Además, PRESIDENT cuenta con una elevada resistencia al desgarre para una gran precisión y estabilidad dimensional.

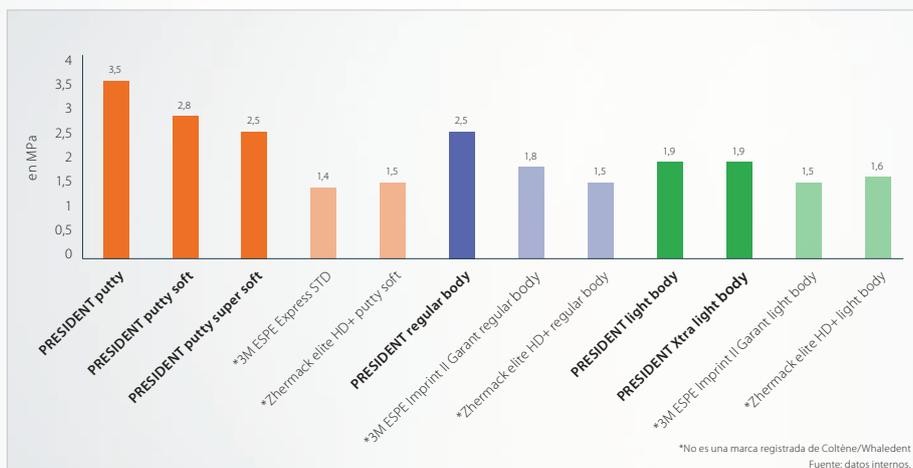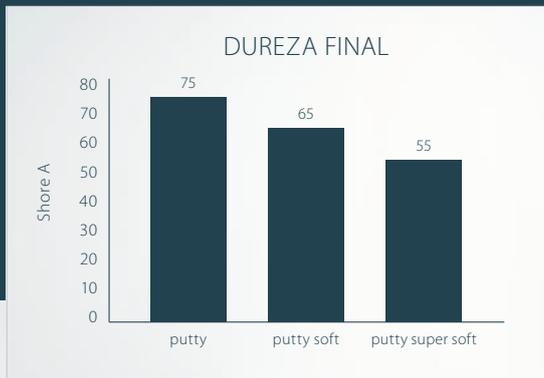

\*No es una marca registrada de Coltène/Whaledent  
Fuente: datos internos.

## RESISTENCIA AL DESGARRE

# PRESIDENT

The Original

## MATERIALES DE CORRECCIÓN PRESIDENT

Los materiales de corrección PRESIDENT son estables, aunque fluyen con gran libertad bajo presión para captar con precisión todos los detalles marginales. Sus propiedades hidrofílicas se ven favorecidas por los surfactantes del material. En contacto con la humedad, estos aditivos se mueven hasta la superficie y reducen la tensión de la zona, mejorando así la humectabilidad.



Xtra light body



light body



regular body

## TRES MATERIALES DE CORRECCIÓN: USTED ELIGE

Todos los materiales de corrección PRESIDENT muestran una perfecta fluidez en un entorno húmedo. Seleccione la viscosidad que prefiera, de baja a alta, según sus necesidades.



Xtra light body




light body




regular body

Los materiales de corrección PRESIDENT muestran un auto nivelado y tixotropía, lo que permite obtener unos contornos precisos.

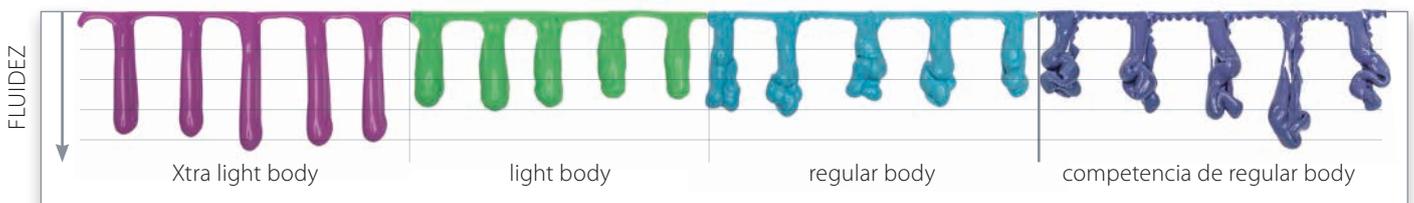

# PRESIDENT

The Original

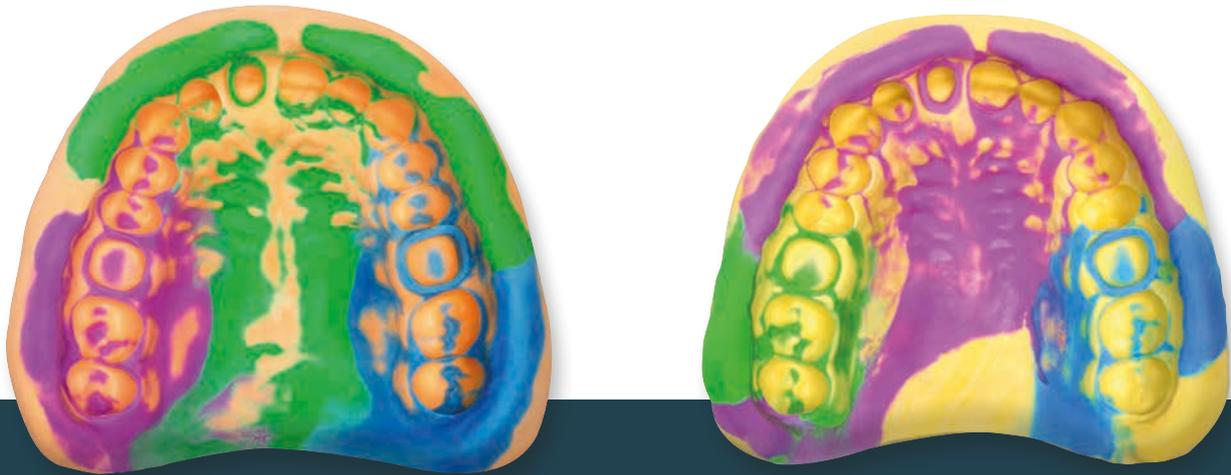

## NUEVOS COLORES

Los nuevos y vivos colores de la línea PRESIDENT muestran mejor el contraste entre el material de corrección y el material de cubeta y, por tanto, la lectura de los detalles es más precisa.

		Fluidez	Viscosidad	Dureza final	Tensión de rotura	Recuperación elástica
CORRECCIÓN	Xtra light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	regular body			55 Shore A	2,5 MPa	99,8 %
	MonoBody			58 Shore A	3,0 MPa	99,7 %
	heavy body			63 Shore A	3,5 MPa	99,7 %
CUBETA	putty super soft			55 Shore A	2,5 MPa	99,5 %
	putty soft			65 Shore A	2,8 MPa	99,4 %
	putty			75 Shore A	3,5 MPa	99,2 %

LA GAMA DE PRODUCTOS PRESIDENT DE UN VISTAZO

# PRESIDENT

The Original



## INFORMACIÓN PARA PEDIDO

### 50 ml

- 60019937** **PRESIDENT** The Original **Xtra light body**  
2 cartuchos de 50 ml  
12 puntas de mezcla universales
- 60019938** **PRESIDENT** The Original **light body**  
2 cartuchos de 50 ml  
12 puntas de mezcla universales
- 60019939** **PRESIDENT** The Original **regular body**  
2 cartuchos de 50 ml  
12 puntas de mezcla universales

### 75 ml

- 60019941** **PRESIDENT** The Original **heavy body**  
2 cartuchos de 75 ml  
8 puntas de mezcla turquesa

### putty

- 60019942** **PRESIDENT** The Original **putty**  
2 x 300 ml, 2 cucharas
- 60019943** **PRESIDENT** The Original **putty soft**  
2 x 300 ml, 2 cucharas
- 60019944** **PRESIDENT** The Original **putty super soft**  
2 x 300 ml, 2 cucharas
- 60022166** **PRESIDENT** The Original **fast putty soft**  
2 x 300 ml, 2 cucharas

### System 360

- 60019946** **PRESIDENT** The Original **MonoBody Refill**  
2 cartuchos de 380 ml
- 60019947** **PRESIDENT** The Original **heavy body**  
1 cartucho de 380 ml  
10 puntas de mezcla dinámicas  
1 anillo de fijación
- 60019948** **Reposición de PRESIDENT** The Original **heavy body**  
2 cartuchos de 380 ml

### Tubos

- 60019949** **PRESIDENT** The Original **light body**  
1 base de 53 ml  
1 catalizador de 53 ml
- 60019950** **PRESIDENT** The Original **regular body**  
1 base de 53 ml  
1 catalizador de 53 ml

Coltène/Whaledent AG - [www.coltene.com](http://www.coltene.com)

**Coltene Iberia S.L.U.**  
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A  
28220 Majadahonda  
Madrid / España  
T +34 91 63 86 492  
F +34 91 63 86 279  
[info.ib@coltene.com](mailto:info.ib@coltene.com)

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Suiza  
T +41 71 757 5300  
F +41 71 757 5301  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls  
Ohio 44223/Estados Unidos  
T +1 330 916 8800  
F +1 330 916 7077  
[info.us@coltene.com](mailto:info.us@coltene.com)

 **COLTENE**