


DETERMINATION DE LA LONGUEUR DE TRAVAIL
& TRAITEMENT CANALAIRE



MicroMega

Dual Move

Moteur endo sans-fil

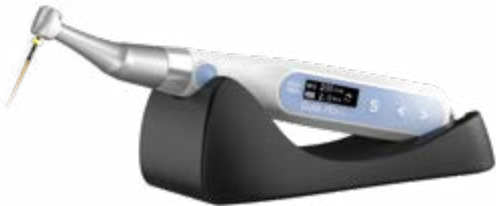

Dual Pex

Localisateur d'apex électronique



 **COLTENE**

MOTEUR ENDODONTIQUE SANS-FIL AVEC CONTRÔLE DU MOUVEMENT, DE LA VITESSE ET DU COUPLE

EXCELLENTE EXPÉRIENCE LORS DE LA MISE EN FORME

- > Bon équilibre en main
- > Excellente visibilité
- > Maniement simple
- > S'adapte idéalement aux praticiens droitiers et gauchers



TRAITEMENT ENDO SÉCURISÉ

- > Prévention de la casse instrumentale
- > Contrôle de la vitesse et du couple

ADAPTÉ AUX BESOINS INDIVIDUELS

- > Flexibilité de réglage, nombreux paramètres
- > Utilisable avec toutes les limes NiTi
- > Modulable, en usage autonome ou combiné avec Dual Pex
- > Mouvement double, rotation continue ou réciprocité*

* Non disponible dans certains pays.

Dual·Move

EXCELLENTE EXPÉRIENCE LORS DE LA MISE EN FORME

> MISE EN FORME EN TOUTE LIBERTÉ !

- Design compact et fin
- Pièce à main poids plume et parfaitement équilibrée



ADAPTÉ AUX BESOINS INDIVIDUELS

> TOUS NIVEAUX DE PRATIQUE, TOUTES LIMES NiTi !

- 6 mémoires programmables avec adaptation de la vitesse, du sens de rotation et du couple maximum
- Rotation continue
- Réciprocité*






> ORIENTEZ LE CONTRE-ANGLE JUSQU'À LA POSITION PARFAITE POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE !

- Contre-angle rotatif à 340°
- Tête miniature et col de tête fin




TRAITEMENT ENDO SÉCURISÉ

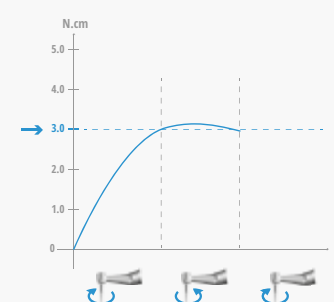

> PRÉVENEZ TOUT RISQUE DE FRACTURE INSTRUMENTALE !

- Inversion automatique du sens de rotation sur valeur de couple prédéfinie
- Alarmes sonores avec volume ajustable

> CONTRÔLEZ VOTRE PRÉPARATION CANALAIRE AVEC VOS SENS VISUELS ET AUDITIFS !

- Écran ambidextre (rotation de 180°)
- Verrouillage automatique de la lime dans la tête du contre-angle
- Position idéale du bouton marche / arrêt pour une utilisation d'une seule main
- Familiarisation très rapide à l'utilisation de l'interface



> GARDEZ LA MAÎTRISE DE VOTRE TRAITEMENT !

- Contrôle fiable de la vitesse et du couple
- Fonction de calibration à la demande
- Affichage du couple instantané à l'écran et indications sonores



* Non disponible dans certains pays.

MODE AUTONOME OU COMBINÉ À DUAL MOVE


ALLEZ A L'ESSENTIEL

- > Écran convivial
- > Localisation précise de la lime dans les canaux radiculaires en milieu sec ou humide grâce à la technologie de détermination multi-fréquences
- > Stabilité de la tension délivrée quel que soit le niveau de batterie
- > Indications visuelles et sonores en temps réel
- > Mise hors tension automatique préservant l'autonomie de la batterie
- > Auto-testeur plug & play




VOTRE ASSISTANT PERSONNEL


- > Conception robuste et design compact
- > Écran LCD couleur 3,5" très lisible
- > Mode autonome ou combiné à Dual Move
- > Batterie rechargeable
- > Limite apicale (Point de Référence) ajustable entre les positions 06 (constriction apicale) et 00 (foramen apical)

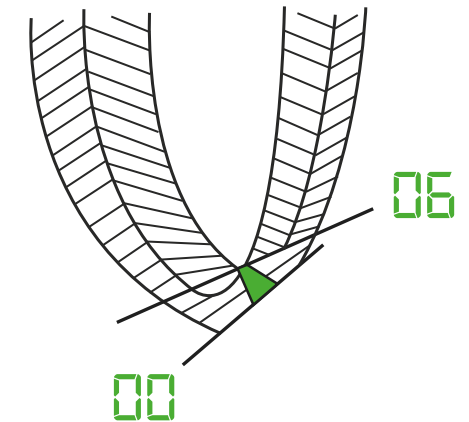

DUAL MOVE & DUAL PEX : LE DUO PARFAIT

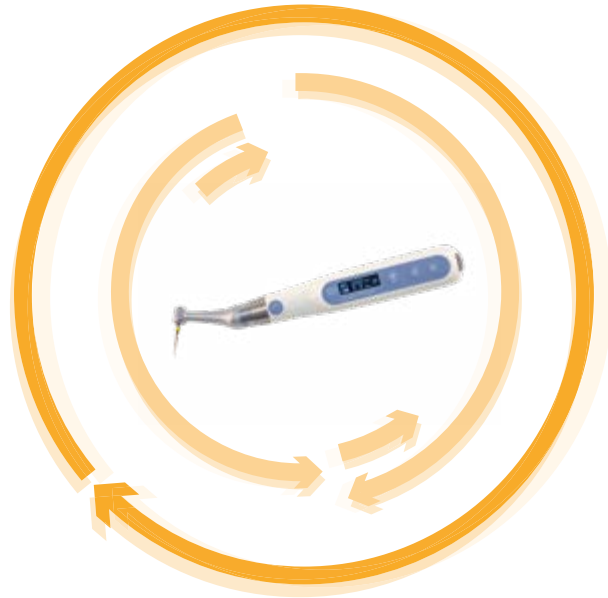

Dual

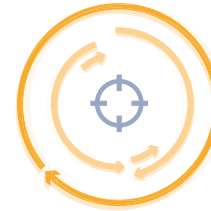

Move

Pex



TOUTES LES INDICATIONS VISIBLES EN UN COUP D'ŒIL ET AU PLUS PROCHE DE VOUS !

> Duplication d'écran



> Report de la position de la lime sur l'afficheur de Dual Move

CHOISISSEZ VOTRE MODE OPÉRATOIRE GRÂCE AUX FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES !

> Démarrage et arrêt automatiques



> Démarrage automatique du moteur dès l'entrée de la lime dans le canal

> Arrêt automatique dès la sortie du canal

> Auto-reverse apical




> Auto-reverse lorsque la lime atteint la limite apicale

> Redémarrage automatique dès que la lime repasse en amont de la limite apicale

> Décélération apicale



> Réduction de la vitesse lorsque la lime atteint la limite apicale prédéfinie

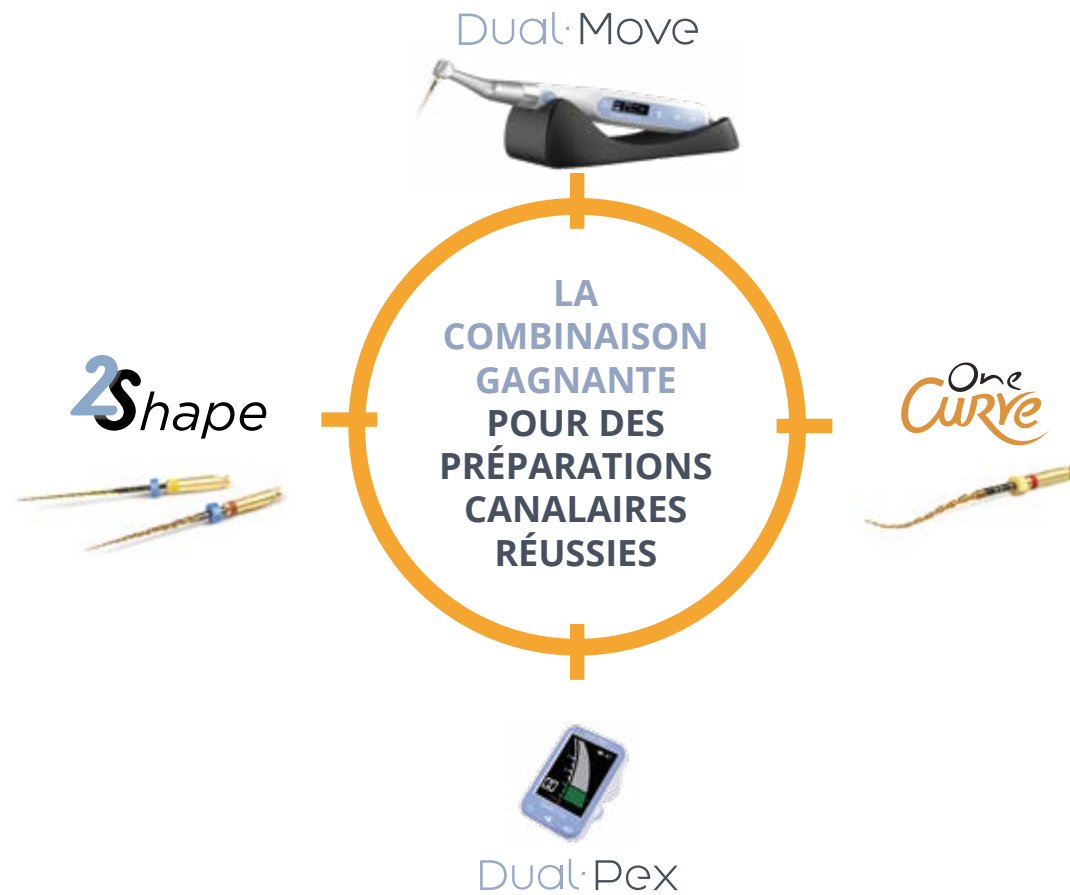

« Dual Move, Dual Pex, 2Shape TS1 et 2Shape TS2 : vos 4 points cardinaux pour une navigation sécurisée dans le système canalaire »

Dr. Filippo CARDINALI - Italie



« Dual Move est bien équilibré en main et facile à utiliser. Dual Pex est très précis. Combinez ce moteur sans-fil avec une lime unique pré-courbable et efficace comme One Curve et votre endo devient beaucoup plus facile »

Dr. Tara Mc MAHON - Belgique

Dual Move and Dual Pex Publicité

CE 0197 Année de marquage CE : 2017

Classe médicale IIA selon la directive 93/42/EEC.

Organisme certificateur : TÜV Rheinland.

Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale.

Voir l'étiquetage du produit, et le cas échéant, la notice.

One Curve Publicité

CE 0459 Année de marquage CE : 2017

Classe médicale IIA selon la directive 93/42/EEC.

Organisme certificateur : LNE/G-MED.

Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale.

Voir l'étiquetage du produit, et le cas échéant, la notice.

2Shape Publicité

CE 0459 Année de marquage CE : 2017


Classe médicale IIA selon la directive 93/42/EEC.


Organisme certificateur : LNE/G-MED.

Dispositif médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale.

Voir l'étiquetage du produit, et le cas échéant, la notice.

 Fabriqué par
Changzhou Sifary Medical
Technology Co., Ltd.
No. 99, Qingyang Road,
Xuejia County, Xinbei District
Changzhou City
213000 Jiangsu
Chine

 Micro-Mega SA
12, rue du Tunnel
25000 BESANCON / France

 Micro-Mega SA
12, rue du Tunnel
25000 BESANCON / France

EC REP Landlink GmbH
Dorfstrasse 2/4, 79312,
Emmendingen - Allemagne

Distribué par **Micro-Mega SA**
12, rue du Tunnel
25000 BESANCON
France

© COLTENE – MicroMega.Coltene.com



Micro-Mega SA
12, rue du Tunnel
25000 BESANCON / France
T +33 3 81 54 42 42
F +33 3 81 54 42 30
commercial@micro-mega.com

