


HyFlex™ EDM

Réduction du nombre d'instruments

L'usage de limes HyFlex™ EDM permet de réduire le nombre de limes. L'usage de la lime OneFile HyFlex™ peut suffire dans de petits canaux étroits. En fonction de la situation clinique, le nombre de limes peut être réduit ou étendu. Toutes les limes HyFlex EDM en NiTi peuvent être utilisées à 400 tr/min et avec un couple pouvant aller jusqu'à 2,5 Ncm (25 mNm), à l'exception des limes pour cavité d'accès qui peuvent être utilisées à 300 tr/min et avec un couple pouvant aller jusqu'à 1,8 Ncm (18 mNm).

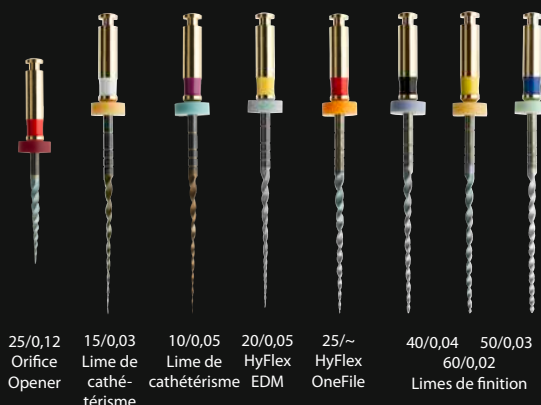

25/0,12 Orifice Opener
 15/0,03 Lime de cathétérisme
 10/0,05 Lime de cathétérisme
 20/0,05 HyFlex EDM
 25/~ HyFlex OneFile
 40/0,04 50/0,03 60/0,02 Limes de finition

	Cavité d'accès facultative	Cathétérisme	Mise en forme
	<p>25/0,12 Orifice Opener</p>	<p>Lime manuelle 10/0,05 Lime de cathétérisme</p>	<p>25/~ HyFlex OneFile</p>
	<p>25/0,12 Orifice Opener</p>	<p>Lime manuelle 10/0,05 Lime de cathétérisme</p>	<p>20/0,05 HyFlex EDM 25/~ HyFlex OneFile</p>
	<p>25/0,12 Orifice Opener</p>	<p>Lime manuelle 15/0,03 10/0,05 Lime de cathétérisme</p>	<p>20/0,05 HyFlex EDM</p>

Références de commande

Kits HyFlex EDM		21 mm	25 mm	
Kit de mise en forme HyFlex EDM simple 25/12; 10/05; 25/~	60022267	60019363		
Kit de mise en forme HyFlex EDM medium 10/0,05 ; 20/0,05 ; 25/~	60022277	60022278		
Kit de mise en forme HyFlex EDM courbe max. 15/0,03 ; 10/0,05 ; 20/0,05	60023494	60023495		
Kit de finition HyFlex EDM 40/0,04 ; 50/0,03 ; 60/0,02	60022268	60019364		
Réassorts HyFlex EDM, 3 unités		15 mm	21 mm	25 mm
Lime Orifice Opener Hyflex EDM 25/0,12	60019596			
Lime de cathétérisme HyFlex EDM 15/0,03		60023493	60023492	
Lime de cathétérisme HyFlex EDM 10/0,05		60022269	60019594	
Lime de préparation HyFlex EDM 20/0,05		60022275	60022276	
OneFile HyFlex EDM 25/~		60022270	60019595	
Lime de finition HyFlex EDM 40/0,04		60022271	60019597	
Lime de finition HyFlex EDM 50/0,03		60022272	60019598	
Lime de finition HyFlex EDM 60/0,02		60022274	60019599	
Accessoires HyFlex				
3 x bloc d'exercice endodontique, acrylique		60011085		

Taille / Conicité	HyFlex EDM Pointes de papier 100 unités	HyFlex EDM Pointes de GuttaPercha 60 unités
20/0,05	60022742	60022706
OneFile 25/~	60022743	60022707
40/0,04	60022676	60022708
50/0,03	60022741	60022709
60/0,02	60022740	60022710
Assortiment 20/0,05 - 60/0,02	60022744	60022705



Nouvelle vidéo d'utilisation pour une préparation sûre et efficace du canal radiculaire à l'aide de limes de NiTi HyFlex EDM. ▼



<https://bit.ly/3h6BOYo>

Coltene/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Allemagne
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

 **COLTENE**