




roeko

Surgitip

Canules d'aspiration

À la hauteur de vos aspirations en
chirurgie et en endodontie

 COLTENE

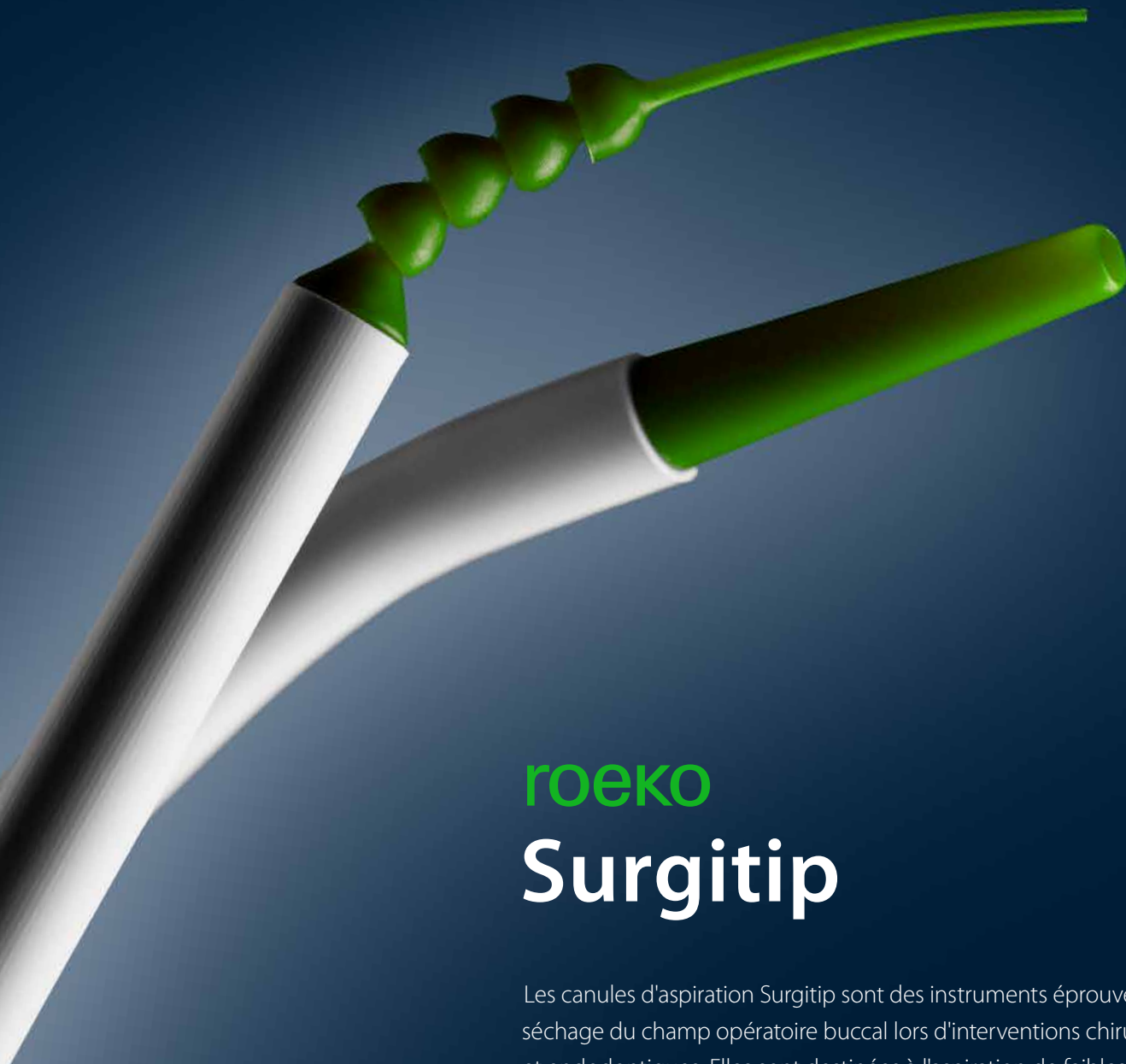


roeko

Surgitip

Les canules d'aspiration Surgitip sont des instruments éprouvés pour le séchage du champ opératoire buccal lors d'interventions chirurgicales et endodontiques. Elles sont destinées à l'aspiration de faibles volumes de substances liquides et solides et permettent l'aspiration dans un environnement opératoire dentaire d'accès difficile. Grâce à leur conception spécifique, elles se prêtent au travail sous microscope et loupe. Les propriétés de manipulation hygiénique et la facilité d'utilisation en font un dispositif appréciable dans le cabinet dentaire.

- La canule verte assure un excellent contraste sur le site traité
- Le champ de vision est dégagé grâce à la forme fine et à l'extrémité conique
- Elle est hygiénique et fait gagner du temps, stérile, sous emballage individuel et prête à l'emploi
- Différents diamètres et formes de canules pour un large éventail de traitements

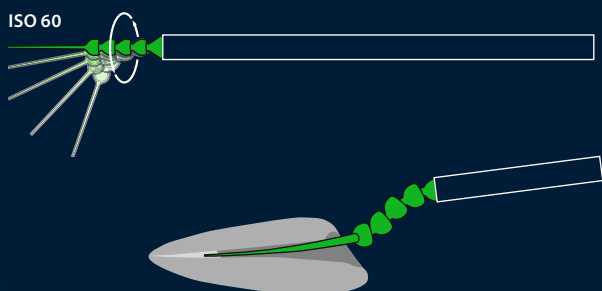

Surgitip-endo

- orifice d'aspiration de 0,35 mm
- stérile

Surgitip-endo est une canule d'aspiration conçue pour les traitements endodontiques et plus particulièrement le séchage du canal radiculaire. Surgitip-endo élimine les solutions de rinçage et l'humidité du canal radiculaire. Le séchage du canal radiculaire nécessite ainsi moins de pointes de papier. La conception spécifique à billes de la canule d'aspiration permet une flexibilité multidirectionnelle. Elle peut être insérée aisément dans les canaux radiculaires d'accès difficile sans avoir à courber l'embout canalaire. L'aspiration est très efficace dans tous les angles et la visibilité n'est pas gênée.

Surgitip-micro

- orifice d'aspiration de 1,2 mm
- stérile


Les canules Surgitip-micro sont destinées à l'aspiration de faibles volumes de substances liquides et solides pendant les interventions de chirurgie et de micro-chirurgie dans la cavité bucco-dentaire. La canule offre une bonne prise en main et se manipule facilement, ce qui permet une aspiration ciblée dans les environnements opératoires dentaires d'accès difficile.



Surgitip

- orifice d'aspiration de 2,8 ou 4,9 mm
- stérile


Les canules Surgitip sont destinées à l'aspiration de faibles volumes pendant les interventions de chirurgie dentaire. Existant avec un diamètre de 2,8 ou 4,9 mm, elles peuvent être utilisées chaque fois qu'une capacité d'aspiration supérieure est nécessaire. La version de 4,9 mm correspond à la canule d'aspiration courbée sans l'embout vert.

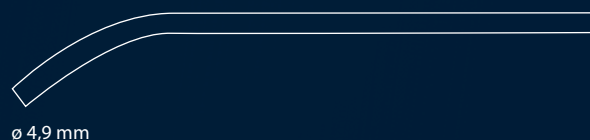

Canules d'aspiration

- orifice d'aspiration de 4,9 mm
- non stériles


Les canules d'aspiration sont non stériles et destinées à l'aspiration de faibles volumes de substances liquides et solides pendant les procédures dentaires non chirurgicales. Elles sont vendues en lots de 100 unités.

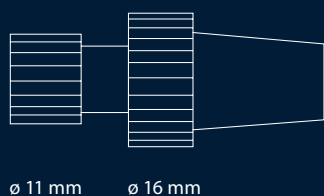

Double adaptateur

- orifice de branchement de 11 et 16 mm
- peut être retiré

Les doubles adaptateurs permettent de raccorder les canules d'aspiration aux systèmes d'aspiration classiques avec un orifice de ø 11 mm ou de ø 16 mm.

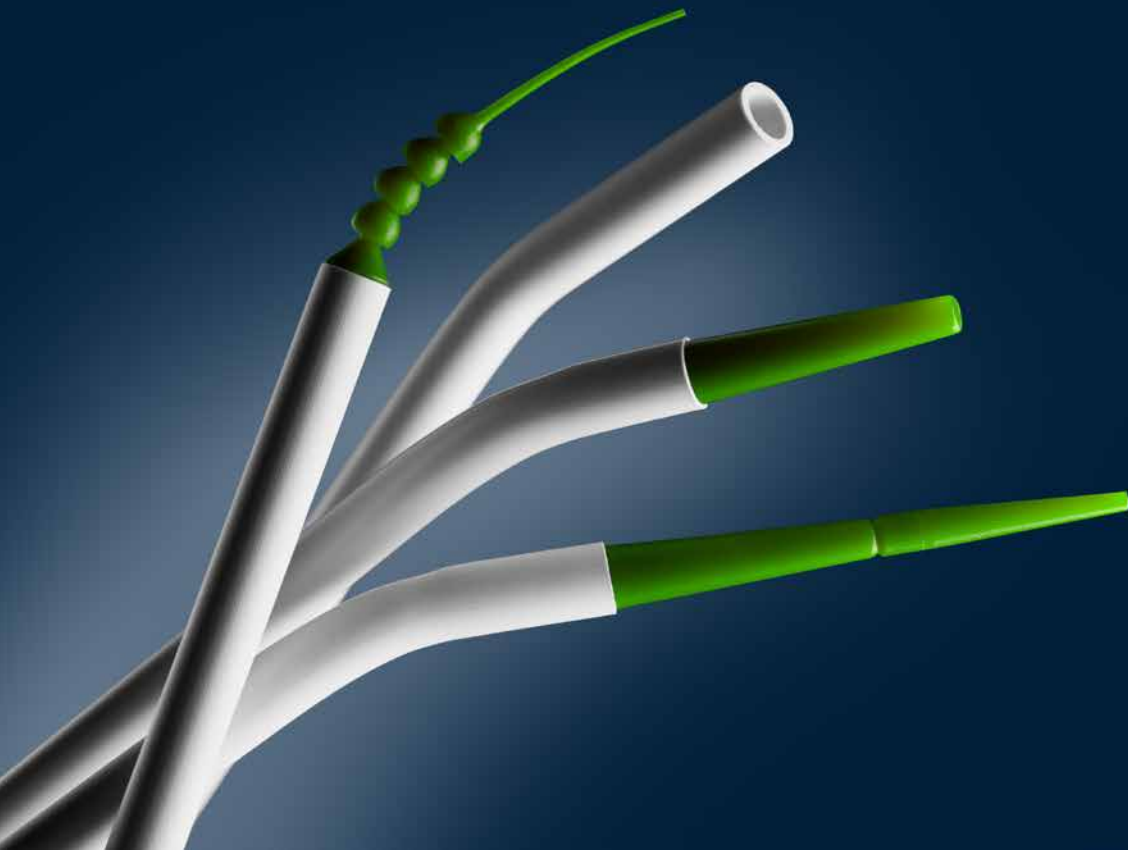


INFORMATIONS DE COMMANDE

	Orifice d'aspiration \varnothing en mm	Orifice de branchement \varnothing en mm	Contenu	REF
Surgitip-endo	0,35 mm	6,5 mm	20 pcs.*	60018280
Surgitip-micro	1,2 mm	6,5 mm	20 pcs.*	462012
			100 pcs.*	462013
Surgitip	2,8 mm	6,5 mm	20 pcs.*	462025
			100 pcs.*	462026
	4,9 mm	6,5 mm	20 pcs.*	462048
			100 pcs.*	462049
Canules d'aspiration	4,9 mm	6,5 mm	100 pcs.*	461048
Adaptateur		11 mm	1	463025
		16 mm	1	463011
Double adaptateur		11 + 16 mm	1 Set	463000

*avec 1 double adaptateur

© COLTENE – www.coltene.com



Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
FR-59260 Lezennes
T +33 320 64 64 00
info.fr@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau
T +49 7345 805 0
info.de@coltene.com