

SciCan

Autoclaves à cassettes

STATIM® G4



STÉRILISATION ET SÉCHAGE

plus rapides que les autoclaves à chambre à vide conventionnels



Rapidité

Le STATIM 2000 G4 offre les cycles les plus rapides au monde pour les instruments non emballés, soit 6 minutes. Les cycles pour instruments emballés, incluant le séchage, peuvent être réalisés en seulement 35 minutes.

Le STATIM 5000 G4 offre des cycles pour instruments non emballés d'une durée de 9 minutes seulement. Les cycles pour instruments emballés, incluant le séchage, peuvent être réalisés en seulement 40 minutes.



Fiabilité

Depuis plus de 25 ans, la rapidité, la fiabilité et la sécurité inégalées que procure le STATIM en ont fait l'autoclave à cassettes le plus vendu dans le monde.



Capacité

Les autoclaves STATIM G4 offrent non seulement des durées de stérilisation rapides, mais aussi une capacité qui répond aux besoins d'un cabinet achalandé.

Le STATIM 2000 G4 a une capacité maximale de 5 sachets et le STATIM 5000 G4 de 10 sachets.



Technologie G4

Les équipements G4 de SciCan peuvent se connecter et envoyer l'information à vos appareils intelligents, vous permettant ainsi d'avoir les données de cycles, les instructions ainsi que les notifications de maintenance au bout des doigts.



Qualité

La caractéristique d'usage unique de l'eau garantit qu'une eau pure est utilisée pour chaque cycle. La technologie de vapeur avant-gardiste traite délicatement tant les instruments solides que creux.



Spécifications du STAT/M 2000 G4

Article n° G4-121106

Dimensions de l'appareil (L x l x H) :

19,5 po x 16,25 po x 6 po / 49,5 cm x 41,5 cm x 15 cm

Dimensions internes de la cassette :

11 po x 7 po x 1,4 po / 28 cm x 18 cm x 3,5 cm

Hauteur minimale de la tablette pour un nivellement adéquat :

8,5 po / 22 cm

Poids sans eau :

46 lb / 21 kg

Consommation d'énergie :

115 V, 60 Hz, 11 A

	Non-emballé	Emballé	Caoutchouc / plastique	Séchage à l'air
Durée de stérilisation	3,5 minutes	10 minutes	15 minutes	Séchage à l'air seulement
Température de stérilisation	135 °C	135 °C	121 °C	Séchage à l'air seulement
Durée totale du cycle*	6 minutes	14 minutes	20 minutes	Séchage à l'air seulement

*La durée des cycles dépend de la charge d'instruments et n'inclut pas le séchage.

Spécifications du STAT/M 5000 G4

Article n° G4-201102

Dimensions de l'appareil (L x l x H) :

23,6 po x 16,1 po x 7,5 po / 60 cm x 41 cm x 19 cm

Dimensions internes de la cassette :

15 po x 7 po x 3 po / 38 cm x 18 cm x 7,5 cm

Hauteur minimale de la tablette pour un nivellement adéquat :

10 po / 26 cm

Poids sans eau :


73 lb / 33 kg

Consommation d'énergie :

115 V, 60 Hz, 11 A

	Non-emballé	Emballé	Caoutchouc / plastique	Grande charge - non emballé
Durée de stérilisation	3,5 minutes	6 minutes	15 minutes	6 minutes
Température de stérilisation	134 °C	134 °C	121 °C	134 °C
Durée totale du cycle*	9 minutes	17,5 minutes	24 minutes	12 minutes

*La durée des cycles dépend de la charge d'instruments et n'inclut pas le séchage.

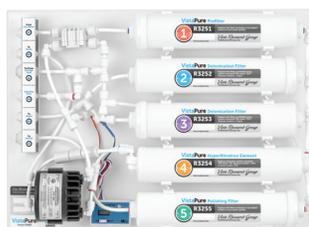

VistaPure™

Filtration de l'eau

Fournit deux degrés d'eau de haute qualité pour les autoclaves, les bouteilles dentaires, les nettoyeurs à ultrasons et le cycle de rinçage des lave-instruments.

V3000



AutoFill VistaPure™

Réapprovisionne automatiquement tout autoclave STAT/M et BRAVO, modèle ancien ou nouveau, avec une eau de qualité distillée – voilà une vraie fonction mains libres.

S3020 - AutoFill pour STAT/M

S3030 - AutoFill pour BRAVO



VistaCool™

Système de raccordement direct au drain

Protège les armoires et les tuyaux d'évacuation—et fait gagner du temps à votre personnel—en refroidissant l'eau usée de l'autoclave et en l'envoyant directement et automatiquement dans le drain.

V7501 - Pour un autoclave

V7502 - Pour deux autoclaves



STATMAT™

Protège votre STAT/M

Déposez les cassettes sur le dessus de votre STAT/M, protégé par un tapis en silicone qui en fait une aire de travail sécuritaire et hygiénique.

01-112867S - Pour STAT/M 2000

01-112868S - Pour STAT/M 5000



STAT-DRI™ Plus

Agent de séchage

Améliorez la qualité du séchage à l'intérieur des cassettes de votre STAT/M avec les agents de séchage STAT-DRI Plus.

2OZPLUS - Stat-Dri Plus 2 oz en vaporisateur

8OZPLUST - Stat-Dri Plus 8 oz en vaporisateur

8OZPLUS - Stat-Dri Plus 8 oz en recharge

32OZPLUS - Stat-Dri Plus 32 oz en recharge

T473 - Embout vaporisateur pour bouteille 32 oz

Fabriqué par :

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd.,
Toronto, ON, Canada, M3B 3P9
Tel: 416-445-1600
Toll free: 1-800-667-7733
customerservice@scican.com

VistaPure™, VistaPure AutoFill et VistaCool™
sont fabriqués par :

Vista Research Group

PO Box 321, Ashland, Ohio 44805-0321 USA
Tel: (419) 285-3927
VistaResearchGroup.com

www.scican.com

COLTENE

SD-540 CA FR R2