


COMPOSITI UNIVERSALI

Materiali da otturazione **BRILLIANT**

EverGlow EverGlow Flow Bulk Fill Flow



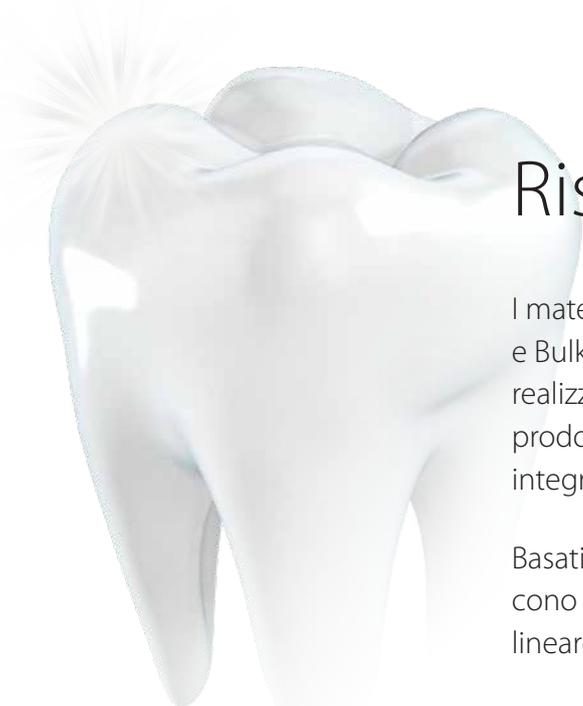

Risultati **BRILLANTI**

I materiali da otturazione BRILLIANT – EverGlow, EverGlow Flow e Bulk Fill Flow – sono stati sviluppati ponendo in primo piano la realizzazione di un sistema colori intuitivo e la semplicità d'uso. Questi prodotti si distinguono infatti per la praticità d'impiego e l'eccezionale integrazione cromatica.

Basati sulla stessa tecnologia dei riempitivi, i tre materiali interagiscono perfettamente tra loro e si combinano in un flusso di lavoro lineare.



BRILLIANT EverGlow

- ▶ Brillantezza che dura nel tempo
- ▶ Restauri estetici con un solo colore (single-shade)
- ▶ Sistema colori versatile con tre livelli di traslucenza
- ▶ Lucidabilità eccezionale e praticità d'impiego

BRILLIANT EverGlow Flow

- ▶ Alta stabilità abbinata a buona scorrevolezza
- ▶ Risultati altamente estetici

BRILLIANT Bulk Fill Flow

- ▶ Un unico materiale adattativo Multi Shade
- ▶ Affidabile profondità di polimerizzazione di 4 mm realizzabile in 20 s ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$)
- ▶ Nessuna necessità di uno strato superiore grazie all'elevata resistenza all'abrasione e alle proprietà meccaniche ottimali.

BRILLIANT EverGlow

Estetica di lunga durata, praticità d'impiego e resistenza meccanica sono le principali caratteristiche del concetto BRILLIANT EverGlow. La sua tecnologia dei riempitivi è progettata per ottenere il meglio da queste qualità e convincere utilizzatori e pazienti.



Brillantezza che dura nel tempo


Tecnologia dei riempitivi

Grazie ai riempitivi in vetro submicronici, gli utilizzatori beneficiano di un'eccellente lucidabilità, mentre i pazienti possono apprezzare la superficie lucida resistente e di lunga durata. Inoltre, i riempitivi pre-polimerizzati sono stati ottimizzati e sono ora perfettamente armonizzati con il composito non polimerizzato per migliorare e favorire ulteriormente il mantenimento della lucentezza. E infine, ma non meno importante, le superfici dei riempitivi sono trattate appositamente con un metodo sviluppato internamente per garantire una resistenza ottimale del composito all'interno della matrice resinosa.

Nel complesso, il risultato è un affidabile materiale BRILLANTE che soddisfa le esigenze del dentista moderno e orientato alla qualità.


Mantenimento della lucentezza

Dopo l'esposizione a oltre 20.000 movimenti di spazzolamento con simulatore.

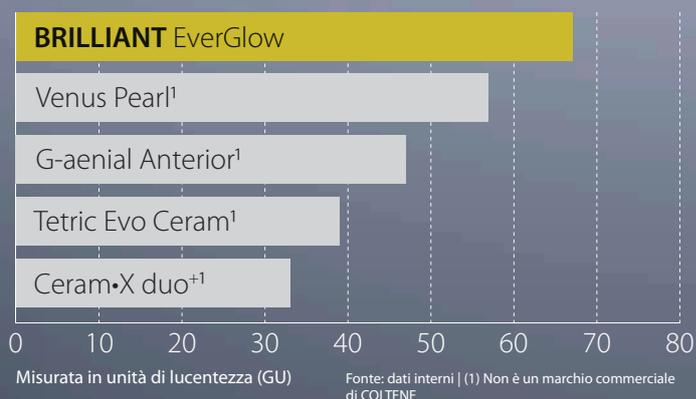

Basso assorbimento d'acqua

La composizione monomerica ottimizzata è alla base del basso assorbimento d'acqua, che a sua volta favorisce l'eccellente stabilità cromatica a lungo termine.

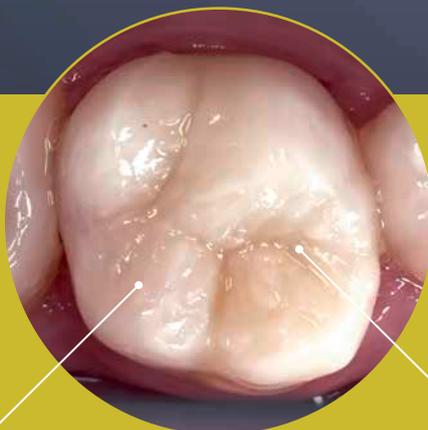

Elevata resistenza a compressione

Ideale per i restauri dei posteriori grazie all'elevata resistenza alle forze masticatorie.


Restauri estetici single-shade con colori universali

COLTENE è un innovatore nell'estetica dei colori

BRILLIANT EverGlow offre colori universali nel collaudato sistema Duo Shade inventato da COLTENE. Grazie alle caratteristiche ottiche di Duo Shade, essi consentono una fusione armoniosa con i denti adiacenti e si adattano pertanto a due colori VITA* in modo uniforme (ad esempio A1/B1 o A2/B2).

Per BRILLIANT EverGlow il concetto Duo Shade è stato portato al livello successivo: i colori universali. Grazie all'impiego di un unico colore universale è possibile realizzare restauri single-shade senza soluzione di continuità, eliminando la necessità di aggiungere uno smalto traslucido. La realizzazione di alti livelli estetici non è mai stata più semplice.

*VITA non è un marchio commerciale di COLTENE

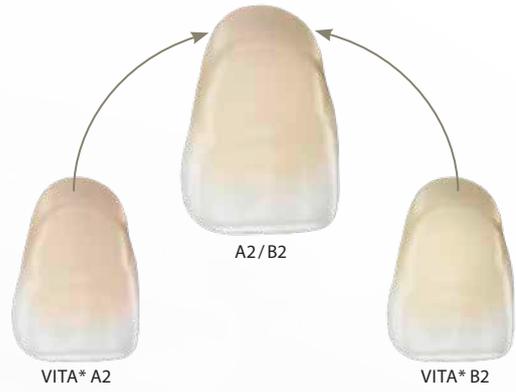

Situazione iniziale



Risultato finale soltanto con A3/D3



Caso clinico del Dr. med. dent. Markus Lenhard



È sufficiente utilizzarne tre o aggiungerne altri


Tre colori (A1/B1, A2/B2, A3/D3) sono già sufficienti per raggiungere subito buoni risultati in modo rapido ed efficiente nelle situazioni quotidiane senza dover scendere a grandi compromessi nell'abbinamento dei colori.

Per restauri più complessi a livello estetico, è sempre possibile supportare questo trio con quattro ulteriori colori universali, due colori traslucidi e cinque colori opachi.

Per saperne di più su questo trio efficiente →



7 colori universali

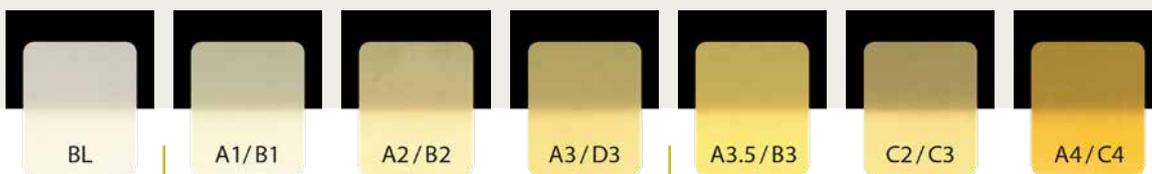

Un trio efficiente

- ▶ Duo Shade su base VITA*
- ▶ Per otturazioni anteriori e posteriori
- ▶ Per restauri estetici single-shade
- ▶ Per sostituzione dentina in restauri multi-shade

Sistema colori versatile con tre livelli di traslucenza

In aggiunta ai colori universali, sono disponibili sette colori supplementari che consentono tecniche di stratificazione dei colori. Questo permette di ottenere un risultato armonioso anche nei casi più complessi.

I colori traslucidi imitano le aree di smalto particolarmente pronunciate, mentre i cinque colori opachi possono essere utilizzati per realizzare la base di denti con alterazioni cromatiche o tatuaggi da amalgama.

Semplice per la pratica quotidiana



Restauri single-shade anteriori



Restauri single-shade posteriori



Colore opaco + Universale

Professionale per i casi più impegnativi



Colore universale + Strato di copertura traslucido




Colore opaco + Colore universale



Colore opaco + Universale + Strato coprente traslucido

2 colori traslucidi

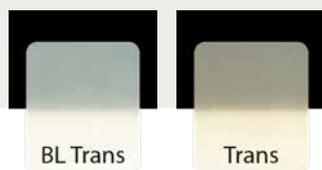

5 colori opachi



- ▶ Sostituzione dello smalto
- ▶ Ricostruzione di bordi incisali


- ▶ Mascheratura di denti con alterazioni cromatiche o aree scure
- ▶ Sostituzione di sostanza dentale opaca

Lucidabilità eccezionale e praticità d'impiego

Subito dopo l'applicazione, BRILLIANT EverGlow si presenta con una superficie eccezionalmente liscia e satinata. La fase di lucidatura si riduce ed in brevissimo tempo è possibile eseguire restauri altamente estetici.

Valutazione della lucidabilità

La buona lucidabilità è stata confermata dai dentisti. In un sondaggio condotto tra 39 dentisti in Europa e negli Stati Uniti, il **100%** ha dato un punteggio positivo. Il 76,9% ha addirittura assegnato il massimo punteggio possibile.

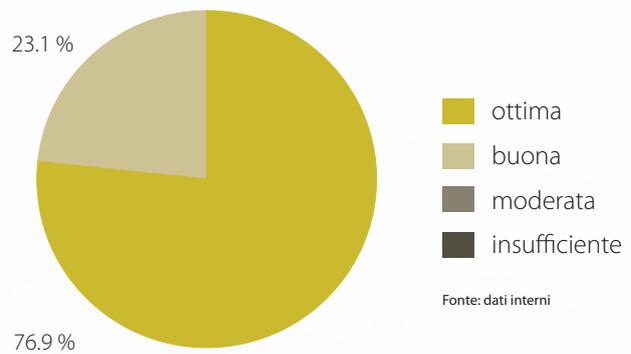


"BRILLIANT EverGlow è una resina composita facile da manipolare, che semplifica la sagomatura e la modellazione anatomica nei restauri sia anteriori che posteriori. La sua consistenza vellutata ma stabile consente di ottenere risultati costanti in ogni attività. Questa caratteristica, unita alla sua eccellente risposta alla finitura e alla lucidatura rispetto ai sistemi esistenti, lo rende il prodotto d'elezione per i restauri diretti."

Prof. Fernando Rubén Maravankin, Università di Buenos Aires, Argentina

Praticità d'impiego

La consistenza vellutata e la stabilità dimensionale rendono BRILLIANT EverGlow un materiale da otturazione allo stato dell'arte, agevole e pratico da applicare nelle cavità. Cuspidi modellate in modo elaborato, prominenze e punti di contatto rimangono intatti e non iniziano a deformarsi. L'elevata resistenza alla lampada operatoria e la bassa adesione, abbinate alla buona bagnabilità, completano la praticità d'impiego di questo prodotto.

Adesione allo strumento

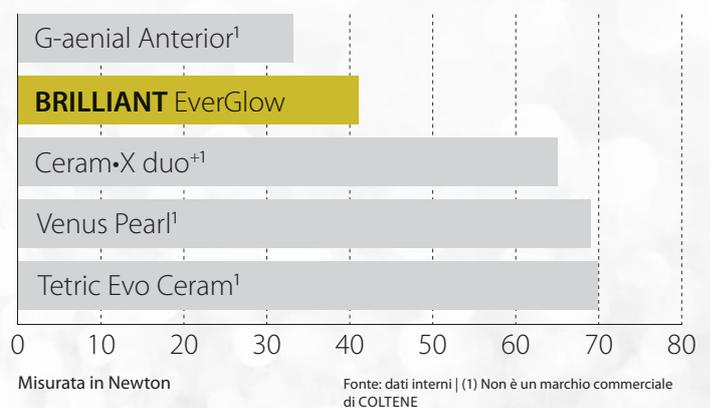

← Qui è possibile trovare altre informazioni su dati tecnici e risultati confrontati con prodotti concorrenti.

BRILLIANT EverGlow Flow

Il composito ibrido submicronico BRILLIANT EverGlow è disponibile anche in consistenza scorrevole. Oltre alle caratteristiche estetiche del materiale, è stata rivolta particolare attenzione anche alla praticità d'uso ottimale.



Alta stabilità abbinata a buona scorrevolezza

Con BRILLIANT EverGlow Flow l'eccellente stabilità e la buona scorrevolezza non sono più in contraddizione. BRILLIANT EverGlow Flow riesce a combinare queste caratteristiche in un unico materiale che lo rendono di impiego estremamente versatile. Con la sua elevata stabilità iniziale (v. figure a destra) e la perfetta isotropia, BRILLIANT EverGlow Flow può essere applicato con precisione assoluta in modo facile e controllato.

Elevata stabilità iniziale



Aghi per applicazione in due misure per indicazioni multiple



0,4 mm



0,8 mm

Risultati altamente estetici

Sebbene i colori universali e traslucidi risolvano la maggior parte dei casi, le zone scure e le deviazioni del croma possono influire negativamente sull'esito estetico finale di un restauro ed esigono un rivestimento opaco delle cavità. I colori opachi

OA2 e OA3 sono stati sviluppati per fare fronte a questa esigenza, creando la base per un restauro estetico dal colore armonioso. Di conseguenza, BRILLIANT EverGlow Flow permette di ottenere risultati estetici convincenti.



Situazione iniziale:
scolorimento




Colore opaco applicato



Restauro definitivo

BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow è il materiale da otturazione ideale per restauri semplici e rapidi. Basato sulla tecnologia dei riempitivi BRILLIANT, è il partner perfetto di BRILLIANT EverGlow e EverGlow Flow.

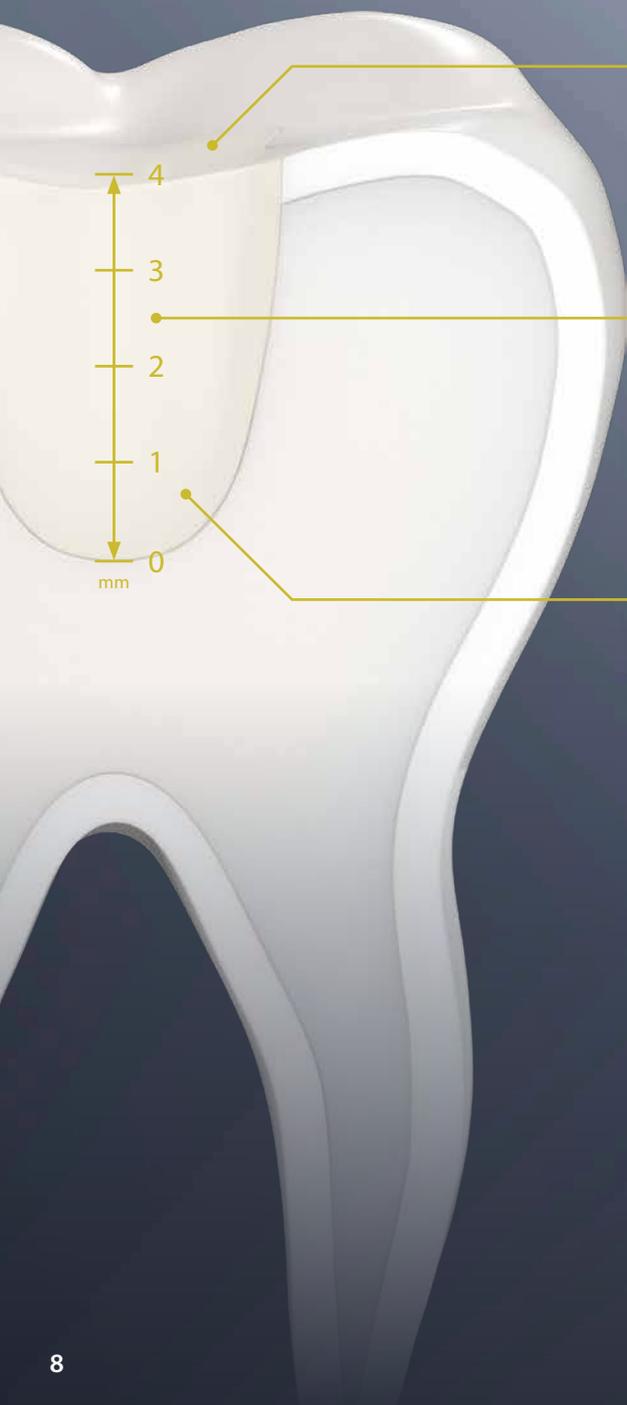

Nessuna necessità di uno strato superiore

Grazie alle elevate proprietà di resistenza all'abrasione, si ottengono restauri di alta qualità in un unico ed efficiente passaggio, poiché non è necessario uno strato di copertura.

Affidabile profondità di polimerizzazione di 4 mm

Incrementi di spessore fino a 4 mm vengono polimerizzati in modo affidabile in 20 secondi ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Questa caratteristica, unita alla bagnabilità superficiale e alla fluidità del materiale, consente di risparmiare tempo nelle fasi di lavoro.

Un unico materiale adattativo Multi Shade

L'effetto camaleonte di BRILLIANT Bulk Fill Flow consente di adattare il materiale Multi Shade a un'ampia gamma di colori dei denti.



Procedura clinica



Otturazione occlusale

Flusso di lavoro del restauro diretto



Informazioni per ordinare

Kit BRILLIANT EverGlow

	Colori universali**							Colori traslucidi***	
	Bleach (BL)	A1 / B1	A2 / B2	A3 / D3	A3.5 / B3	C2 / C3	A4 / C4	Bleach Translucent (BL Trans)	Translucent (Trans)
Kit Single-Shade									
60024151 7 siringhe × 3 g	1	1	1	1	1	1	1		
60024152 70 tip × 0,2g	10	10	10	10	10	10	10		
Kit d'estensione									
60024156 7 siringhe × 3 g								1	1
60024157 70 tip × 0,2g								10	10
Set di tre									
60033273 3 siringhe × 3 g		1	1	1					
60033272 60 tip × 0,2g		20	20	20					

Kit BRILLIANT EverGlow Flow

Flow Kit									
60019760 4 siringhe × 2 g		1	1	1	1				

** Per restauri single-shade o per stratificazione dei colori. Per maggiori informazioni, vedere pagina 4.

*** Altri colori da abbinare ai colori universali nella stratificazione. Per maggiori informazioni, vedere pagina 5.

Refill BRILLIANT EverGlow

Siringhe Tip

1 × 3 g 20 × 0,2g

60019697	60019706	● Bleach (BL)
60019698	60019707	● A1 / B1
60019699	60019708	● A2 / B2
60019700	60019709	● A3 / D3
60019701	60019710	● A3.5 / B3
60019702	60019716	● C2 / C3
60019703	60019717	● A4 / C4
60019705	60019719	● Bleach Translucent (BL Trans)
60019704	60019718	● Translucent (Trans)
60019743	60019746	● Opaque Bleach (OBL)
60019744	60019747	● Opaque A1 (OA1)
60023819	60023823	● Opaque A2 (OA2)*
60019745	60019748	● Opaque A3 (OA3)
60023820	60023824	● Opaque A4 (OA4)*

Eco Packs BRILLIANT EverGlow

Siringhe Tip

5 × 3 g 60 × 0,2g

60024166	60024160	● A1 / B1
60024167	60024161	● A2 / B2
60024168	60024162	● A3 / D3
60024169	60024163	● A3.5 / B3



60019709

60019748



60019700

60023819

Colori opachi***					Accessori					
					Guida colori		Dispenser con tip	Blocco carta mini	Aghi per applicazione	
Opaque Bleach (OBL)	Opaque A1 (OA1)	Opaque A2 (OA2)	Opaque A3 (OA3)	Opaque A4 (OA4)	Universale	Estensione				Standard Ø 0,8mm
					1			1		
					1		1	1		
1	1	1	1	1		1		1		
10	10	10	10	10		1	1	1		

								1	20	20
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	----

Refill BRILLIANT EverGlow Flow

Siringhe

1 x 2 g + 10 aghi per applicazione

- 60019752 ● Bleach (BL)
- 60019753 ● A1/B1
- 60019754 ● A2/B2
- 60019755 ● A3/D3
- 60019756 ● A3.5/B3
- 60019757 ● A4/C4
- 60019758 ● Translucent (Trans)
- 60019751 ● Opaque A2 (OA2)
- 60023825 ● Opaque A3 (OA3)*



60019751

Refill BRILLIANT Bulk Fill Flow

Siringhe

1 x 2,3 g + 11 aghi per applicazione

- 60033280 Multi Shade



60033280

Accessori

- 60021919 Guida colori BRILLIANT EverGlow
- 60024158 Guida colori Colori universali
- 60024159 Estensione guida colori con Colori traslucidi + Colori opachi
- 60022485 Erogatore per tip di composito
- 8469 Aghi per applicazione Flow standard 20 x Ø 0,8 mm
- 60022137 Aghi per applicazione Flow sottili, 20 x Ø 0,4 mm



60021919



"Come opinion leader di numerose aziende del settore dentale, ho avuto l'opportunità di lavorare e testare svariati compositi. Con BRILLIANT EverGlow è stato 'amore a prima vista'. È estremamente semplice abbinare il colore e nascondere la preparazione dei margini, malgrado l'impiego di un numero di colori limitato, ed è altrettanto facile ottenere sempre risultati prevedibili e di alta qualità, dal punto di vista sia estetico che clinico."


Dr. Monaldo Saracinelli, Gruppo Style Italiano, Italia

"Sono rimasto enormemente colpito dalle prestazioni di COLTENE BRILLIANT EverGlow. Non si appiccica agli strumenti e questo, oltre alla sua facilità nel seguire i movimenti di compattamento dell'operatore, ne assicura un affidabile adattamento alla forma della cavità. Ciò consente di ottenere risultati estetici stupefacenti e, senza dover applicare un protocollo di finitura complesso, si avrà un risultato liscio, lucente e naturale. Ha un adattamento eccellente del colore e non potrò mai raccomandarlo abbastanza per la dotazione di ogni dentista."

Dr. Nalin Karunaratne, Regno Unito



© COLTENE – www.coltene.com



Note legali / Redazione

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contatti di vendita

COLTENE Italia S.r.l
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
IT-20832 Desio (MB)
T +39 0362 62 67 32
info.it@coltene.com

Centro Assistenza

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lun.-Ven. dalle 8:00 alle 17:00 CET

