

SILICONE-A PER IMPRONTE DI PRECISIONE



**UN PICCOLO PASSO PER GLI ODONTOIATRI**  
UN GRANDE PASSO PER L'ODONTOIATRIA

**PRESIDENT**

The Original

 **COLTENE**


# PRESIDENT

The Original

**UN PICCOLO PASSO PER GLI ODONTOIATRI**  
UN GRANDE PASSO PER L'ODONTOIATRIA

**IL LANCIO SUL MERCATO NEL 1975 DI PRESIDENT, IL PRIMO SILICONE PER ADDIZIONE, È CONSIDERATO UNA PIETRA MILIARE NELLO SVILUPPO DEI MATERIALI DA IMPRONTA DI ALTA PRECISIONE.**

Grazie all'uso degli elastomeri a base di polivinilsilossani (PVS), le impronte rilevate con PRESIDENT raggiungevano per la prima volta quella stabilità dimensionale e quella precisione che ancora caratterizzano un silicone per addizione. Il nome PRESIDENT distingue una tradizionale linea di prodotti COLTENE riconosciuta per la superiore qualità sempre costante ed ottimale nel tempo.

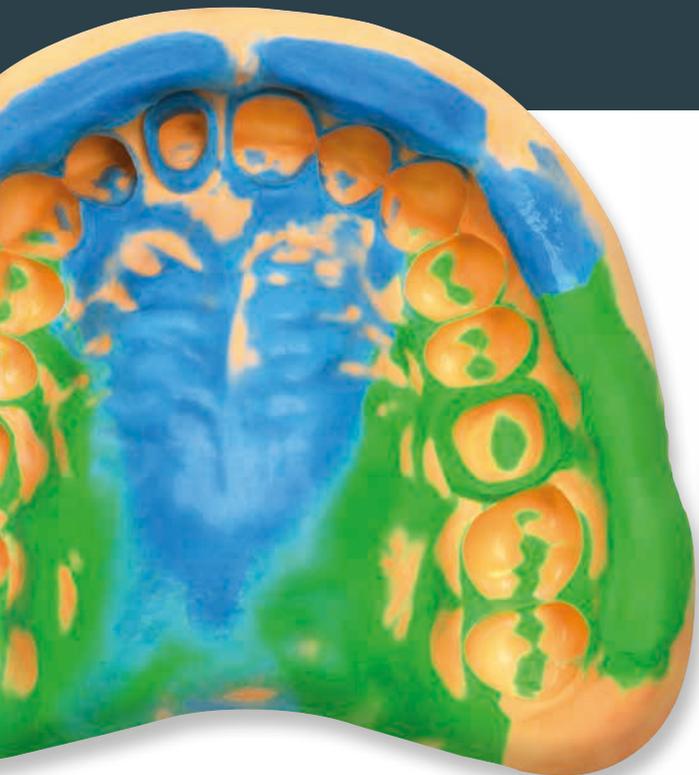



## MATERIALI PER PORTAIMPRONTA PRESIDENT

I materiali per portaimpronta PRESIDENT convincono per l'elevata resistenza allo strappo ed elasticità. L'agevole rimozione delle impronte anche nelle condizioni più difficili, mantiene inalterata la precisione. PRESIDENT heavy body e MonoBody sono attivati in superficie e le loro caratteristiche tissotropiche favoriscono una agevole diffusione del materiale wash nelle aree clinicamente più critiche se sottoposti ad una leggera pressione. I putty PRESIDENT si miscelano rapidamente e sono disponibili con tre diverse durezze finali per soddisfare ogni esigenza individuale.



## CINQUE MATERIALI PER PORTAIMPRONTA TRA CUI SCEGLIERE

La gamma PRESIDENT comprende tre materiali putty per le differenti indicazioni e preferenze. È possibile scegliere tra durezza finale alta, media o bassa per ottenere una stabilità ottimale e facilità nella ribasatura. Inoltre PRESIDENT offre una elevata resistenza allo strappo a garanzia di una elevata precisione e stabilità dimensionale.

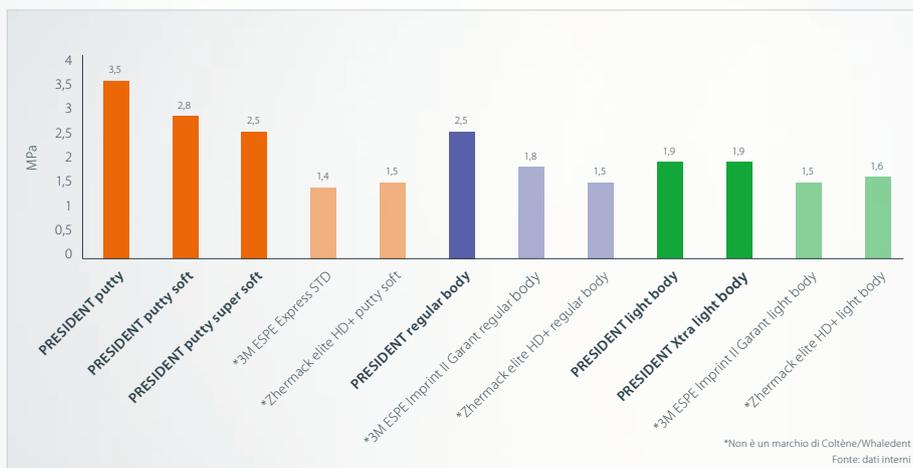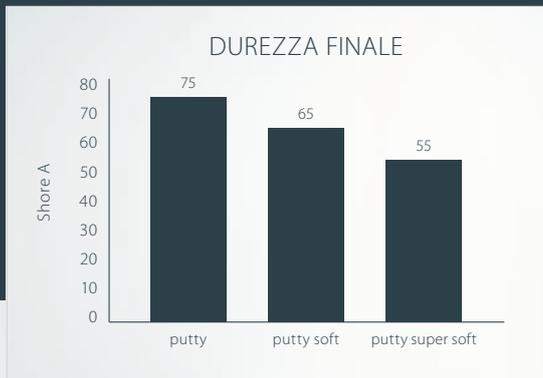

## RESISTENZA ALLO STRAPPO

# PRESIDENT

The Original

## MATERIALI WASH PRESIDENT

I materiali wash PRESIDENT sono stabili, ma sotto pressione divengono estremamente fluidi e in grado di rilevare con precisione tutti i dettagli. Le loro proprietà idrofile si devono ai surfattanti contenuti nel materiale. A contatto con l'umidità, questi additivi migrano verso la superficie e riducono la tensione superficiale, migliorando la bagnabilità.



Xtra light body



light body



regular body

## TRE MATERIALI WASH TRA CUI SCEGLIERE

Tutti i materiali wash PRESIDENT mostrano un comportamento scorrevole perfetto in un ambiente umido consentendo di scegliere la viscosità preferita, da bassa ad alta, in base alle proprie esigenze.



Xtra light body




light body




regular body

I materiali wash PRESIDENT presentano una scorrevolezza e tissotropia in grado di rilevare i margini con precisione.

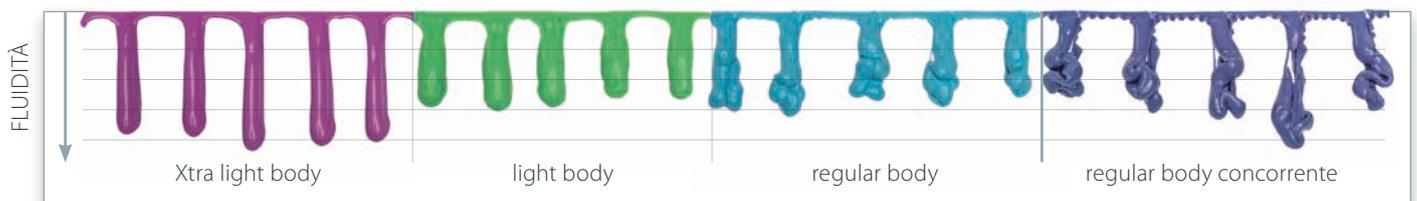

# PRESIDENT

The Original

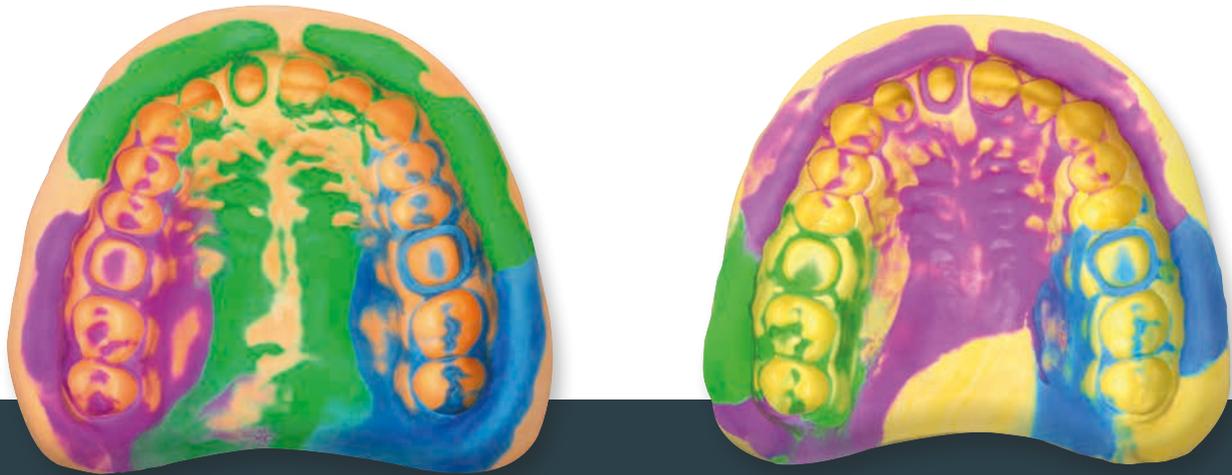

## NUOVI COLORI

I nuovi e freschi colori della linea PRESIDENT, donano un miglior contrasto tra materiali wash e portaimpronta mostrando così una maggior dettaglio di leggibilità.

	Fluidità	Viscosità	Durezza finale	Resistenza allo strappo	Recupero elastico	
MATERIALE WASH	Xtra light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	light body			50 Shore A	1,8 MPa	99,8 %
	regular body			55 Shore A	2,5 MPa	99,8 %
	MonoBody			58 Shore A	3,0 MPa	99,7 %
	heavy body			63 Shore A	3,5 MPa	99,7 %
MATERIALE PORTAIMPRONTA	putty super soft		55 Shore A	2,5 MPa	99,5 %	
	putty soft		65 Shore A	2,8 MPa	99,4 %	
	putty		75 Shore A	3,5 MPa	99,2 %	

LA GAMMA PRESIDENT IN SINTESI

# PRESIDENT

The Original



## INFORMAZIONI PER ORDINARE

### 50 ml

- 60019937** **PRESIDENT** The Original **Xtra light body**  
2 cartucce da 50 ml  
12 puntali Universal Mixing Tip
- 60019938** **PRESIDENT** The Original **light body**  
2 cartucce da 50 ml  
12 puntali Universal Mixing Tip
- 60019939** **PRESIDENT** The Original **regular body**  
2 cartucce da 50 ml  
12 puntali Universal Mixing Tip

### 75 ml

- 60019941** **PRESIDENT** The Original **heavy body**  
2 cartucce da 75 ml  
8 puntali Mixing Tip Turquoise

### putty

- 60019942** **PRESIDENT** The Original **putty**  
2 x 300 ml, 2 x cucchiari
- 60019943** **PRESIDENT** The Original **putty soft**  
2 x 300 ml, 2 x cucchiari
- 60019944** **PRESIDENT** The Original **putty super soft**  
2 x 300 ml, 2 x cucchiari
- 60022166** **PRESIDENT** The Original **fast putty soft**  
2 x 300 ml, 2 x cucchiari

### System 360

- 60019946** **PRESIDENT** The Original **MonoBody Refill**  
2 cartucce da 380 ml
- 60019947** **PRESIDENT** The Original **heavy body Starter Kit**  
1 cartuccia da 380 ml  
10 puntali Dynamic Mixing Tip  
1 anello di fissaggio
- 60019948** **PRESIDENT** The Original **heavy body Refill**  
2 cartucce da 380 ml

### Tubi

- 60019949** **PRESIDENT** The Original **light body**  
1 base da 53 ml  
1 catalizzatore da 53 ml
- 60019950** **PRESIDENT** The Original **regular body**  
1 base da 53 ml  
1 catalizzatore da 53 ml

Coltène/Whaledent AG - [www.coltene.com](http://www.coltene.com)

**Coltène Italia S.r.l**  
c/o Polo Tecnologico della Brianza  
Via Alessandro Volta, 94  
Cond. Bianchi  
20832 Desio (MB)/Italia  
T +39 0362 62 67 32  
F +39 0362 63 25 80  
[info.it@coltene.com](mailto:info.it@coltene.com)

**Coltène/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Svizzera  
T +41 71 757 53 00  
F +41 71 757 53 01  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

**Coltène/Whaledent Inc.**  
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls  
Ohio 44223/USA  
T +1 330 916 8800  
F +1 330 916 7077  
[info.us@coltene.com](mailto:info.us@coltene.com)

 **COLTENE**