

MOTORE ENDODONTICO SENZA FILI

CanalPro X-Move

Piena libertà di movimento





CanalPro X-Move

Il motore endodontico senza fili CanalPro X-Move presenta due modalità di movimento: rotazione continua e movimento alternativo per tutti i comuni sistemi di file. Il motore è semplice da usare e offre grande flessibilità.

Caratteristiche e vantaggi


- Rotazione continua e movimento alternativo per tutti i comuni sistemi di file
- Motore endodontico senza fili per un funzionamento semplice e flessibile
- Localizzatore apicale integrato per trattamenti sicuri ed efficienti
- Il contrangolo isolato con testina super mini e collo sottile offre un comodo utilizzo e un ampio campo visivo
- Display di controllo intuitivo per facilitare le operazioni
- Le impostazioni pre-programmate per i sistemi di file COLTENE riducono il tempo di preparazione



Contrangolo con testina e collo normali



Contrangolo CanalPro X-Move con testina super mini e collo sottile

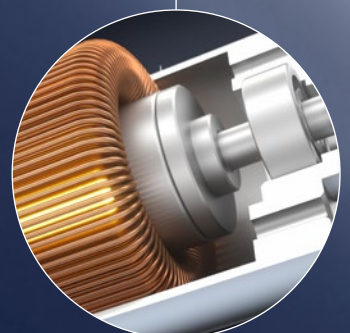


Dati tecnici

- Contrangolo: rotazione 360°
- Range del torque: 0,4–5,0 Ncm
- Range di velocità: 100–2500 giri/min
- Angolo alternativo regolabile: intervallo di 10°
- Range di regolazione 20°–400°
- Mini contrangolo isolato con diametro di 8 mm e altezza di 9,7 mm



Menu utente

- Impostazioni pre-programmate per HyFlex EDM, HyFlex EDM OGSF Sequence, HyFlex CM, MicroMega One Flare, MicroMega One G, MicroMega One Curve mini, MicroMega One RECI, MicroMega 2Shape mini, Remover per HyFlex e sistemi MicroMega
- Possibilità di impostare manualmente i parametri (GIRI/MIN, torque, angoli) per altri sistemi di file

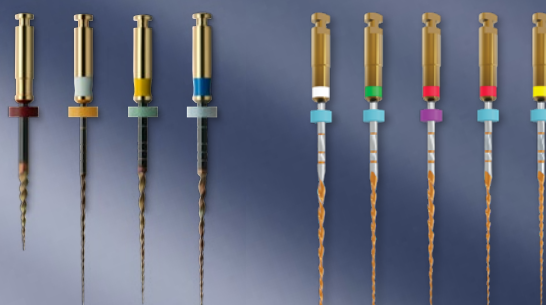

HyFlex EDM OGSF

MicroMega One RECI

Il motore: più potente e più silenzioso

- Angoli alternativi regolabili per una preparazione più efficiente
- La minore rumorosità, grazie alla rotazione fluida, aumenta il comfort del trattamento
- Motore senza spazzole ad alte prestazioni
- Display di controllo per facilitare le operazioni

Dati tecnici e d'impostazione per tutti i file COLTENE:



Informazioni per ordinare

CanalPro X-Move Box

- 65002739** 1 x Manipolo motorizzato
- 1 x Base di ricarica
- 1 x Contrangolo
- 1 x Ugello dell'iniettore
- 1 x Cavo di misurazione
- 4 x Supporto del file
- 2 x Clip labiale
- 2 x Sonda a contatto
- 2 x O-ring
- 1 x Adattatore di alimentazione
- 1 x Batteria

Accessori

- 65002742** 1 x Manipolo motorizzato
- 65002743** 1 x Base di ricarica
- 65002744** 1 x Contrangolo
- 65002745** 1 x Ugello dell'iniettore
- 65002746** 1 x Adattatore di alimentazione
- 65002747** 1 x Cavo di misurazione
- 65002748** 4 x Supporto del file
- 65002749** 2 x Clip labiale
- 65002750** 2 x Sonda a contatto
- 65002751** 2 x O-ring
- 65002752** 1 x Batteria



La vostra guida Endo Pratica. Innovativa. All'avanguardia.

COLTENE fornisce soluzioni semplici, sicure ed efficienti per ogni fase del processo endodontico, guidando attentamente il dentista attraverso ogni situazione endodontica con corsi di formazione dedicati e consulenti esperti in endodonzia.

La nostra gamma di prodotti, perfezionata nel corso di decenni, comprende materiali di consumo innovativi e apparecchiature avanzate che coprono in modo affidabile tutte le cinque fasi del trattamento.



© COLTENE - www.coltene.com

Note legali / redazione

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contatti di vendita

COLTENE Italia S.r.l
c/o Polo Tecnologico della Brianza
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi
IT-20832 Desio (MB)
+39 0362 62 67 32
info.it@coltene.com

Centro Assistenza

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UJFN)
Lun.-Ven. dalle 8:00 alle 17:00 CET

COLTENE