


ADESIVO UNIVERSALE MONOCOMPONENTE  
FOTOPOLIMERIZZABILE

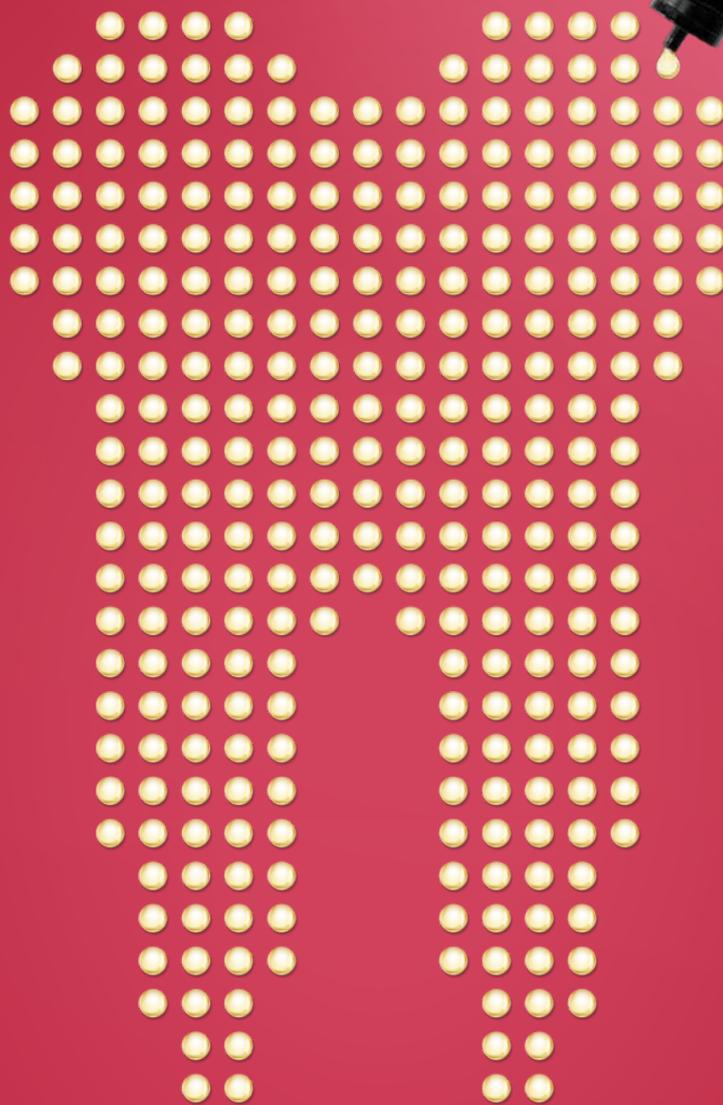

# ONE COAT 7 UNIVERSAL

L'adesivo per tutte le situazioni

 COLTENE

L'adesivo fotopolimerizzabile **ONE COAT 7 UNIVERSAL** è l'unico adesivo di cui avrò bisogno per la tecnica di otturazione diretta e indiretta nel suo studio. Nessuna necessità di primer o silano: è sufficiente applicare, disperdere con getto d'aria e fotopolimerizzare – fatto.

I vantaggi in sintesi



Un solo adesivo universale per tutte le indicazioni e le tecniche di mordenzatura



Estremamente economico: fino a 300 applicazioni per flacone




Valori di adesione eccezionali ed eccellente sigillo marginale

Il tuttofare

# ONE COAT 7 UNIVERSAL

Adesione affidabile su diverse superfici

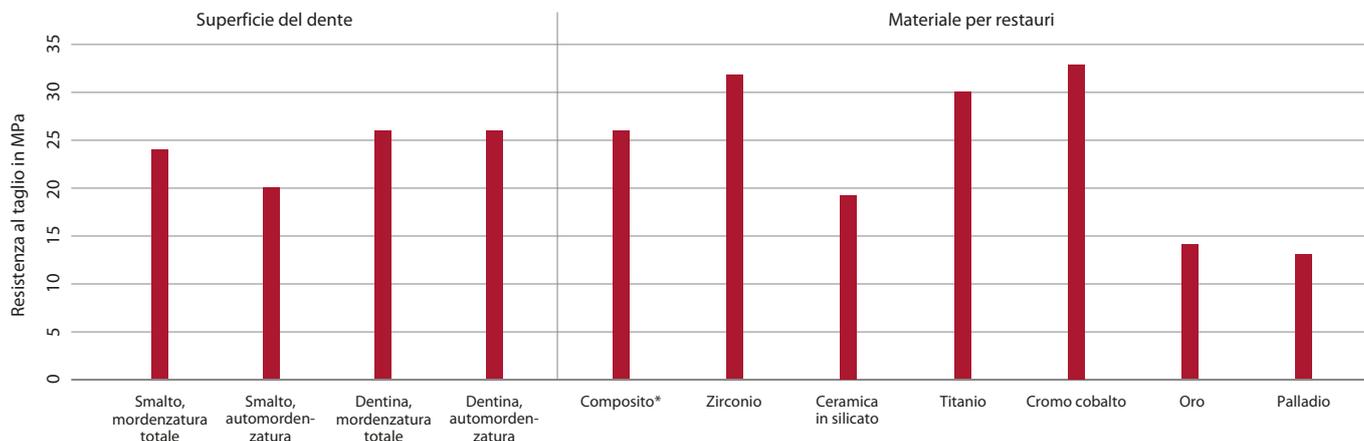

\*SYNERGY D6, COLTENE  
Fonte: dati interni  
Misurazione di Watanabe

Sostanza dentale, ceramica, metallo, composito – ONE COAT 7 UNIVERSAL garantisce un'adesione sicura e affidabile su qualsiasi superficie. A seconda della situazione, si può scegliere di ricorrere all'effetto di automordenzatura oppure mordenzare anche lo smalto e/o la dentina con acido fosforico (ad es. Etchant Gel S, COLTENE). Sta cementando un restauro indiretto e ha bisogno di un materiale composito a polimerizzazione chimica? Nessun problema – l'attivatore disponibile assicura la compatibilità con ONE COAT 7 UNIVERSAL.



Applicazione ottimizzata per lavorare comodamente e in modo economico

L'ergonomico flacone triangolare si adatta perfettamente alla mano dell'operatore. Il contagocce ottimizzato si distingue per l'erogazione pulita e precisa, nonché per l'applicazione senza flusso continuo. Ciò consente fino a 300 applicazioni per flacone.

Il perfetto partner di adesione  
della gamma COLTENE.



Informazioni per ordinare

#### ONE COAT 7 UNIVERSAL

##### 60019538 Intro Kit

1 × 5 ml	ONE COAT 7 UNIVERSAL
1 × 2,5 ml	Etchant Gel S
1 × 20	Puntali applicatori
1 × 50	Pennellini neri
1 ×	Pozzetto di miscelazione
1 ×	Coperchio per pozzetto

##### 60019539 Refill

1 × 5 ml	Refill
----------	--------

##### 60019540 Single Dose

50 × 0,1 ml	Single Dose
1 × 50	Pennellini neri

##### 7634 Pennellini neri, 50 pz.

##### 7054

1 × 3 ml	One Coat 7.0 Activator
1 × 50	Pennellini neri

##### 7373

2 × 2,5 ml	Etchant Gel S Kit
1 × 20	Siringhe
	Puntali applicatori

© COLTENE – [www.coltene.com](http://www.coltene.com)

#### COLTENE Italia S.r.l

c/o Polo Tecnologico della Brianza  
Via Alessandro Volta, 94 - Cond. Bianchi  
20832 Desio (MB) / Italia  
T +39 0362 62 67 32  
[info.it@coltene.com](mailto:info.it@coltene.com)

#### Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten / Svizzera  
T +41 71 757 53 00  
[info.ch@coltene.com](mailto:info.ch@coltene.com)

 **COLTENE**