

MATERIAL DE IMPRESSÃO DE SILICONE A



UM PEQUENO PASSO PARA OS DENTISTAS
UM GRANDE PASSO PARA A ODONTOLOGIA

PRESIDENT

The Original

 **COLTENE**


PRESIDENT

The Original

UM PEQUENO PASSO PARA OS DENTISTAS
UM GRANDE PASSO PARA A ODONTOLOGIA

A APRESENTAÇÃO DE PRESIDENT EM 1975 – O PRIMEIRO SILICONE DE ADIÇÃO DO MERCADO – É CONSIDERADA UM MARCO NO DESENVOLVIMENTO DOS MATERIAIS DE IMPRESSÃO DENTAL DE ELEVADA PRECISÃO.

Com a utilização dos elastómeros de polivinilsiloxano (PVS) pela primeira vez, os utilizadores de PRESIDENT alcançaram uma estabilidade dimensional sem precedentes e uma precisão que caracterizam hoje um silicone A. A marca PRESIDENT continua a convencer enquanto linha de produtos tradicional da COLTENE com a sua qualidade irrepreensível e em melhoramento contínuo.

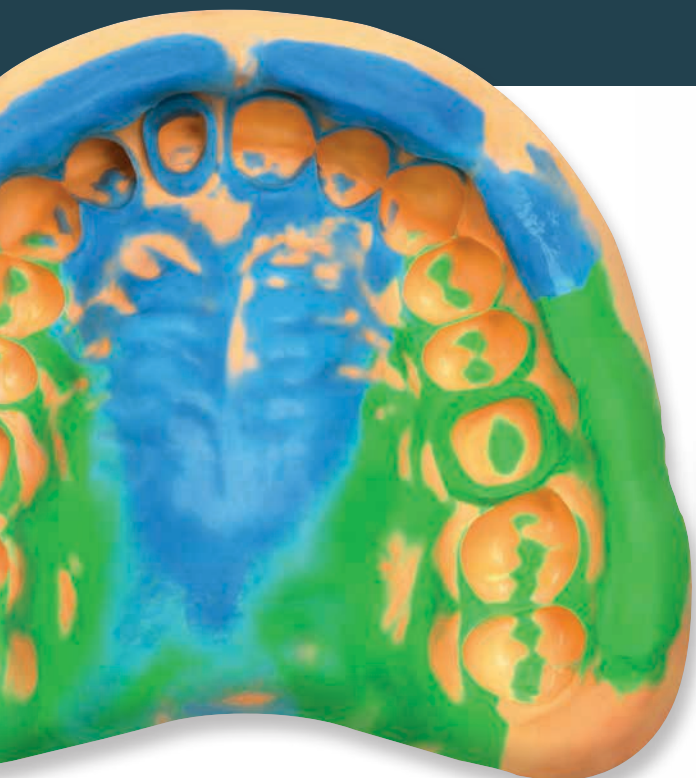



MATERIAIS DE MOLDEIRA PRESIDENT

Os materiais de moldeira PRESIDENT convencem pela sua elevada resistência à rutura e elasticidade. Graças à remoção perfeita, as impressões são precisas e bem sucedidas, mesmo nas condições mais difíceis. PRESIDENT heavy body e MonoBody são ativados pela superfície e tixotrópicos, com uma rápida acumulação de pressão, o que permite que o material de correção seja facilmente conduzido para as áreas clinicamente críticas. As massas PRESIDENT misturam-se rapidamente e apresentam-se em três durezas finais para cada caso particular.



CINCO MATERIAIS DE MOLDEIRA À SUA ESCOLHA

O portfólio PRESIDENT contém massa de três materiais para as diversas indicações e preferências. Pode escolher uma dureza final alta, média ou baixa para a estabilidade ideal e facilidade de corte. Além disso, PRESIDENT oferece uma elevada resistência à rutura para grande precisão e estabilidade dimensional.

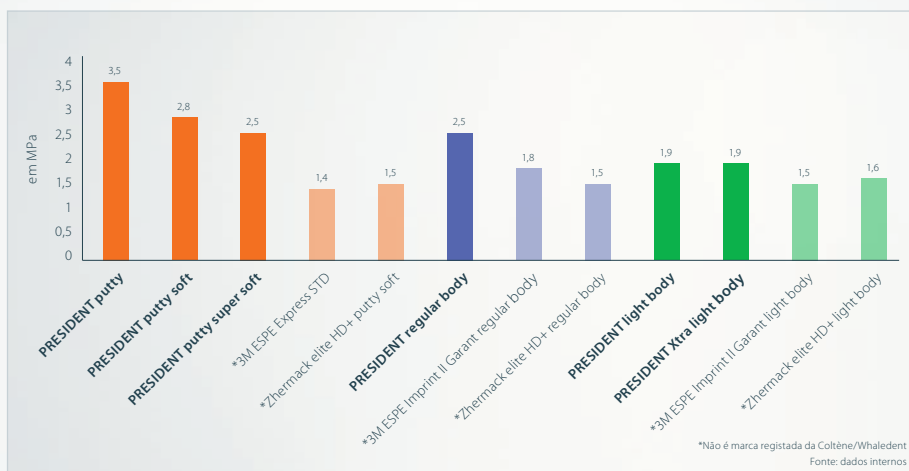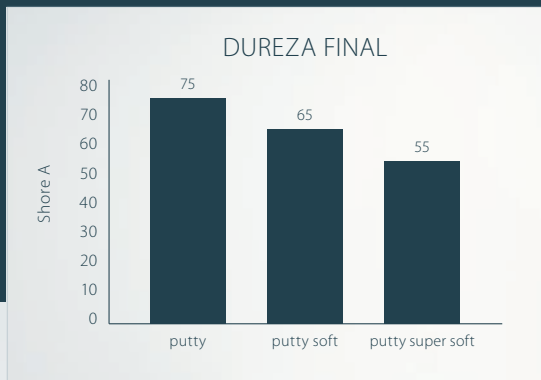

RESISTÊNCIA À RUTURA

PRESIDENT

The Original


MATERIAIS DE CORREÇÃO PRESIDENT

Os materiais de correção PRESIDENT são estáveis, mas extremamente fluidos sob pressão para captar com precisão todos os detalhes marginais. As propriedades hidrófilas são resultado dos agentes tensoativos no material. Em contacto com a humidade, estes aditivos movem-se para a superfície e reduzem a tensão de superfície, melhorando a molhabilidade.




TRÊS MATERIAIS DE CORREÇÃO À SUA ESCOLHA

Todos os materiais de correção PRESIDENT apresentam uma moldabilidade perfeita em ambiente húmido. Selecione a viscosidade que prefere, de baixa a alta, em função das suas necessidades.

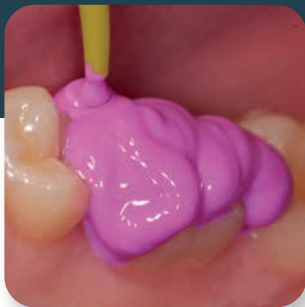

Xtra light body

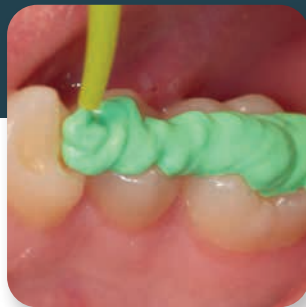


light body




regular body

Os materiais de correção PRESIDENT apresentam um excelente nivelamento e tixotropia, o que resulta em contornos precisos.

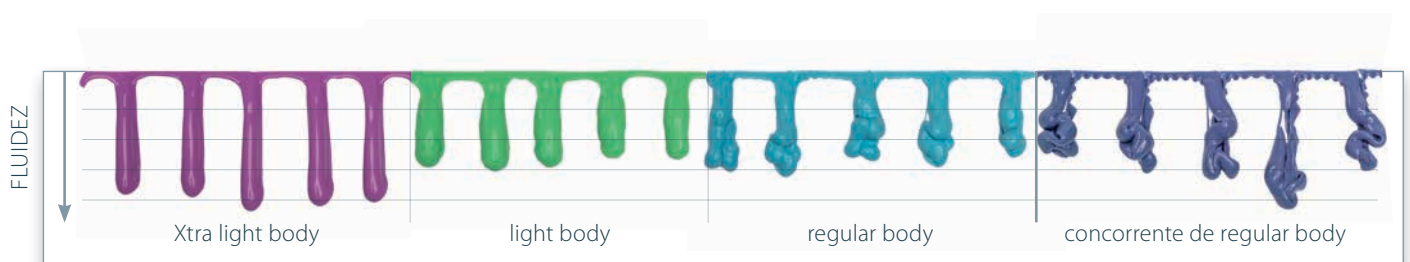

PRESIDENT

The Original

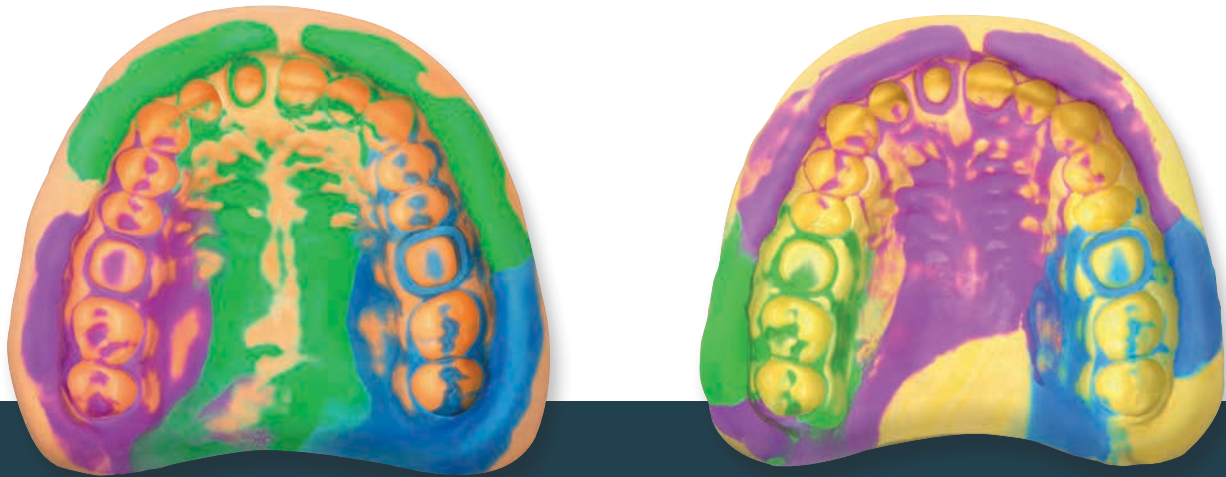

NOVAS CORES

As novas cores frescas da linha PRESIDENT permitem um maior contraste entre os materiais de correção e de moldeira, o que torna a leitura mais precisa e detalhada.

		Fluidez	Viscosidade	Dureza final	Resistência à rutura	Recuperação elástica
CORREÇÃO	Xtra light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8%
	light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8%
	regular body			55 Shore A	2,5 MPa	99,8%
	MonoBody			58 Shore A	3,0 MPa	99,7%
	heavy body			63 Shore A	3,5 MPa	99,7%
MOLDEIRA	putty super soft			55 Shore A	2,5 MPa	99,5%
	putty soft			65 Shore A	2,8 MPa	99,4%
	putty			75 Shore A	3,5 MPa	99,2%

VISTA GERAL DO PORTFÓLIO PRESIDENT

PRESIDENT

The Original



INFORMAÇÃO PARA ENCOMENDAS

50 ml

- 60019937** **PRESIDENT The Original Xtra light body**
2 cartuchos de 50 ml
12 pontas misturadoras universais
- 60019938** **PRESIDENT The Original light body**
2 cartuchos de 50 ml
12 pontas misturadoras universais
- 60019939** **PRESIDENT The Original regular body**
2 cartuchos de 50 ml
12 pontas misturadoras universais

75 ml

- 60019941** **PRESIDENT The Original heavy body**
2 cartuchos de 75 ml
8 pontas de mistura turquesa

putty

- 60019942** **PRESIDENT The Original putty**
2 x 300 ml, 2 colheres
- 60019943** **PRESIDENT The Original putty soft**
2 x 300 ml, 2 colheres
- 60019944** **PRESIDENT The Original putty super soft**
2 x 300 ml, 2 colheres
- 60022166** **PRESIDENT The Original fast putty soft**
2 x 300 ml, 2 colheres

System 360

- 60019946** **PRESIDENT The Original MonoBody Refill**
2 cartuchos de 380 ml
- 60019947** **PRESIDENT The Original heavy body Kit de principiante**
1 cartucho de 380 ml
10 pontas misturadoras dinâmicas
1 anel de fixação
- 60019948** **PRESIDENT The Original heavy body Refill**
2 cartuchos de 380 ml

Bisnagas

- 60019949** **PRESIDENT The Original light body**
1 base de 53 ml
1 catalisador de 53 ml
- 60019950** **PRESIDENT The Original regular body**
1 base de 53 ml
1 catalisador de 53 ml

Coltène/Whaledent AG - www.coltene.com

Coltene Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda
Madrid / España
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls
Ohio 44223/Estados Unidos
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**