

SISTEMA DE FACETAS DIRETAS DE COMPÓSITO

BRILLIANT COMPONEER®

Um Sorriso Brilhante





BRILLIANT COMPONEER®

Um Sorriso Brilhante

Restaurações estéticas de dentes anteriores em apenas uma sessão

BRILLIANT COMPONEER são facetas de compósito pré-fabricadas para a restauração estética dos dentes anteriores. Este inteligente sistema combina as vantagens da restauração direta com as da técnica de facetas indiretas. Isto permite correções individuais de forma tão fácil e eficiente

como restaurações completas de dentes anteriores. As facetas existem em vários tamanhos e as tonalidades do esmalte podem ser facilmente personalizadas.

Para o paciente, isto significa um sorriso brilhante em apenas uma sessão.

Compósito brilhante

As facetas de esmalte baseiam-se na comprovada tecnologia de enchimento submicrónico da BRILLIANT EverGlow e são fabricadas industrialmente. Devido à sua composição refinada com enchimentos especiais, o material caracteriza-se por uma retenção de alto brilho.

Ao mesmo tempo, a excelente estabilidade das facetas permite inclusive um brilho cintilante com uma espessura de apenas 0,3 mm.

A superfície extremamente lisa de BRILLIANT COMPONEER pode ser rapidamente polida para conferir alto brilho.



Cimentação como peça única

Para fixar BRILLIANT COMPONEER, basta aplicar uma camada do compósito universal BRILLIANT EverGlow. A utilização do mesmo material de base cria uma ligação firme e homogênea - a base ideal para uma restauração fiável. A consistência macia e a excelente molhabilidade de BRILLIANT Ever-

Glow asseguram o manuseamento confortável de BRILLIANT COMPONEER.

Um adesivo que combina na perfeição e práticas ferramentas de trabalho para posicionar e modelar as facetas completam o sistema.

- Restaurações estéticas de dentes anteriores de alta qualidade
- Restaurações minimamente invasivas à base de compósitos
- Apenas uma sessão - não é preciso laboratório
- Brilho de longa duração e excelentes propriedades de polimento
- Uma excelente relação qualidade/preço para o consultório dentário e para o paciente

Duas tonalidades translúcidas de esmalte para a caracterização individual

BRILLIANT COMPONEER
Bleach Translucent



BRILLIANT COMPONEER
Translucent



Brilho duradouro, suave para a substância dentária

Preparação minimamente invasiva

O exclusivo processo de fabrico de BRILLIANT COMPONEER permite produzir camadas extremamente finas a partir de 0,3 mm. Isto permite uma preparação minimamente invasiva preservando a substância dentária existente. Ao mesmo tempo, as facetas de compósito produzidas industrialmente apresentam uma homogeneidade e uma estabilidade excelentes.

Comparação em digitalizações 3D para mostrar a espessura da camada das facetas. Fonte: medições por Units IM-TECHNOLOGY AG, Suíça



BRILLIANT COMPONEER



Concorrente A




Concorrente B

Excelente efeito de integração

Todos os produtos da série de compósito BRILLIANT impressionam com os seus excelentes efeitos de integração. Isto permite que as facetas COMPONEER sejam incorporadas de forma praticamente invisível. É fácil escolher a tonalidade certa do compósito de cimentação BRILLIANT

EverGlow graças ao prático conceito "Duo Shade" com tonalidades como A1/B1 ou A2/B2. Além disso, o gradiente de tonalidade natural do dente é reproduzido pela espessura crescente das facetas translúcidas no sentido do bordo incisal.

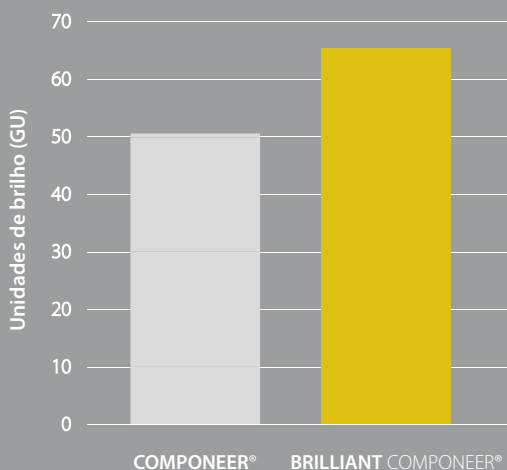

Fonte: dados internos

Brilho duradouro e estabilidade da cor

Enquanto pioneira em terapia de enchimento estético, a COLTENE é sempre sinónimo de inovação e soluções práticas. Num processo de produção inventado especialmente para o efeito, as facetas BRILLIANT COMPONEER são polimerizadas. Devido à composição de enchimento inteligente, as facetas de compósito apresentam uma superfície macia e sedosa. Além disso, as facetas destacam-se pelo seu alto brilho e estabilidade da cor, o que resulta num elevado efeito estético.

Uma comparação com a série clássica COMPONEER e BRILLIANT COMPONEER no simulador de escova de dentes demonstra a maior retenção do brilho sob carga contínua intensiva com mais de 20 000 movimentos de escova.

Extraordinária aderência graças à microrretenção

A exclusiva superfície interna microrretenitora de BRILLIANT COMPONEER aumenta a molhabilidade das facetas de compósito pelo agente adesivo. Isto resulta numa aderência muito superior em comparação com, por exemplo, as facetas clássicas de cerâmica.




De longa duração devido à elasticidade semelhante à da dentina

São geradas elevadas forças tensionais na interface adesiva entre o dente e o material de restauração sob carga. Devido ao módulo de elasticidade semelhante à dentina de BRILLIANT COMPONEER, as tensões são mantidas baixas.

Isto previne fissuras ou lascas – uma boa base para restaurações particularmente duráveis.

Módulo E: 9,8 GPa
Resistência à flexão 125 MPa

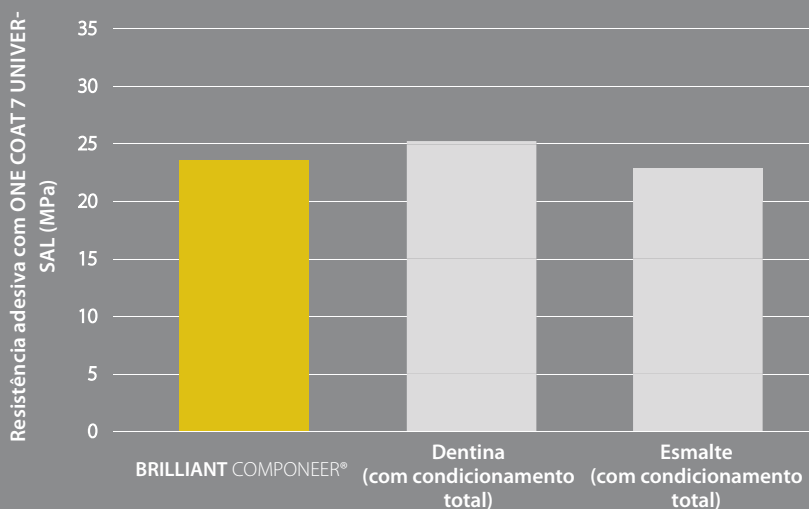

Fonte: dados internos

Aderência fiável à substância dentária

ONE COAT 7 UNIVERSAL é o parceiro perfeito para a cimentação BRILLIANT COMPONEER. O agente adesivo universal monocomponente fotopolimerizável pode ser usado com todas as técnicas atuais: seja para autocondicionamento, condicionamento seletivo ou condicionamento total, ONE COAT 7 UNIVERSAL apresenta uma excecional resistência adesiva em qualquer situação.

O extra para os seus pacientes ...

Os pacientes informados conhecem as suas necessidades

Um sorriso brilhante e autoconfiante abre portas tanto a nível profissional como na esfera privada. Os seus pacientes querem brilhar na vida e estão constantemente a otimizar a sua aparência. O ideal é que as

pequenas correções se façam de forma rápida e fácil, sem interrupções desnecessárias na rotina quotidiana. Ao mesmo tempo, os clientes bem informados esperam uma boa relação qualidade/preço.



BRILLIANT COMPONEER convence os pacientes exigentes com:

- Resultados estéticos
- Retenção de alto brilho e durabilidade
- Boa qualidade a preços justos
- Solução rápida numa única sessão
- Preparação minimamente invasiva, suave para a substância dentária
- Sem laboratório, sem moldagem e sem as aborrecidas restaurações temporárias

... e para o seu consultório

Os consultórios modernos marcam pontos com tratamentos inovadores

Você gere o seu consultório sem gastar muito, e de acordo com os mais recentes padrões profissionais. Com as ofertas de tratamentos inovadores, irá inspirar os seus pacientes e estar sempre um passo à frente da concor-

rência. Os seus clientes irão apreciar o aconselhamento competente sobre as melhores opções de tratamento e irão adorar as soluções atrativas e personalizadas.

O seu consultório irá também tirar partido do sistema de facetas diretas de compósito:

- Resultados estéticos e duradouros
- Eficiente em comparação com restaurações diretas de compósito
- Minimamente invasivo em comparação com a técnica de facetas indiretas
- Excelente relação qualidade/preço na utilização diária
- Sem moldagem e sem necessidade de laboratório
- Sistema de compósito combinado na perfeição
- Uma vasta gama de aplicações para uma série de indicações clássicas
 - Restauração e facetagem de defeitos decorrentes de cáries
 - Facetagem de restaurações antigas
 - Reconstrução da substância dentária perdida
 - Restauração de fraturas dos dentes
 - Alargamento de bordos incisais
 - Correções cosméticas de descoloração dentária e de posições incorretas
 - Correção de malformações anatómicas
 - Fecho de diastema



"Os meus pacientes estão a adorar o seu sorriso novo. Muitas vezes ficam surpreendidos com a rapidez e o baixo custo das soluções de alta qualidade que os dentistas conseguem atualmente. Com BRILLIANT COMPONEER, consigo calcular sozinho todos os custos e de forma económica, sem um laboratório ou outros intermediários."


Dr. méd. dent. Mario Besek
Suíça

BRILLIANT COMPONEER®


O sucesso em apenas alguns passos



1 A situação inicial: dentes anteriores com restaurações antigas e descoloradas

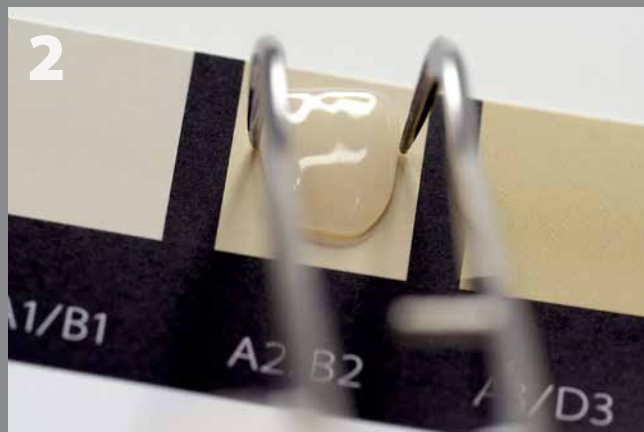

2 Seleção da tonalidade: o Shade Guide é usado para determinar a tonalidade de BRILLIANT COMPONEER e do material de cimentação.

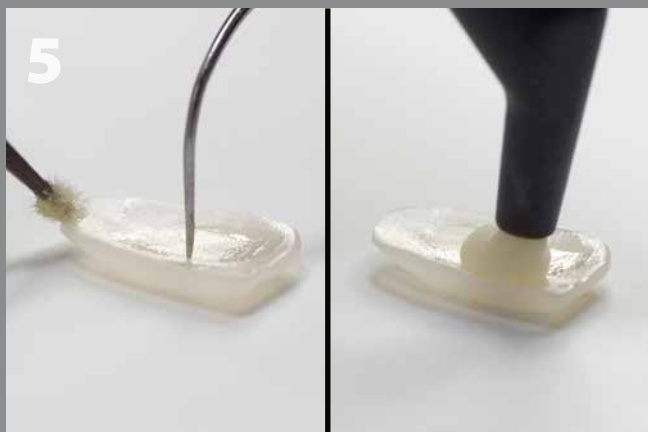

5 Preparação: ONE COAT 7 UNIVERSAL e BRILLIANT EverGlow são aplicados para cimentação.



6 Colocação: BRILLIANT COMPONEER é posicionado no dente e polimerizado a seguir.

DICA

Do consultório: Tão individual como os seus pacientes

BRILLIANT COMPONEER são fáceis de personalizar. Mediante a utilização de um disco, a forma anatómica básica pode ser acabada individualmente para o paciente. Além disso, a textura da superfície labial pode ser acentuada com um diamante de grão fino.



3
Seleção do tamanho: depois da preparação, o tamanho certo é determinado mediante o Contour Guide transparente.



4
Ligação: aplicação de ONE COAT 7 UNIVERSAL depois de usar a técnica de condicionamento total.



7
Polimento: um polimento rápido melhora o brilho inerente do material.



8
O resultado: um sorriso brilhante duas semanas depois do tratamento.



VEJA O VÍDEO COMPLETO



www.componeer.info

DICA

Do consultório: Fácil de reparar

Tal como qualquer restauração à base de compósito, é possível fazer pequenas correções em qualquer altura. Dado que BRILLIANT COMPONEER e BRILLIANT EverGlow têm a mesma base de compósito, as facetas podem ser facilmente cimentadas com o compósito universal e reparadas a seguir.

Informações para encomendas

Kits BRILLIANT COMPONEER

Conteúdo			REF							
			Bleach Translucent ¹				Translucent ²			
			S	M	L	XL	S	M	L	XL
Kit para maxilar superior BRILLIANT COMPONEER	6 unid.	11, 12, 13, 21, 22, 23	60023198	60023200	60023201	60023203	60023204	60023206	60023207	60023209
Kit para pré-molares do maxilar superior BRILLIANT COMPONEER	2 unid.	14, 24	60023194	-	60023195	-	60023196	-	60023197	-
Kit para maxilar inferior BRILLIANT COMPONEER	6 unid.	31, 32, 33, 41, 42, 43	60023210	60023211	-	-	60023212	60023213	-	-

Recargas BRILLIANT COMPONEER

Conteúdo			REF							
			Bleach Translucent ¹				Translucent ²			
	unid.		S	M	L	XL	S	M	L	XL
Maxilar superior	11	1 unid.	60023122	60023128	60023134	60023140	60023158	60023164	60023170	60023176
	12	1 unid.	60023123	60023129	60023135	60023141	60023159	60023165	60023171	60023177
	13	1 unid.	60023124	60023130	60023136	60023142	60023160	60023166	60023172	60023178
	21	1 unid.	60023125	60023131	60023137	60023143	60023161	60023167	60023173	60023179
	22	1 unid.	60023126	60023132	60023138	60023144	60023162	60023168	60023174	60023180
	23	1 unid.	60023127	60023133	60023139	60023145	60023163	60023169	60023175	60023181
Maxilar inferior	31	1 unid.	60023146	60023152	-	-	60023182	60023188	-	-
	32	1 unid.	60023147	60023153	-	-	60023183	60023189	-	-
	33	1 unid.	60023148	60023154	-	-	60023184	60023190	-	-
	41	1 unid.	60023149	60023155	-	-	60023185	60023191	-	-
	42	1 unid.	60023150	60023156	-	-	60023186	60023192	-	-
	43	1 unid.	60023151	60023157	-	-	60023187	60023193	-	-

Maxilar superior						
FDI	13	12	11	21	22	23

Maxilar superior		
FDI	14	24

Maxilar inferior						
FDI	43	42	41	31	32	33



¹ A nova tonalidade Translucent corresponde à anterior tonalidade COMPONEER Universal

² A nova tonalidade Bleach Translucent corresponde à anterior tonalidade COMPONEER White Opalescent

Kit de seringas BRILLIANT COMPONEER

REF	Item	Acessórios
60023214	Kit Introdução Seringas	
		
1 x 6	Facetas para maxilar superior, Bleach Translucent, M, 11-13/21-23	25 x Escovas COMPONEER
1 x 6	Facetas para maxilar superior, Bleach Translucent, L, 11-13/21-23	1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar inferior M
1 x 6	Facetas para maxilar superior, Translucent, M, 11-13/21-23	1 x Aplicador
1 x 6	Facetas para maxilar superior, Translucent, L, 11-13/21-23	1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar inferior S
1 x 2	Facetas para maxilar superior, pré-molares, Bleach Translucent, L, 14/24	1 x 2,5 ml Etchant Gel S
1 x 2	Facetas para maxilar superior, pré-molares, Translucent, L, 14/24	1 x Instrumento de modelagem MBC
		2 x Adaptador de aplicador
		10 x Marcador de aplicador
		1 x Polidor de silicone 2303RA
		1 x Polidor de silicone 2311RA
		1 x Polidor de silicone 2403RA
		1 x Polidor de silicone 2411RA
		1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar superior L
		1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar superior M
		1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar superior S
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow A1/B1
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow A2/B2
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow Translucent (Trans)
		1 x 3 g BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans)
		1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
		1 x 20 unid. Agulhas de aplicação
		1 x BRILLIANT COMPONEER Shade Guide

Pontas do kit BRILLIANT COMPONEER

REF	Item	Acessórios
60023215	Kit Introdução Tips	
		
1 x 6	Facetas para maxilar superior, Bleach Translucent, M, 11-13/21-23	25 x Escovas COMPONEER
1 x 6	Facetas para maxilar superior, Bleach Translucent, L, 11-13/21-23	1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar inferior M
1 x 6	Facetas para maxilar superior, Translucent, M, 11-13/21-23	1 x Aplicador
1 x 6	Facetas para maxilar superior, Translucent, L, 11-13/21-23	1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar inferior S
1 x 2	Facetas para maxilar superior, pré-molares, Bleach Translucent, L, 14/24	1 x 2,5 ml Etchant Gel S
1 x 2	Facetas para maxilar superior, pré-molares, Translucent, L, 14/24	1 x Instrumento de modelagem MBC
		2 x Adaptador de aplicador
		10 x Marcador de aplicador
		1 x Polidor de silicone 2303RA
		1 x Polidor de silicone 2311RA
		1 x Polidor de silicone 2403RA
		1 x Polidor de silicone 2411RA
		1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar superior L
		1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar superior M
		1 x COMPONEER Contour Guide – maxilar superior S
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow A1/B1
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow A2/B2
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow Translucent (Trans)
		8 x 0,2 g BRILLIANT EverGlow Bleach Translucent (BL Trans)
		1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
		1 x 20 unid. Agulhas de aplicação
		1 x BRILLIANT COMPONEER Shade Guide



No meu consultório, agora, quase todas as semanas, faço uma restauração com BRILLIANT COMPONEER. Nos meus workshops, surpreendo-me sempre com a rapidez com que os utilizadores estreados aprendem a manusear as facetas de compósito fáceis de processar. Até as restaurações de dentes anteriores esteticamente exigentes podem ser feitas num instante.

Dr. méd. dent. Patrizia Lucchi
Itália




Para mim, as preparações minimamente invasivas são a base de cada tratamento permanente. Só preciso de remover uma quantidade ínfima de substância dentária saudável para as facetas de compósito relativamente finas e extremamente estáveis. Isto significa que podem ser usadas de forma rápida e fácil para uma vasta gama de indicações.

Dr. méd. dent. Sylvia Rahm
Alemanha



© COLTENE – www.coltene.com



Coltene Iberia S.L.U.
c/Doctor Fleming, 3 - Bajo A
28220 Majadahonda, Madrid / Spain
T +34 91 63 86 492
F +34 91 63 86 279
info.ib@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Suíça
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com



LINK PARA
MAIS INFORMAÇÕES



www.componeer.info

 **COLTENE**